

The background of the entire page is a dynamic, abstract composition of glowing blue and white light trails. These trails, which resemble smoke or energy flows, originate from the left side and sweep across the frame towards the right. A bright, circular light source is visible in the lower-left quadrant, from which several beams of light radiate outwards. The overall effect is one of high-tech, futuristic energy.

# **digipax**

**Versione 1.4.6**

**Manuale utente**



## Indice

1 Nota generale.....	7
2 Simboli ed illustrazioni.....	7
3 Consigli inerenti la sicurezza .....	8
3.1 Software.....	8
3.2 Termini di utilizzo .....	8
3.3 Profilo utente .....	8
3.4 Hardware .....	8
3.5 Ridondanza.....	8
3.6 Arresto anomalo .....	9
3.7 Messaggi .....	9
3.8 Ispezione visiva.....	9
3.9 Sicurezza dei dati .....	9
3.10 Controllo .....	9
3.11 Periodo di validità .....	9
4 Installazione e manutenzione.....	9
4.1 Installazione .....	9
4.2 Pulizia.....	9
5 Avvio del programma .....	10
6 Aspetto dello schermo .....	11
6.1 Pulsante Start / intestazione (opzionale).....	12
6.2 Area immagine / browser .....	13
6.3 Piè di pagina .....	13
6.4 Toolbox / barra degli strumenti (opzionale) .....	13
6.5 Cursori di divisione della finestra.....	13
7 Visualizzazione dell'immagine / browser .....	14
7.1 Selezione immagine .....	14
7.2 Visualizzazione delle immagini.....	15
7.2.1 Funzioni del mouse.....	16
7.2.2 Avvicina .....	17
7.2.3 Overlay .....	18
7.2.4 Doppia visualizzazione .....	18
7.2.5 Altre funzioni.....	19
7.2.6 Selezione dell'immagine.....	20
7.2.7 Protezione delle immagini (blocco) .....	20
7.2.8 Menu di scelta rapida.....	20
7.3 Operazioni sulle immagini .....	21
7.3.1 Trasformazioni (rotazione, immagine speculare, capovolgimento) .....	22
7.3.2 Gestione finestra.....	22
7.3.3 Filtri .....	23
7.3.4 Annotazioni / misurazioni .....	26
7.3.5 Oscuramento parziale dello schermo .....	28

---

7.3.6	Anteprima della sequenza di immagini (cine loop).....	29
7.4	Linee di taglio (scout lines) .....	30
7.5	Istogramma.....	30
7.6	Easy Report.....	31
8	Gestione dei pazienti.....	33
8.1	Dati dei pazienti.....	33
8.2	Sorgenti dati .....	34
8.2.1	Archivio immagini .....	34
8.2.2	File singoli .....	36
8.2.3	CD paziente (DICOMDIR) .....	37
8.3	Immissione di un nuovo paziente / modifica dei dati del paziente.....	37
8.4	Rimozione del paziente.....	38
8.5	Invio di immagini di pazienti nell'archivio immagini.....	39
8.6	Modifica dei dati dei pazienti .....	39
8.7	Elenco di esami, serie ed immagini .....	40
8.8	Uscire dalla gestione pazienti .....	40
8.9	Funzione di rimozione .....	40
8.9.1	Rimozione immagini .....	40
8.9.2	Modifica dell'assegnazione delle immagini .....	41
9	Importazione.....	42
9.1	Nota generale .....	42
9.2	Finestra di dialogo di importazione.....	43
9.3	Scansione di documenti .....	44
10	Esportazione .....	45
10.1	Selezione .....	45
10.2	Impostazioni .....	46
10.2.1	Nome del file per l'esportazione di immagini .....	46
10.2.2	Formato per l'esportazione delle immagini .....	46
10.2.3	Esportazione come file .....	47
10.2.4	Esporta come email.....	47
11	Stampa.....	48
12	CD paziente .....	50
12.1	Nota generale .....	50
12.2	Selezione delle immagini .....	50
12.3	Unità / supporti .....	50
12.4	Opzioni.....	51
12.5	Masterizzazione/copia dei dati .....	52
12.6	Creazione di un CD paziente sfruttando il robot di masterizzazione .....	53
12.6.1	EPSON PP-100 / PP-100N .....	53
12.6.2	PRIMERA Disc Publisher .....	54
13	Stampa delle etichette.....	57
13.1	Nota generale .....	57
13.2	Stampanti e supporti.....	57
13.3	Selezione modello e stampa.....	57
13.4	Impostazioni della stampante .....	59

---



---

13.5 Creazione di un modello .....	60
13.5.1 Inserimento, modifica ed eliminazione di elementi .....	60
13.5.2 Modifica dei campi di testo .....	62
13.6 Modifica, duplicazione ed eliminazione dei modelli .....	63
13.7 Requisiti sulle informazioni presenti sui supporti dati .....	63
14 Gestione richieste .....	65
14.1 Creazione della richiesta e aggiornamento dell'elenco richieste.....	65
14.2 Filtra elenco delle richieste .....	65
14.3 Creazione di richieste .....	66
14.4 Gestione della tabella organi e codici procedurali .....	68
14.5 Cancellazione delle richieste.....	69
14.6 Voce del registro radiografico.....	69
14.6.1 Dati della richiesta dalla lista di lavoro.....	69
14.6.2 Dati dalle immagini ricevute.....	69
14.6.3 Senza trasferimento dei dati .....	70
14.7 Visualizzazione delle immagini ottenute.....	70
14.8 Uscire dalla gestione richieste .....	70
15 Registro radiografico.....	71
15.1 Nuova voce .....	71
15.2 Visualizzazione delle voci del registro radiografico .....	71
15.3 Filtraggio .....	71
15.3.1 Cognome del paziente .....	72
15.3.2 Regione del corpo .....	72
15.3.3 Intervallo temporale .....	72
15.4 Esportazione.....	72
15.5 Pulizia (rimozione).....	72
16 Acquisizione di immagini .....	73
16.1 Nota generale .....	73
16.2 Processo di acquisizione immagini/ricezione immagini con la gestione richieste .....	74
16.2.1 Pianificazione richieste.....	75
16.3 Processo di acquisizione/ricezione di immagini senza gestione richieste .....	75
16.4 Acquisizione di immagini radiografiche .....	76
16.4.1 Nota generale.....	76
16.4.2 Processo di acquisizione di immagini radiografiche .....	76
16.4.3 Selezione .....	78
16.4.4 Ritagliare un'immagine .....	78
16.4.5 Trasformazioni delle immagini / modalità finestra / filtri / diaframma .....	79
16.4.6 Rifiuto delle immagini .....	79
16.4.7 Dispositivi supplementari.....	80
16.4.8 Backup .....	80
16.4.9 Registro radiografico.....	80
16.4.10 Risoluzione dei problemi .....	81
16.5 Frame grabber / acquisizione di serie di immagini .....	82
16.5.1 Nota generale.....	82
16.5.2 Requisiti di sistema per l'installazione del processore video frame grabber ..	82

---

16.5.3	Configurazione di frame grabber nel digipaX.....	83
16.5.4	Componenti di gestione del processore video frame grabber.....	84
16.5.5	Acquisizione tramite il processore video frame grabber.....	85
16.5.6	Acquisizione tramite il modulo di acquisizione immagini.....	86
16.5.7	Elaborazione e salvataggio delle immagini ottenute.....	86
16.5.8	Importazione del backup.....	87
16.5.9	Risoluzione dei problemi.....	87
17	Configurazione .....	89
18	Chiusura .....	96
18.1	Chiusura del programma .....	96
18.2	Spegnimento dell'hardware .....	96
19	Connettore GDT .....	97
20	Versione veterinaria .....	98
20.1	Gestione dei pazienti .....	98
20.2	Gestione richieste .....	99
20.3	Misurazioni speciali (veterinarie) .....	99
20.4	Stampa.....	100
20.5	Esportazione .....	100
20.6	CD paziente .....	100
20.7	Altro .....	101
21	Collegamento del LOCALITE OrthoPlaner .....	102
22	Altro.....	102
22.1	Tabelle.....	102
22.2	Suggerimenti .....	102
22.3	Chiusura del programma .....	102
22.4	Contratto di licenza .....	102

## 1 Nota generale



Il software DigipaX è destinato alla gestione, presentazione ed esportazione nello standard DICOM, d'immagini provenienti da diverse modalità operative (ad es. immagini radiografiche (CR, DR) o immagini CT). Inoltre il software offre una serie di strumenti utili nel lavoro quotidiano di elaborazione d'immagini mediche.

Tutte le tecniche e le procedure (costruzione dell'immagine, comunicazione, salvataggio dati, ecc.) sono compatibili con lo standard DICOM 3.

Il sistema può essere utilizzato come workstation indipendente con un proprio archivio immagini (PACS) o all'interno di una rete più complessa, con molte stazioni ed archivi. Allo stesso tempo è possibile collegare alla rete anche sistemi di altri produttori.

Inoltre le richieste possono essere scambiate sia attraverso i cosiddetti server liste di lavoro, sia sotto forma di dati, nonché come comandi diretti dai sistemi di gestione della clinica.

## 2 Simboli ed illustrazioni

Simbolo	Significato
	Nota
	Indicazione

Tutte le illustrazioni (printscreen) del software digipaX presentano le finestre del programma nella sua visualizzazione classica. In questo modo le illustrazioni risultano più facilmente visibili nella documentazione. Le impostazioni default del programma prevedono finestre di colore nero, che consentono una migliore visualizzazione delle immagini mediche.

## **3 Consigli inerenti la sicurezza**

### **3.1 Software**

Non è consentito apportare modifiche a questo software senza il consenso del produttore.

### **3.2 Termini di utilizzo**

**Il prodotto è stato concepito per l'uso su PC in locali abitativi ed uffici. L'equipaggiamento utilizzato deve essere adatto alle condizioni ambientali imperanti nell'ambiente di lavoro. L'utente del PC deve verificare personalmente se l'apparecchiatura è conforme ai requisiti vigenti nel luogo d'installazione.**

### **3.3 Profilo utente**

Il prodotto è destinato per l'uso da parte di personale medico. L'utente deve essere in possesso delle seguenti qualifiche:

- conoscenze professionali necessarie,
- addestramento all'uso di dati d'immagini radiografiche,
- competenze informatiche di base,
- conoscenza di una delle lingue utilizzate dal sistema.

### **3.4 Hardware**

L'hardware impiegato deve possedere il marchio CE e soddisfare i requisiti della direttiva di Compatibilità elettromagnetica e della direttiva bassa tensione. Osservare le restrizioni d'uso e le disposizioni nell'ambito della manutenzione e del funzionamento delle apparecchiature installate, conformemente alle informazioni del produttore ed alla norma EN 60950-1.

L'hardware deve essere installato ad una distanza di minimo 1,50 m dal paziente (per impedire il possibile contatto contemporaneo del paziente e dell'hardware). Inoltre si deve prestare attenzione affinché l'equipaggiamento hardware sia posizionato in modo stabile e sicuro. I monitor devono essere in posizione stabile, in modo tale che non possano essere fatti cadere inavvertitamente. I cavi devono essere condotti in modo tale da non essere lasciati liberi, fatte salve situazioni giustificate.

L'apparecchiatura deve essere posizionata in modo tale da consentirne il facile e veloce scollegamento dalla rete elettrica in caso di emergenza. Eventualmente utilizzare prese multiple scollegabili, cui deve essere assicurato un facile accesso.

Tastiera, mouse e monitor devono essere posizionati sulla postazione di lavoro in modo tale da eliminare la loro influenza fisica sull'ambiente.

### **3.5 Ridondanza**

L'utente del sistema è responsabile dell'uso di protezioni ridondanti (multiple) del sistema, in modo tale che il guasto di una protezione non comporti un rischio ingiustificato.



### **3.6 Arresto anomalo**

Dopo un eventuale arresto anomalo (interruzione della corrente o blocco del sistema) è necessario seguire le indicazioni per il ripristino delle immagini non salvate (16.4.10 Risoluzione dei problemi).

### **3.7 Messaggi**

Informare immediatamente il fornitore o l'informatico addetto al sistema circa eventuali messaggi provenienti dall'apparecchiatura (segnalati da un bip) e messaggi provenienti dai programmi (messaggi di errore del sistema operativo, dei driver o del software stesso).

### **3.8 Ispezione visiva**

Al fine di garantire l'elevata qualità delle immagini visualizzate sulla stazione diagnostica di lavoro si raccomanda l'ispezione visiva quotidiana del display. L'ispezione visiva può essere effettuata utilizzando un programma dedicato o un campione SMPTE. Qualora il monitor non soddisfi i parametri richiesti, deve essere regolato manualmente da uno specialista o sostituito. L'amministratore / il supervisore del sistema fornirà informazioni su come procedere in tali casi.

### **3.9 Sicurezza dei dati**

Tutte le nuove immagini devono essere salvate ogni settimana su CD o DVD. I supporti con i dati salvati devono essere conservati separatamente dal computer su cui è installato l'archivio immagini (server).

### **3.10 Controllo**

Il controllo tecnico della sicurezza del sistema deve essere effettuato con cadenza annuale.

### **3.11 Periodo di validità**

Il periodo di validità del prodotto è di 1 anno.

## **4 Installazione e manutenzione**

### **4.1 Installazione**

Le istruzioni per l'installazione si trovano nella descrizione tecnica (manuale dell'amministratore). Le operazioni relative all'installazione ed alla manutenzione possono essere effettuate solo da persone autorizzate dal fabbricante. Tali persone possono essere delegate dal fabbricante per l'esecuzione di tali operazioni.

### **4.2 Pulizia**


In caso l'amministratore/il supervisore del sistema non indichi diversamente, le apparecchiature computer possono essere pulite con disinfettanti reperibili comunemente in commercio.

## 5 Avvio del programma

Prima di utilizzare il software avviare il computer su cui è installato il file di licenza e garantire la disponibilità delle connessioni di rete per l'operatività. Adeguate informazioni in merito verranno fornite dall'amministratore del sistema digipaX.

Accendere il computer ed attendere l'avvio completo di Windows. Se nella clinica vengono utilizzati uno o più switch di rete, questi devono essere precedentemente accesi. Adeguate informazioni in merito verranno fornite dall'amministratore del sistema.

Successivamente accendere il computer della workstation ed attendere l'avvio completo di Windows. Accedere al computer (se il login è richiesto).


È possibile eseguire il programma premendo il simbolo  sul desktop o dal menu programmi. Se il programma viene avviato automaticamente con il lancio del sistema Windows, l'icona corrispondente si troverà in basso a destra nel cosiddetto vassoio di sistema.

Dopo aver connesso il programma di gestione della clinica, il software può essere anche attivato automaticamente o attraverso questo software. La connessione può essere stabilita mediante connettori GDT o HL7. Tali connessioni devono essere configurate dall'amministratore di sistema.

Nel caso in cui il programma si blocchi, è necessario riavviarlo facendo doppio click su qualsiasi delle connessioni sopra descritte o attraverso il sistema di gestione della clinica. Se il blocco del sistema si verifica durante l'acquisizione delle immagini e queste ultime non sono state salvate, è possibile ripristinare le immagini creando automaticamente un backup e successivamente salvandole. Per ulteriori informazioni in merito vedere i capitoli 16.4.8 Backup o 16.5.8 Importazione del backup..


## 6 Aspetto dello schermo

Layout dello schermo

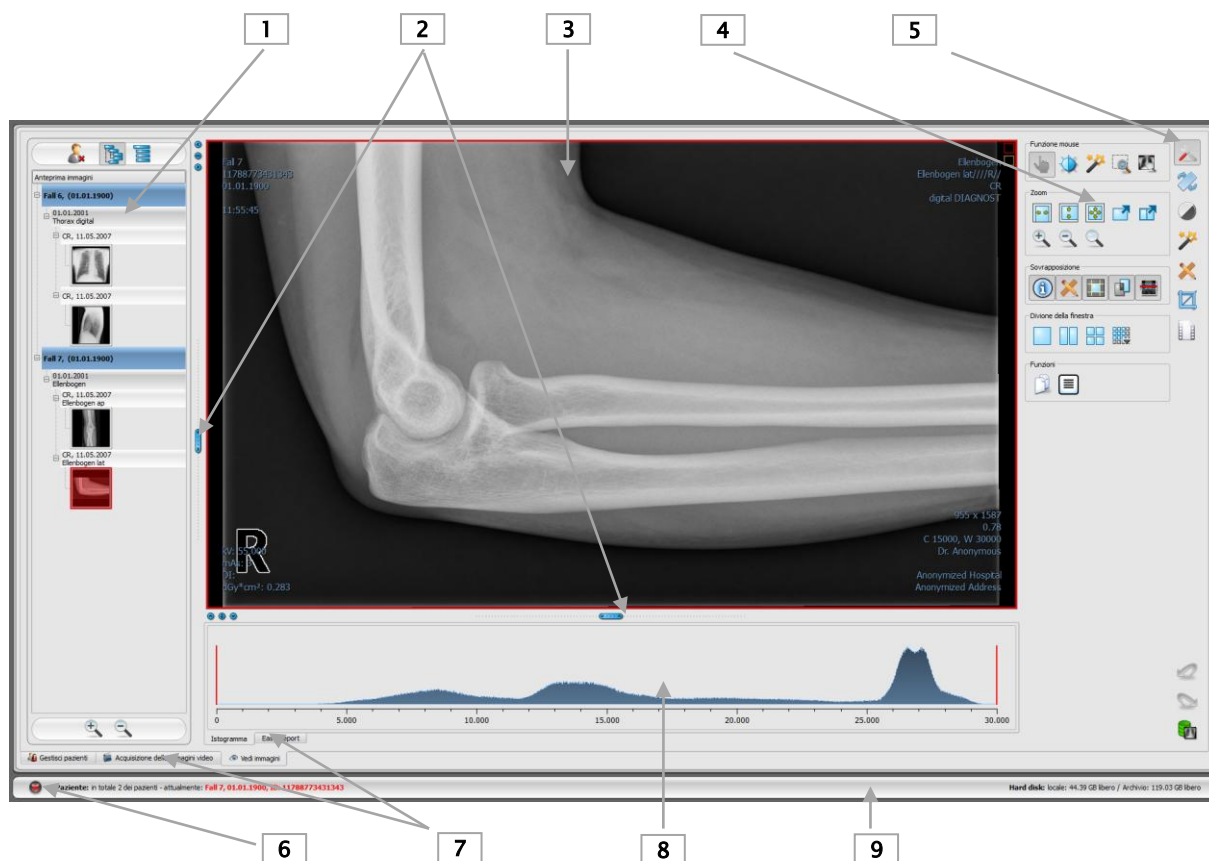

- 1 – **Anteprima miniature**: visualizza tutte le immagini dei pazienti selezionati in forma di immagini in miniatura (nella struttura ad albero con esami e serie)
- 2 – **Cursori** per modificare la divisione dell'immagine o nascondere le finestre
- 3 – **Area immagine / browser**: mostra una o più immagini affiancate o in sequenza
- 4 – **Strumenti** con funzioni di editing delle immagini (divisi in vari toolbox)
- 5 – **Selezione** di diversi toolbox
- 6 – **Pulsante Start**: avvia diversi componenti del software, chiude o riduce ad icona il programma
- 7 – **Vari componenti**: la disponibilità di componenti dipende dal pacchetto software acquistato
- 8 – **Istogramma** dell'immagine attiva
- 9 – **Piè di pagina** con informazioni sui pazienti selezionati e sullo spazio disponibile sul disco rigido

Per avere a portata di clic i componenti più importanti del software e gli strumenti del browser, è possibile attivare l'intestazione e la barra degli strumenti. Dall'intestazione è possibile avviare direttamente i componenti, e nella barra degli strumenti si trovano vari strumenti (maggiori informazioni in merito nei capitoli 6.1 e 6.4).

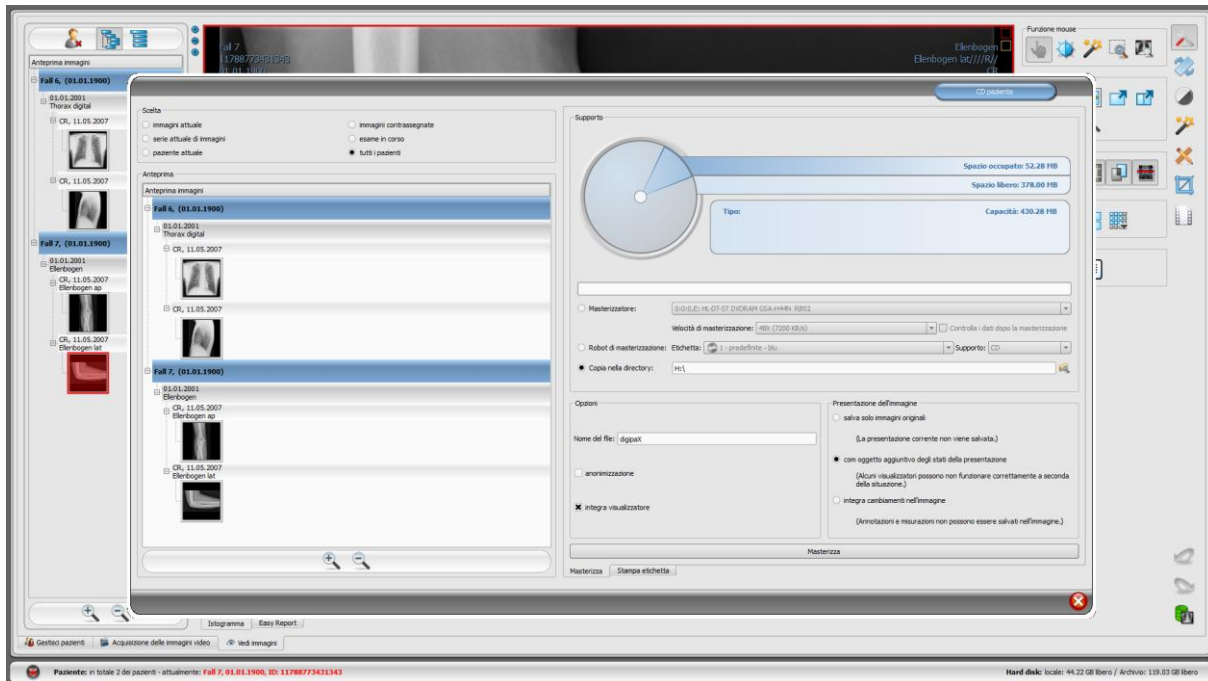

Esempio di visualizzazione dello schermo dopo l'avvio del componente – qui viene mostrata una grande finestra di dialogo per la creazione del CD paziente

La gestione dei pazienti può essere visualizzata come componente separato, come la finestra di dialogo presentata sopra. A tal fine leggere il capitolo 8.

## 6.1 Pulsante Start / intestazione (opzionale)



Il pulsante Start in basso a sinistra viene utilizzato per aprire il menu (simile al menu start di Windows), in cui è possibile eseguire i singoli componenti del programma, e chiudere o ridurre ad icona il programma.

I componenti sono:

- gestione pazienti (solo se la scheda gestione pazienti non è attiva, vedi capitolo 17, sottopunto Interfaccia utente)
- importazione
- stampa
- CD paziente
- gestione delle richieste (DICOM Worklist Management)
- registro radiografico
- configurazione

L'intestazione è attivabile facoltativamente nella configurazione (capitolo 17), tramite l'interfaccia utente. L'intestazione viene visualizzata nella parte superiore del monitor. Nell'intestazione si trovano tutte le funzioni del menu di avvio, cui si può accedere con un solo clic.

## 6.2 Area immagine / browser

Nella barra sul lato sinistro vengono visualizzate le miniature, al centro l'immagine/i selezionate in grandi dimensioni e nella barra sul lato destro sono disponibili le funzioni di editing dell'immagine. Inoltre sotto l'immagine visualizzata è presente l'istogramma dell'immagine corrente.

## 6.3 Piè di pagina

Nel piè di pagina vengono visualizzate le informazioni sul paziente e lo spazio disponibile sul disco rigido. In caso di selezione di più pazienti, nel piè di pagina viene visualizzato il paziente attivo, ossia quello cui appartiene l'immagine attualmente visualizzata.

Nella configurazione è possibile specificare le unità, la cui capacità verrà visualizzata (fino a 3 unità). Se uno dei dischi non è disponibile o la sua capacità è inferiore al valore critico, verrà visualizzato un messaggio di avviso. Quando la capacità del disco si avvicina al valore critico (spazio disponibile inferiore al doppio del valore critico), le informazioni sul display verranno visualizzate in grassetto in rosso. Normalmente il messaggio viene visualizzato in carattere nero standard.

Il piè di pagina è visibile in tutti i componenti del programma.

## 6.4 Toolbox / barra degli strumenti (opzionale)

Nei toolbox sono disponibili in una varietà di funzioni del mouse, impostazioni per la funzione di ingrandimento (zoom) e funzioni di sovrapposizione ed suddivisione dell'immagine. Ogni toolbox può essere espanso e ridotto separatamente.

La barra degli strumenti è attivabile facoltativamente nella configurazione (capitolo 17) tramite l'interfaccia utente. La barra degli strumenti viene visualizzata sopra il browser immagini e contiene tutte le funzionalità del toolbox, cui è possibile accedere con un solo clic.

## 6.5 Cursori di divisione della finestra

Tra l'anteprima miniature (a sinistra) e l'area dell'immagine, e fra la parte inferiore del browser e l'area dell'immagine sono collocati dei cursori per la suddivisione della finestra. Spostando i cursori a sinistra, a destra, su o giù, è possibile adattare la suddivisione dell'immagine. In questo modo è possibile anche nascondere completamente la finestra.



Utilizzando i piccoli pulsanti sulla barra degli strumenti è possibile ridurre l'area soprastante o sottostante l'immagine (o a sinistra o destra di essa) e ripristinarla con il pulsante centrale. Le modifiche di suddivisione della finestra vengono mantenute dopo la chiusura del programma.

## 7 Visualizzazione dell'immagine / browser

Il componente per la visualizzazione dell'immagine consente di scegliere, visualizzare e modificare l'immagine, ed eseguire diverse operazioni su quest'ultima.

Possono essere visualizzate immagini in scala di grigi ed a colori. Le immagini possono essere compresse o sotto forma di file RLE o JPG.



**Sul bordo superiore delle immagini compresse senza perdite viene visualizzata un'informazione su tale modalità di compressione. Queste immagini non sono sfruttabili ai fini della diagnosi, perché esiste la possibilità che a seguito della compressione abbia avuto luogo una perdita di informazioni importanti.**


Per le immagini in scala di grigi, le informazioni sulla loro presentazione: impostazioni per la gestione delle finestre, rotazione dell'immagine e le note di testo sull'immagine sono salvate nella directory selezionata come Grayscale Softcopy Presentation State (file DICOM). Ad un'apertura successiva dell'immagine queste informazioni verranno utilizzate automaticamente.

### 7.1 Selezione immagine

L'immagine viene selezionata dall'elenco sul lato sinistro dello schermo. La dimensione della lista (larghezza) può essere modificata utilizzando il cursore per dividere la finestra. La lista può essere nascosta completamente.

La visualizzazione può avvenire in forma di albero DICOM o elenco.

Nell'albero DICOM sono presentati gli esami dei pazienti selezionati. I pazienti costituiscono i nodi principali. I nodi degli esami possono essere espansi e ridotti. Le serie appaiono sotto forma di nodi secondari. Nei nodi della serie vengono visualizzate le immagini in miniatura. Le serie multi-fotogramma (multi frame) sono visualizzate solo in forma di miniature singole. Le serie multi-fotogramma sono serie di immagini raccolte in un solo file DICOM. Nell'angolo superiore destro dell'anteprima è indicato il numero del fotogramma attualmente visualizzato ed il numero di fotogrammi.

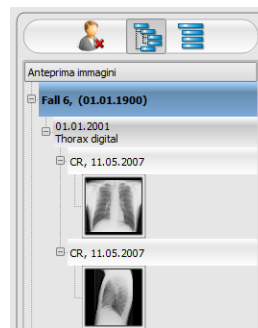

Nella visualizzazione in forma di elenco vengono inoltre visualizzate le informazioni inerenti ogni paziente presente nel nodo principale. In quest'ultimo si trova un elenco di tutte le immagini disponibili per un determinato paziente (ogni volta nodo ha una miniatura ed una didascalia), indipendentemente dalla loro appartenenza alla serie e agli esami. Il criterio di ordinamento, la direzione di ordinamento ed il testo mostrato nel nodo possono essere impostati nella configurazione (impostazione standard: data e ora dell'immagine).

Quando sullo schermo viene visualizzata l'immagine grande, la miniatura corrispondente è circondata da una cornice rossa.

Dopo aver fermato il cursore del mouse sopra il nodo (paziente, esame, serie o immagine) le informazioni inerenti la posizione vengono visualizzate nei suggerimenti.



Le dimensioni delle miniature possono essere impostate utilizzando i pulsanti più e meno presenti sotto la struttura ad albero. Le dimensioni delle immagini verranno salvate ed al prossimo avvio del software le immagini verranno mostrate direttamente in questa dimensione.

Facendo doppio clic sulla miniatura è possibile scaricare l'immagine nel browser. Se nel browser c'è ancora una finestra libera per l'immagine (visualizzatore del browser suddiviso, ad es. in 2 x 2 finestre, il browser può visualizzare contemporaneamente più immagini), in tal caso l'immagine verrà visualizzata nella finestra libera. Se non ci sono più finestre libere, l'immagine verrà visualizzata al posto dell'immagine nella finestra corrente.


Utilizzando la funzione trascina e rilascia (drag & drop) è possibile trascinare le anteprime nelle finestre del browser. Nel browser è anche possibile cambiare le immagini nelle finestre, sempre utilizzando questa funzione. L'utente può quindi suddividere le immagini sullo schermo nella modo che ritiene più comoda.

Facendo doppio clic sul nodo esame, le immagini di quest'esame verranno caricate automaticamente e a seconda delle modalità nelle diverse finestre del browser. La divisione delle finestre è definibile nella configurazione (vedi 17Configurazione).

La scelta dei pazienti può essere reimpostata con il pulsante "Pulisci scelta del paziente" sull'albero miniature. In tal caso non verrà scelto alcun paziente e l'albero delle miniature sarà vuoto.

## 7.2 Visualizzazione delle immagini

Le immagini vengono presentate nel browser. Il browser può essere suddiviso in più finestre contenenti immagini singole. Nel browser è possibile visualizzare più immagini affiancate. Allo stesso tempo si può visualizzare da 1 a 36 immagini.

Il browser possiede una varietà di funzioni per la presentazione delle immagini. Queste funzioni si trovano nella barra degli strumenti, visualizzabile con il pulsante  situato in alto a destra. Le funzioni sono descritte nei capitoli seguenti. Alcune delle caratteristiche sono nascoste di default. Cliccando con il tasto destro del mouse sul simbolo della funzione viene aperto il menu di scelta rapida. Lì è possibile visualizzare e nascondere le varie funzioni. In questo modo è possibile ordinare i pulsanti, escludendo le funzioni inutili.

Esiste inoltre la possibilità di visualizzazione perpetua della barra degli strumenti nella parte superiore del browser. A tal fine leggere la parte inerente l'interfaccia utente nel capitolo 17Configurazione.

## 7.2.1 Funzioni del mouse



Con questa barra degli strumenti è possibile selezionare le funzioni del pulsante sinistro del mouse:

- **spostamento** (quando la dimensione del display supera quella della finestra dell'immagine) – impostazione predefinita
  - **gestione finestra** (luminosità/contrasto)
    - ➔ movimento orizzontale del mouse: modifica il centro della finestra
    - ➔ movimento verticale del mouse: modifica la larghezza della finestra
- Nella configurazione (nella categoria "Altro") è possibile modificare i movimenti del mouse.
- **filtro Magic Sharp** (dimensione/nitidezza)
    - ➔ movimento orizzontale del mouse: modifica le dimensioni
    - ➔ movimento verticale del mouse: modifica la nitidezza

Per la descrizione dettagliata del funzionamento di questi filtri vedi il prosieguo del manuale nel capitolo 7.3.3.1 Magic Sharp.

- **rettangolo di zoom**
- **lente d'ingrandimento**


Il mouse può anche eseguire determinate funzioni con le seguenti combinazioni di tasti:

- Alt + pulsante sinistro del mouse: gestione finestra
- Alt + Maiusc + pulsante sinistro del mouse: evidenzia con il rettangolo di zoom
- Alt + pulsante destro del mouse: lente d'ingrandimento

Altre funzioni del mouse:

- Maiusc + pulsante sinistro del mouse: seleziona immagine
- Ctrl + pulsante sinistro del mouse: funzione trascina e rilascia per la sostituzione delle immagini nelle finestre
- pulsante destro del mouse: avvicina / allontana (con movimento verticale del mouse)
- tenendo premuto il tasto centrale del mouse o lo scroll: gestione finestra
- ruotando la rotella di scorrimento: immagine successiva o precedente della serie di immagini, esame o paziente (a seconda delle impostazioni), se prevista
- Ctrl + Maiusc + pulsante sinistro del mouse premuto: filtro Magic Sharp
- pulsante sinistro + destro del mouse premuto: filtro Magic Sharp

## 7.2.2 Avvicina

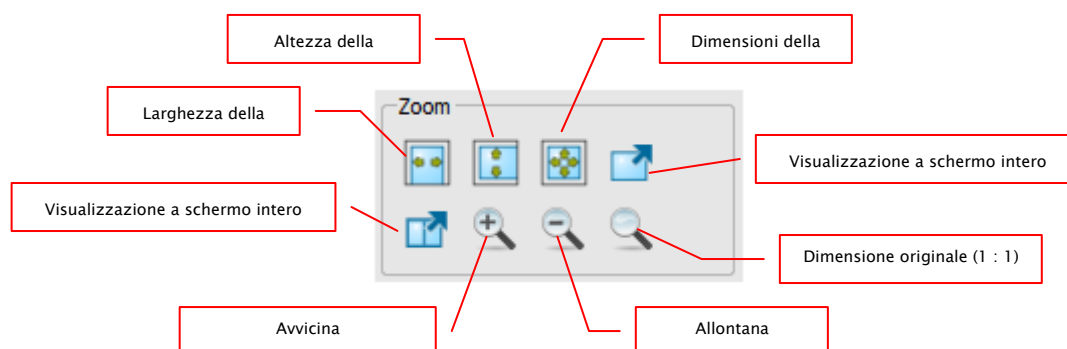


Le opzioni di ingrandimento dell'immagine si riferiscono sempre all'immagine attualmente visualizzata.

Per impostazione predefinita l'immagine viene visualizzata nella scala delle dimensioni della finestra. Se per quest' opzione vengono modificate le dimensioni della finestra, ad es. separando l'immagine, il fattore di ingrandimento verrà adattato di conseguenza, in modo tale che sia sempre visibile l'intera immagine.

Durante la sostituzione delle immagini nelle finestre tramite la funzione trascina e rilascia, i fattori di ingrandimento delle immagine rimangono invariati.

Premendo una volta il pulsante Invio o il pulsante "Visualizzazione a schermo intero della finestra corrente" è possibile attivare la modalità di visualizzazione a schermo intero. In tal caso l'immagine corrente viene adattata alla dimensione dello schermo. Premendo i tasti Maiusc + Invio o il pulsante "Visualizzazione a schermo intero diviso" tutte le finestre presenti (con lo schermo diviso) verranno adattate alle dimensioni dello schermo intero. Per uscire dalla modalità a schermo intero premere il tasto Esc.

### 7.2.3 Overlay

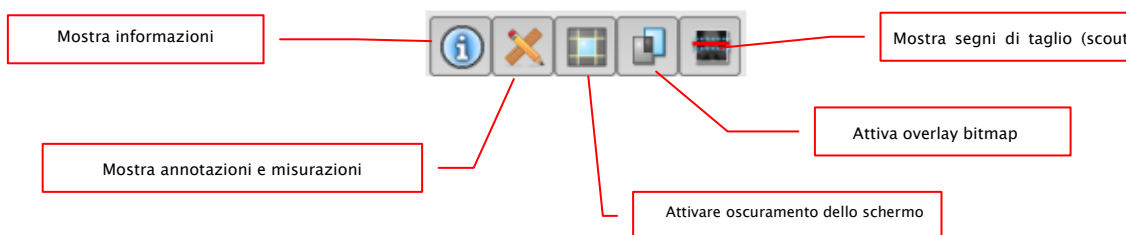


L'overlay è suddivisa nelle seguenti aree:

- informazioni (negli angoli dell'immagine),
- annotazioni + misurazioni (ad es. sezioni misurate o angoli)
- "oscuramento di parte dello schermo" (oscuramento dell'intero schermo al di fuori dell'oggetto selezionato)
- overlay bitmap (immagini sovrapposte),
- linee di taglio (scout lines) (presentazione delle posizioni delle singole immagini di taglio in una serie di immagini ottenute con tomografia computerizzata e risonanza magnetica).


A ciascuna di queste aree è assegnato un pulsante della barra degli strumenti, per poterle visualizzare o nascondere.

Durante la selezione del frammento di immagine da parte dell'utente, viene visualizzato automaticamente il pulsante per l'oscuramento di parte dello schermo. Utilizzando questo pulsante è possibile nascondere l'area dello schermo al di fuori del frammento dell'immagine selezionato e ripristinare la visualizzazione completa dello schermo.


### 7.2.4 Doppia visualizzazione

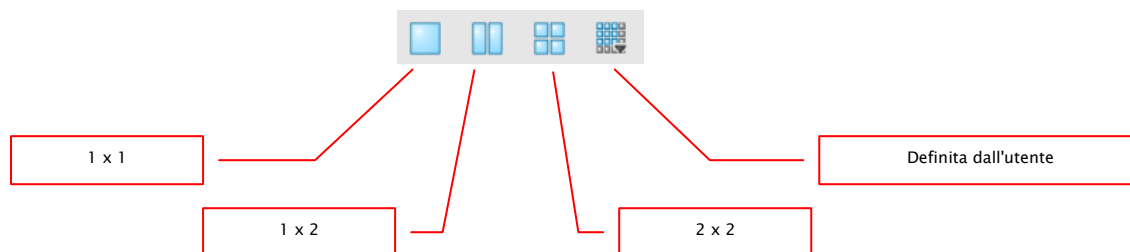

Nella finestra grande possono essere aperte una o più immagini. Il numero di immagini visualizzate può essere scelto automaticamente con il pulsante sulla barra degli strumenti, situata sopra la finestra dell'immagine (1x1, 1x2, 2x2). Inoltre l'utente può definire la propria impostazione con l'ultimo pulsante, che apre la finestra piccola. Come divisione massima è possibile scegliere fino a 6x6. Per modificare l'immagine in una delle finestre è necessario attivarla nel browser. La finestra attiva è racchiusa in una cornice rossa.

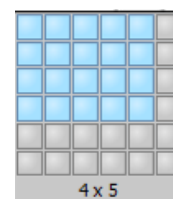

## 7.2.5 Altre funzioni

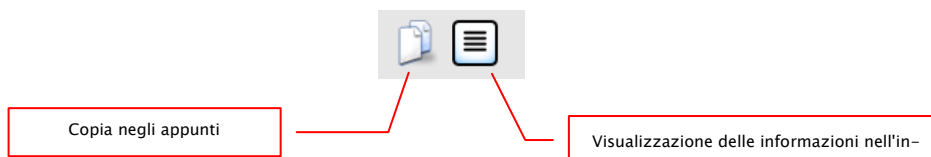


### 7.2.5.1 Appunti

Utilizzando questo pulsante è possibile copiare l'immagine corrente, nella forma attuale, negli appunti. Questo significa che gli oggetti dell'overlay (informazioni sull'immagine, annotazioni, misurazioni e oscuramento parziale dello schermo) se visualizzati, verranno copiati insieme all'immagine. Cliccando questo pulsante e tenendo contemporaneamente premuto il tasto Maiusc, l'immagine verrà copiata negli appunti nella sua dimensione originale.

### 7.2.5.2 Informazioni nell'intestazione (DICOM Dump)


Utilizzando il pulsante sulla barra degli strumenti è possibile aprire una finestra di dialogo in cui vengono visualizzate le informazioni (tag) DICOM per l'immagine corrente. Questi tag sono strutturati in gruppi per una migliore fruibilità. Vengono visualizzati tutti i tag, anche quelli privati.

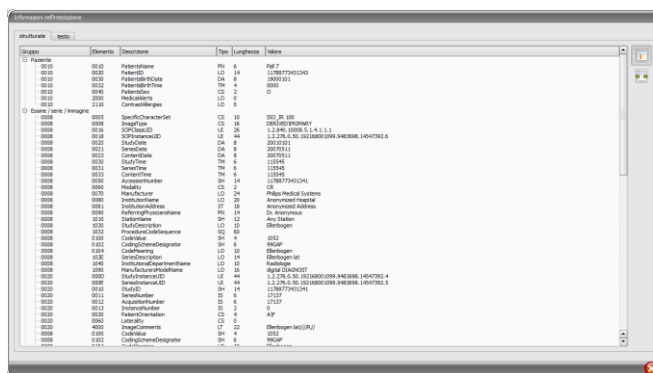

Non è possibile modificare i valori. Nella prima scheda della finestra "strutturati" i singoli dati dell'intestazione possono essere copiati utilizzando la funzione di copia negli appunti ed incollare in un'altra applicazione (ad es. un editor di testo). A tal fine fare doppio clic sull'elemento desiderato e quindi scegliere la funzione di copia con il pulsante destro del mouse. Per serie di immagini multi-fotogramma bisogna ricordare che queste ultime hanno una sola intestazione per tutta la serie, in cui sono inclusi i dati delle singole immagini. Nella seconda scheda "testo" è possibile copiare negli appunti interi frammenti o l'intestazione completa. Per fare questo, selezionare con il mouse la linea desiderata o usando i tasti Ctrl+A l'intero testo dell'intestazione e copiare il testo negli appunti. Da lì è possibile incollare i dati in un file di testo o un documento in formato Word, ecc.

## 7.2.6 Selezione dell'immagine

Nell'angolo in alto a destra di ogni immagine è situata una piccola casella rossa. Cliccando la casella (o l'immagine ed il tasto Maiusc + pulsante sinistro del mouse) appare un puntino rosso, o scompare se era già presente. Ogni immagine selezionata viene contrassegnata con un punto rosso. La selezione è inoltre visibile sotto forma di ombreggiatura dell'intera immagine, poiché anche il puntino rosso potrebbe essere difficilmente visibile in alcune circostanze (ad es. quando vi sono più immagini sul monitor o sui monitor diagnostici). La visualizzazione dell'ombreggiatura può essere disabilitata nella configurazione (nella categoria "Altro"). Durante la selezione delle immagini, ad es. per il salvataggio sul CD paziente, possono essere utilizzate tutte le immagini selezionate. Le immagini selezionate possono anche essere identificate nell'elenco selezione immagini sul lato sinistro, grazie al punto rosso nell'angolo in alto destro della miniatura.

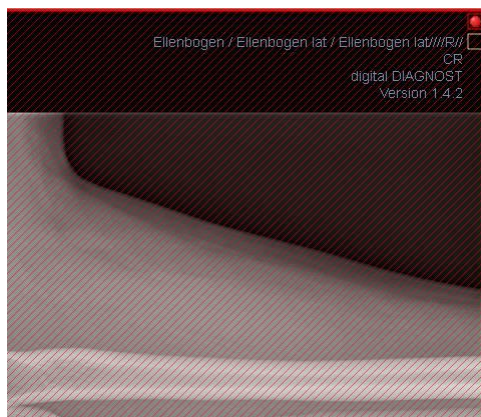

## 7.2.7 Protezione delle immagini (blocco)

Oltre alla casella rossa sull'immagine è presente anche una casella gialla. Cliccando su questa casella è possibile proteggere le immagini (protezione). Le operazioni effettuate sulle immagini, descritte nel prosieguo di questo manuale, non hanno alcun effetto sulle immagini protette. L'immagine protetta può essere riconosciuta grazie al simbolo a forma di lucchetto presente nella casella gialla. Le immagini protette non sono disponibili nella selezione delle immagini.



## 7.2.8 Menu di scelta rapida

Cliccando con il pulsante destro del mouse sulla foto è possibile richiamare il menu di scelta rapida con funzioni di rilievo:

- funzioni mouse: sposta immagine, gestione finestra, selezione con il rettangolo di zoom, lente di ingrandimento
- ingrandimento: larghezza della finestra, altezza della finestra, dimensioni della finestra, abilitazione e disabilitazione della modalità a schermo intero, abilitazione e disabilitazione della modalità a schermo intero con doppia visualizzazione, avvicina, allontana, dimensioni originali (1:1)
- overlay: mostra informazioni, annotazioni e misurazioni, attiva funzione oscuramento parziale dello schermo, attivazione overlay bitmap, attivazione linea di taglio
- suddivisione delle immagini: 1x1, 1x2, 2x2, definita dall'utente
- invia tramite e-mail (DICOM)
- invia tramite e-mail (JPEG)



- esami: elenco di esami del paziente e come sottomenu per ogni posizione serie di immagini di questo esame (la prima immagine della serie viene richiamata con l'attivazione del punto menu)



In conformità con le disposizioni di legge è necessaria la codifica dei messaggi di posta elettronica contenenti informazioni sui pazienti o i loro dati personali. Perciò il programma di posta elettronica deve essere configurato in modo tale che i dati siano codificati, e solo il destinatario possa leggerli. Esistono apposite estensioni per programmi di posta elettronica, che consentono la codifica dei messaggi.

Come alternativa gratuita al software crittografico può essere utilizzato "The GNU Privacy Guard". Quest'ultimo può essere scaricato dal sito <http://www.gnupg.org> ed installato. L'installazione e la configurazione del programma devono essere effettuate da un professionista.

### 7.3 Operazioni sulle immagini

Sul lato destro, accanto al visualizzatore dell'immagine, sono disposti gli strumenti per l'editing delle immagini, che è possibile visualizzare e nascondere con i singoli pulsanti. Questi sono disposti verticalmente ed ordinati per ambiti tematici.

Sotto gli strumenti sono collocati i pulsanti per annullare le ultime azioni e ripristinare le azioni annullate. L'azione viene visualizzata in forma di testo nel casella dei suggerimenti. Le operazioni si riferiscono sempre all'immagine attiva. Questo significa che in caso di cambiamento dell'immagine, in determinate circostanze non sarà possibile annullare le operazioni ed il pulsante di annullamento non sarà attivo.

Utilizzando l'ultimo pulsante "Ripristina immagine originale" tutti le operazioni realizzate verranno annullate dopo il quesito di controllo rivolto dal sistema e verrà ripristinata l'immagine originale, nella forma in cui si trova nell'archivio immagini.




Le operazioni effettuate su immagini TK e MR e su serie di immagini multi-fotogramma, vengono applicate automaticamente all'intera serie di immagini, altrimenti ogni volta all'immagine attiva.

Nel caso immagini in scala di grigi le modifiche vengono salvate sulle immagini. Nel caso di immagini a colori le modifiche non vengono salvate, ma sono solo temporanee. Questo significa che al cambiamento del paziente o alla chiusura del programma le impostazioni / cambiamenti eseguiti sull'immagine a colori andranno persi.

### 7.3.1 Trasformazioni (rotazione, immagine speculare, capovolgimento)


Premendo un tasto le immagini possono essere ruotate di 90° a sinistra, e di 90° o 180° a destra. E' possibile creare immagini speculari sia orizzontalmente, che verticalmente, e capovolgere le immagini.

Ogni operazione eseguita può essere annullata o ripristinata utilizzando i due tasti a forma di freccia posti sotto.

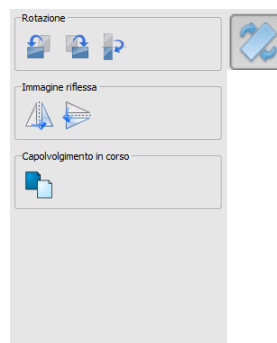


### 7.3.2 Gestione finestra

La gestione finestra è il metodo usato abitualmente per l'elaborazione di immagini in scala di grigi. Per le immagini a colori la gestione finestra è disattivata. Indicando il centro e la larghezza della finestra viene scelta la gamma di gradazioni di grigio che verrà presentata. Questi valori possono essere impostati ogni volta utilizzando i cursori o i campi di input. Inoltre è possibile utilizzare rapidamente le impostazioni della lista di impostazioni preliminari (preset).

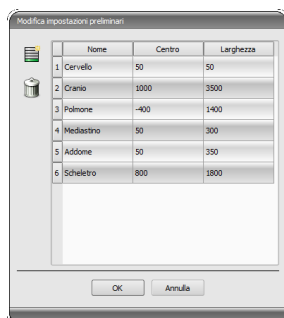



La modifica delle impostazioni predefinite o l'aggiunta di impostazioni definite dall'utente può avvenire utilizzando la finestra di dialogo che appare dopo la pressione del pulsante "Modifica impostazioni predefinite...".

Anche le dimensioni standard che compaiono in essa possono essere modificate o cancellate dall'utente (non sono protette contro il salvataggio).

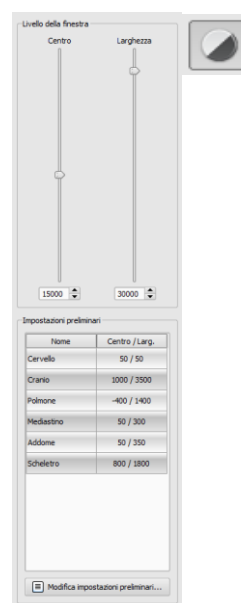

Nella modalità di gestione automatica della finestra è possibile determinare speciali impostazioni predefinite aggiuntive, che con un solo clic saranno applicate all'immagine aperta.

I pulsanti personalizzabili 1 e 3 vengono utilizzati per determinare automaticamente i valori appropriati per la gestione della finestra, attraverso l'impiego di un algoritmo di calcolo basato sull'istogramma. Per tale algoritmo deve essere definito un valore di soglia. Per determinare il valore di soglia per un determinato pulsante scegliere questo pulsante, tenendo premuto il tasto Maiusc. Verrà visualizzata una finestra di dialogo, in cui sarà possibile immettere un valore compreso tra 1 e 49. Maggiore sarà il valore inserito, maggiore sarà la nitidezza dell'immagine. In questo modo è possibile definire le impostazioni predefinite per ciascuno dei 3 tasti. Facendo clic sul pulsante appropriato, l'algoritmo di calcolo ed i valori calcolati con l'impiego di quest'ultimo per la gestione della finestra, verranno immediatamente applicati all'immagine.

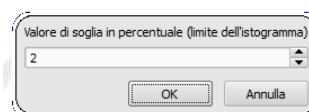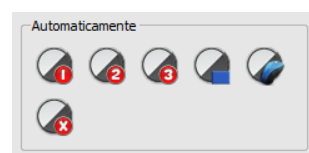

Cliccando il pulsante "Disegna rettangolo" è possibile allungare il rettangolo sull'immagine. A partire da questo rettangolo verranno calcolati ed applicati all'immagine i valori ottimali. A tale scopo è necessario prima fare clic sul pulsante e quindi designare un rettangolo con due click sull'immagine. I valori verranno immediatamente calcolati ed applicati all'immagine.

Un altro pulsante disponibile è rappresentato dal rettangolo interattivo. Fare clic sul pulsante e sovrapporre il rettangolo sull'immagine. Il valore ottimale viene immediatamente determinato automaticamente all'interno del rettangolo e visualizzato su tutta l'immagine. Una volta trovata la presentazione opportuna, cliccare di nuovo per applicare il valore all'immagine. Con lo scroll del mouse è possibile ingrandire e ridimensionare il rettangolo. Inoltre tenendo premuti i tasti "Control" (Ctrl) o Maiusc verrà modificata unicamente la larghezza o solo l'altezza del rettangolo. L'operazione può essere interrotta premendo "Esc".

Il pulsante "Tutta l'area" viene usato per mostrare l'intera area visualizzabile dal valore minimo al massimo della scala di grigi dell'immagine.

### 7.3.3 Filtri


Per utilizzare i filtri deve essere attivo il modulo di licenza.

I filtri disponibili sono "Magic Sharp", "Equalizzazione istogramma", "Nitidezza" e "Aumento contrasto" che possono essere utilizzati singolarmente o in combinazione tra di loro. Per utilizzare un filtro selezionare la casella corrispondente.

Cliccando il pulsante "Rimuovi filtro" i filtri vengono disattivati ed i valori ripristinati allo stato iniziale.

Dopo aver attivato il filtro sul bordo inferiore dell'immagine appare una piccola icona. Cliccando una volta su questa icona è possibile disabilitare il filtro, con un ulteriore clic è possibile abilitarlo nuovamente. Questa funzione consente di confrontare l'immagine con e senza il filtro. Facendo doppio clic sull'icona elimineremo il filtro.

Nell'elenco dei filtri è possibile salvare diverse impostazioni dei filtri. In tal caso i filtri dell'elenco possono essere rapidamente utilizzati per le immagini successive. L'elenco di filtri può essere esportato ed importato in un'altra stazione. In questo modo è possibile trasmettere facilmente una varietà di filtri preimpostati a più stazioni.

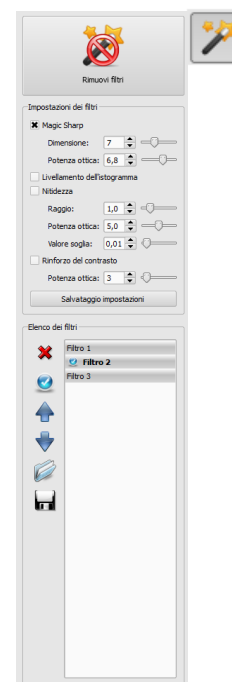

#### 7.3.3.1 Magic Sharp



Questo filtro non funziona nelle immagini a colori. Può essere utilizzato solo per le immagini in scala di grigi.

L'algoritmo di questo filtro regola automaticamente il contrasto dell'immagine, quest' adattamento viene applicato nelle aree parziali dell'immagine. In questo modo viene ottimizzato il contrasto delle singole parti dell'immagine, ciò di solito fornisce risultati migliori rispetto all'adattamento del contrasto all'immagine nella sua interezza. Le dimensioni delle singole


aree parziali vengono definite utilizzando il parametro "Dimensione". La dimensione può essere impostata tra i valori 2 e 16. Maggiore sarà questo valore, minori saranno le aree parziali. Il valore 5 indica 1/5, mentre il valore 10 indica 1/10 della dimensione dell'intera immagine. E quindi maggiore sarà il valore, più nitide saranno le strutture minori. Il parametro "Nitidezza" regola la nitidezza dell'immagine. Questo parametro può avere un valore compreso da 0.1 a 10. Valori inferiori ad 1 causano lo sfocamento, superiori ad 1 aumentano il contrasto. Quando il valore è impostato su 1 l'immagine viene visualizzata in originale.

### 7.3.3.2 Funzione del mouse "Magic Sharp"

Con questa funzione è possibile impostare il filtro Magic Sharp trascinando il mouse sull'immagine. La funzione è attivabile con il mouse nel modo descritto nel capitolo 7.2.1. Il metodo più semplice per attivare la funzione è premere contemporaneamente il tasto destro e sinistro del mouse. In tal modo viene attivato solo il filtro "Magic Sharp". Gli altri filtri resteranno inattivi.

Attivare la funzione in uno dei modi descritti e trascinare il mouse in direzione orizzontale da sinistra a destra, per modificare le dimensioni dell'immagine. Il valore sul lato sinistro dell'immagine inizia da 2 ed aumenta verso il bordo destro fino a 16.

Per modificare la nitidezza trascinare il mouse verticalmente dal basso verso l'alto. Il valore cambia nell'intervallo compreso da 1 a 10. Nella parte inferiore dell'immagine, che nell'illustrazione seguente è indicata con un campo tratteggiato, indica che il filtro è disattivato. Solo dall'area sopra questa zona aumenta il valore della nitidezza. Nel programma quest'area (che rappresenta circa un quarto dell'immagine) non viene tratteggiata. Ma non appena il puntatore del mouse si trova in quest'area, il filtro viene disattivato e scompare l'icona del filtro nel bordo inferiore dell'immagine, quando il puntatore del mouse fuoriesce da quest'area, il filtro viene attivato nuovamente. Bisogna ricordare che quando si trascina il mouse entrambi i valori cambiano contemporaneamente. Più ci si dirige verso destra, e più in alto è situato il puntatore del mouse, maggiori saranno i valori per la dimensione e la nitidezza.

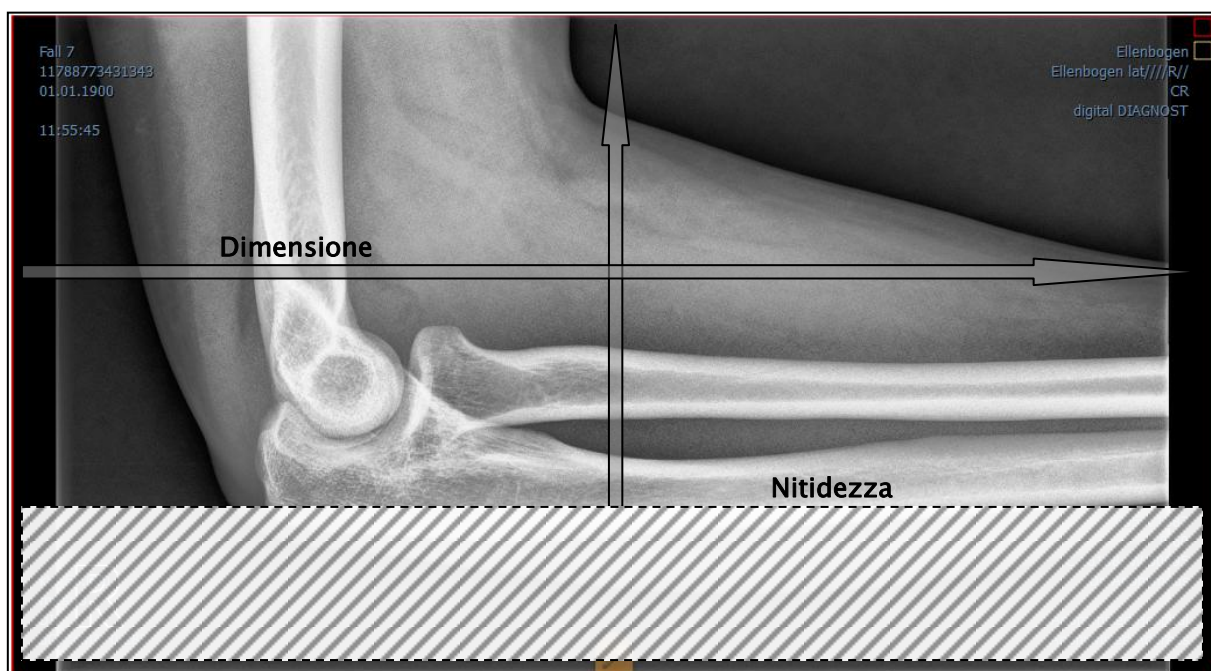

#### 7.3.3.3 Equalizzazione dell'istogramma

Durante l'equalizzazione dell'istogramma le sfumature grigie che interessano le aree dell'immagine sono estese alla scala di grigi, e più raramente le sfumature di grigio usate, che interessano in modo minore le aree dell'immagine, verranno limitate. Questo porta ad una maggiore visibilità delle strutture delle aree di interesse dell'immagine.

Questo filtro viene attivato e disattivato selezionando la casella appropriata. Il filtro non ha ulteriori impostazioni.



Le modifiche a seguito dell'equalizzazione dell'istogramma non vengono riportate nell'istogramma stesso, poiché nell'istogramma sono sempre presentati i parametri dell'immagine originale senza filtri attivi per quest'ultima.

#### 7.3.3.4 Aumento della nitidezza

L'aumento della nitidezza comporta una più chiara visibilità delle differenze di luminosità, così che l'immagine diventa "più nitida".

La nitidezza dell'immagine di destinazione viene calcolata in pixel. Il parametro "Raggio" indica quanti pixel è necessario utilizzare per calcolare la nitidezza. Un raggio ridotto provoca un aumento della nitidezza delle strutture di piccole dimensioni. Un raggio ampio aumenta la visibilità delle strutture nell'immagine di destinazione. Con il valore 0, il valore appropriato per l'immagine viene determinato automaticamente.

Il parametro "Nitidezza" indica in quale misura deve essere aumentata la nitidezza dell'immagine. Valori elevati comportano un'elevata nitidezza. Al fine di evitare l'aumento simultaneo della nitidezza delle aree lisce dell'immagine, impostare il parametro "Valore soglia". Questo parametro deve essere impostato su 0 per aumentare la nitidezza di tutte le aree dell'immagine. Il valore soglia deve essere aumentato per aumentare la nitidezza solo delle regioni con maggior contrasto.

Selezionare l'area dell'immagine che si desidera esaminare. Se necessario ingrandire quest'area dell'immagine. Iniziare dal valore di nitidezza più alto e successivamente aumentare il raggio fino a quando le strutture sono chiaramente visibili. Successivamente è possibile ridurre nuovamente la nitidezza.

#### 7.3.3.5 Aumento del contrasto

Usando la funzione di aumento del contrasto è possibile evidenziare in modo da rendere ancora più chiare le differenze tra aree chiare e scure dell'immagine. Le aree luminose diventeranno ancora più luminose e quelle scure ancora più scure. Per questa funzione è possibile impostare il fattore di aumento da 1 (debole) a 25 (molto forte).

### 7.3.3.6 Elenco dei filtri


Nell'elenco dei filtri è possibile salvare le impostazioni dei filtri, che successivamente potranno essere utilizzate.

Per salvare le impostazioni del filtro fare clic su "Salva impostazioni". Nell'elenco dei filtri verrà aggiunta una nuova voce. Digitare un nome appropriato per il nuovo filtro. In questo modo è possibile salvare nell'elenco una serie di impostazioni per i filtri.

Il filtro dell'elenco può essere impostato come filtro predefinito. Quando il filtro è impostato come predefinito, sarà automaticamente applicato ad ogni immagine, salvo che per l'immagine non sia già stato impostato un altro filtro. Per disattivare il filtro predefinito deselezionare quest'opzione nell'impostazione "Predefinito".

Utilizzando la funzione di esportazione è possibile esportare le impostazioni dei filtri in forma di file di configurazione ed importarle in un'altra stazione utilizzando la funzionalità di importazione.

- 1 – Eliminare il filtro
- 2 – Selezionare il filtro come predefinito e deselezionare le opzioni del filtro predefinito
- 3 – Spostare il filtro nell'elenco
- 4 – Importare il filtro dal file
- 5 – Esportare il filtro in un file

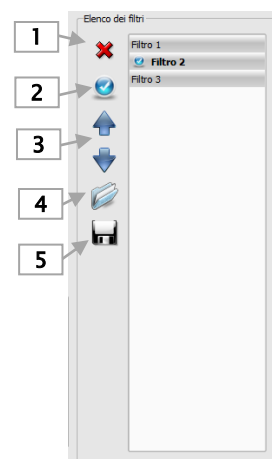

### 7.3.4 Annotazioni / misurazioni



**Possibili deviazioni della misurazione della lunghezze e degli angoli sono causate dalla modalità o dall'acquisizione dell'immagine!**


I calcoli si basano sui dati inerenti le dimensioni in pixel salvate nell'immagine DICOM.

Deviazioni possono essere causate anche dalla stessa acquisizione, soprattutto quando si tratta di immagini radiografiche convenzionali (CT), ad es. del bacino o dell'anca. La distanza spaziale della parte del corpo, dove è catturata l'immagine, dalla pellicola radiografica / detector causa una deformazione della lunghezza presentata sull'immagine radiografica bidimensionale. Le deviazioni hanno origine anche quando insieme alla parte del corpo viene rivelato il riferimento per la determinazione delle dimensioni dell'oggetto (sfera), se nelle immagini questo non si trova esattamente alla stessa altezza in cui viene misurata la parte del corpo.

Se nell'immagine non si dispone di informazioni circa le dimensioni in pixel, i risultati delle misurazioni vengono forniti in pixel.



Le annotazioni includono linee, frecce, rettangoli, ellissi, poligoni e testi. Rettangoli, ellissi e poligoni disegnati possono essere alternativamente compilati. Le spiegazioni su come disegnare oggetti utilizzando il mouse, vengono visualizzate ogni volta che si effettua una scelta, ossia cliccando sul pulsante nell'angolo in basso a destra. Gli oggetti disegnati possono essere modificati successivamente in tutte le direzioni o spostati per fargli assumere forma desiderata e collocarli nella posizione desiderata. Inoltre gli oggetti vengono visualizzati nell'elenco a destra e possono essere visualizzati o nascosti facendo clic sul simbolo dell'occhio. Gli oggetti possono essere eliminati uno alla volta, facendo clic sull'icona del cestino o premendo il tasto "Cancella" sulla tastiera.

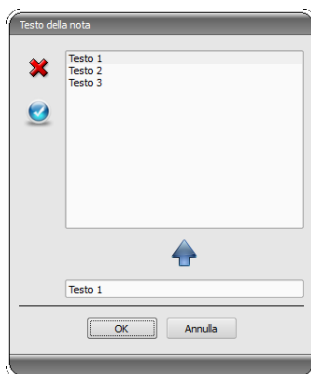

Durante la scelta del testo in primo luogo viene visualizzata la finestra di dialogo in cui è possibile aggiungere nuove note all'elenco delle note standard (digitare il testo nella casella di input e quindi premere la freccia verde), oppure selezionare il testo dall'elenco (doppio clic o clic e OK) o digitare qualsiasi testo (digitare il testo nella casella di immissione e premere OK) che verranno utilizzate e collocate nell'immagine. È possibile impostare un testo standard, che sarà immediatamente attivo dopo l'apertura della finestra di dialogo.



Le funzioni del mouse sono disponibili solo quando è stato avviato il modulo appropriato.

Le misurazioni comprendono sia misurazioni di tratti e di angoli, così come dell'area di rettangoli, ellissi e poligoni. La misurazione dell'angolo può essere effettuata indicando 3 o 4 punti. Per le misurazioni degli angoli tra parentesi viene indicato l'angolo esterno.

Nel caso di figure quali rettangolo, ellisse e poligono inoltre vengono misurate le dimensioni dell'area e la densità. Accanto alla figura viene visualizzata la sfumatura di grigio media effettiva dei valori originali in pixel e la sfumatura di grigio minima e massima. Per le immagini a colori viene effettuata solo la normale misurazione della superficie. Nel caso delle serie CT, per questi oggetti vengono visualizzati i valori nella scala di Hounsfield (HU).

Durante le misurazioni vengono visualizzate correntemente i dati di misurazione attuali. Come nel caso delle annotazioni, gli oggetti possono essere modificati successivamente in tutte le direzioni o spostati per far assumere loro la forma desiderata e collocarli nella posizione desiderata. Il campo con i valori di misurazione possono essere anche spostati in qualsiasi punto dell'immagine.

Le singole misurazioni vengono visualizzate nell'elenco a destra e possono essere visualizzate o nascoste facendo clic sul simbolo dell'occhio. Gli oggetti possono essere eliminati uno alla volta, facendo clic sull'icona del cestino o premendo il tasto "Cancella" sulla tastiera.

Cliccando il pulsante "cancella tutti" sul lato destro è possibile rimuovere immediatamente tutte le annotazioni e le misurazioni.



Gli oggetti grafici di sistemi esterni o di precedenti versioni del digipaX (versione 1.4.5 o precedenti) non possono essere modificati.

Le impostazioni per il disegno di oggetti grafici nell'overlay possono definite nella configurazione (categoria "Overlay").

### 7.3.4.1 Misurazioni speciali

Per le misurazioni speciali utilizzare i pulsanti speciali. Alcuni di essi vengono utilizzati solo per esami veterinari e sono disponibili solo nelle versioni veterinarie del digipaX (vedi capitolo 20.3).


L'esecuzione delle misurazioni viene attivata cliccando il pulsante appropriato per questa misurazione. Nella parte inferiore dello schermo viene visualizzata una breve istruzione per i passi successivi di quest'operazione; in primo luogo è necessario seguire i passaggi come descritto, finché non verranno designati tutti i punti e linee per una determinata misurazione. Solo successivamente è possibile correggere la misurazione ed adattare gli oggetti. Per interrompere la procedura di misurazione, ad es. per iniziare la misurazione dall'inizio, premete il tasto ESC.

### CTR (Cardiothoracic Ratio, rapporto cardiotoracico)

Valutazione delle dimensioni cardiache


Radiografia: torace in proiezione antero-posteriore

Cliccare sul pulsante, prima tracciare una linea per la misurazione del cuore (diametro trasverso massimo dell'ombra cardiaca). Quindi tracciare una linea per la misurazione del torace (diametro trasverso massimo esterno). Entrambe le linee possono essere corrette spostando i punti limite.

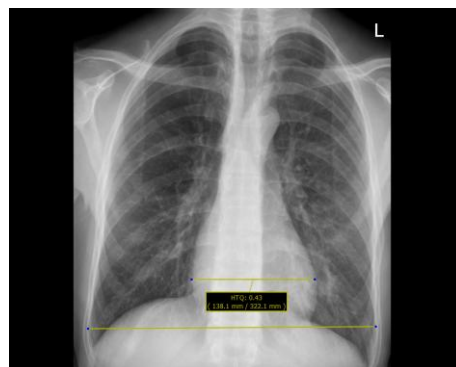

### 7.3.5 Oscuramento parziale dello schermo

Su ogni immagine è possibile designare diverse aree in forma di rettangolo, ellisse o poligono. Allo stesso tempo è possibile impiegare un oggetto per ogni tipo, ma è possibile anche utilizzare tipi diversi insieme. Le spiegazioni sulla funzione di disegno con il mouse vengono visualizzate sotto i pulsanti, dopo aver premuto il pulsante corrispondente.

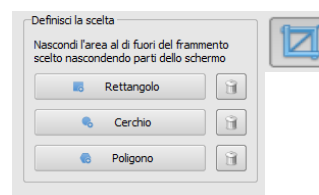

La designazione dell'area del tipo specificato sostituisce l'area di questo tipo eventualmente già esistente.


L'intera area dello schermo, al di fuori del frammento dell'immagine così designato, può essere oscurata e venire visualizzata nuovamente utilizzando il pulsante sulla barra degli strumenti ("Display Shutter" accanto alle opzioni overlay).

Gli oggetti possono essere eliminati uno alla volta.

### 7.3.6 Anteprima della sequenza di immagini (cine loop)

La funzione per la riproduzione automatica delle sequenze di immagini offre una varietà di opzioni di controllo, come ad esempio la direzione e la velocità di riproduzione. La velocità di riproduzione delle immagini può essere impostata con speciali controller. Con "Inizio" e "Fine" è possibile definire da quale immagine deve iniziare la sequenza di riproduzione e con quale immagine deve terminare. Con i cursori verticali è possibile selezionare manualmente anche le singole immagini.

- 1 – Riproduzione in avanti
- 2 – Riproduzione indietro
- 3 – Termine della riproduzione
- 4 – Pausa
- 5 – Regolazione velocità di riproduzione
- 6 – Riproduzione singola
- 7 – Riproduzione automatica avanti/indietro
- 8 – Sequenza continua
- 9 – Iniziare la riproduzione da questa immagine
- 10 – Termina la riproduzione con questa immagine
- 11 – Selezione manuale di singole immagini

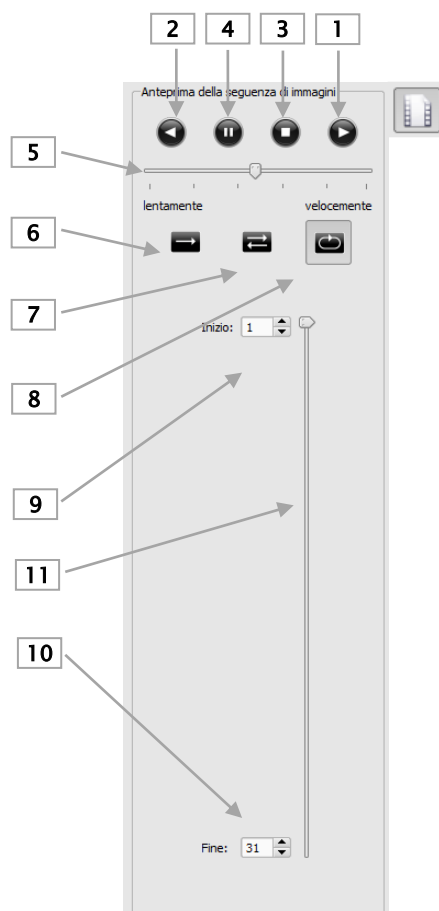

## 7.4 Linee di taglio (scout lines)

Le linee di taglio (localizzatore) rappresentano i bordi dei tagli due strati (piani) e la posizione delle immagini di sezione trasversale delle serie di immagini CT e MRT. In questo modo viene visualizzata la posizione dell'immagine di un'altra serie rispetto all'immagine attiva.




**Durante la presentazione come linee di proiezione tuttavia queste non forniscono informazioni sull'angolo con il quale s'intersecano i due piani. Le linee non mostrano se i due strati sono perpendicolari o obliqui tra loro. Pertanto non si deve trarre conclusioni sulla posizione reciproca dei due strati basandosi solo sulla proiezione.**

Durante la presentazione come piani, grazie all'immagine tridimensionale, è possibile ottenere un'idea più completa della posizione reciproca dei piani. La forma di presentazione desiderata può essere impostata nella configurazione dell'Utente: Overlay / Linee di taglio, specificando il tipo del gruppo "Linee di taglio / localizzatore".

Prima di aprire la serie, modificare la divisione dell'immagine in modo tale da poter guardare le singole serie una affianco all'altra. Quindi aprire ogni serie in un campo separato. Quando la presentazione delle linee di taglio è attiva, queste verranno visualizzate automaticamente. Clicca sulla serie e scorri le immagini di questa serie con lo scroll del mouse. In alternativa puoi utilizzare i pulsanti "Immagine sopra" e "Immagine sotto". La posizione dell'immagine corrente viene visualizzata nelle altre serie come linea di proiezione o piano. Le impostazioni della presentazione delle linee di taglio si trovano al punto O/Linee di taglio nel capitolo 17 Configurazione.

## 7.5 Istogramma

Sotto l'immagine o le immagini si trova la finestra dell'istogramma, in cui viene sempre visualizzato l'istogramma dell'immagine corrente. La finestra dell'istogramma può essere ridotta verso il basso o nascosta completamente.

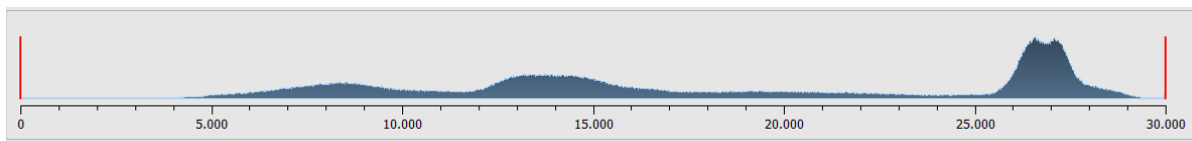

Per le serie multi-fotogramma viene mostrato l'istogramma del fotogramma attualmente visualizzato.

Per le immagini a colori viene visualizzato un grafico rosso, verde e blu per il canale C, Z ed N dell'immagine. Per le immagini in scala di grigi viene mostrato un grafico blu (come nella figura precedente) per la differenziazione dei toni di grigio.

Nell'istogramma delle immagini in scala di grigi viene sempre visualizzata anche l'impostazione corrente per la gestione della finestra. Tale impostazione può essere modificata. Le

aree a sinistra e a destra dell'area visualizzabile della finestra sono leggermente colorate per aumentarne visibilità. Le linee rosse indicano i confini ed allo stesso tempo servono come cursori per regolare i bordi della finestra. Gli effetti delle modifiche delle dimensioni della finestra possono essere migliorati aumentando l'equalizzazione dell'istogramma. L'equalizzazione può essere impostata nella configurazione sotto "Utente/Istogramma". Vedi capitolo 17. L'intera finestra può essere spostata cliccando con il mouse sull'area tra le linee rosse, e poi spostando il mouse.

Trascinando il mouse e tenendo premuto Maiusc ed il tasto sinistro è possibile sovrapporre il rettangolo di zoom sull'istogramma, per ingrandirlo. Cliccando con il pulsante destro del mouse sull'istogramma è possibile ripristinare la visualizzazione a schermo intero.


Le impostazioni per l'elaborazione dell'istogramma possono essere definite nella configurazione, nella categoria "Istogramma".

## 7.6 Easy Report




L'esecuzione di questo modulo richiede l'ottenimento di una licenza.

Utilizzando questo modulo è possibile creare per i pazienti report testuali, descrizioni, commenti, ecc. agli esami o alle immagini. Il testo viene inserito nei campi previsti per questo scopo, sotto il browser immagini. Il testo viene convertito in immagine compressa in tonalità di grigi, e può essere elaborato esattamente come le altre immagini DICOM. Inoltre il testo viene provvisto di tag "0020,4000 – Commento all'immagine".

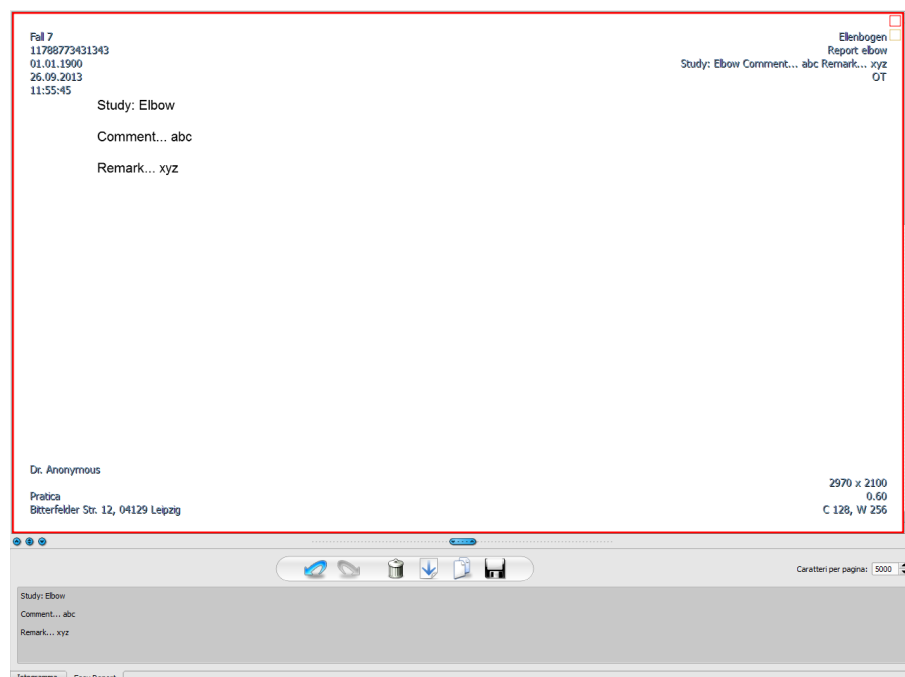

Utilizzando il pulsante "Salva" vengono aggiunti i dati dell'esame esistente, o salvati in archivio sotto forma di nuovo esame. Easy Report è disponibile anche nella modalità di gestione di più pazienti. Questo significa che è possibile aprire più pazienti contemporaneamente. Scegliere il paziente cui deve essere assegnato il report. Successivamente selezionare un esame esistente o uno nuovo, digitare il titolo del report e fare clic su "OK". Il titolo del report viene salvato nel tag "0008,103E – Descrizione della serie".

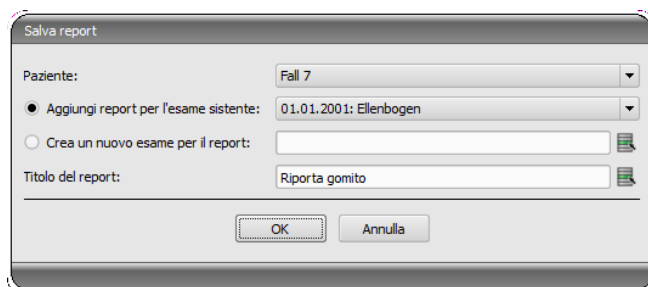

Descrizione della barra degli strumenti:




Il numero di caratteri nella pagina è impostato di default a 5000 caratteri. Al superamento di tale valore avviene automaticamente il passaggio alla pagina successiva. Allo stesso tempo viene creata automaticamente una nuova immagine nella stessa serie. Il cambiamento di pagina avviene al bordo dell'immagine. In questo modo le pagine del report vengono mantenute tanto distanti, quanto è possibile nel formato A4. Il numero di caratteri per pagina può essere aumentato fino a 10240.

Il testo del report esistente può essere spostato nella casella di input, utilizzando il tasto "Sposta il testo dall'immagine", ed inserito in questo modo nel nuovo report. Non è possibile modificare un report già esistente.

E' inoltre possibile elaborare il testo dei report esistenti, spostandolo prima nella casella di input, e quindi copiandolo negli appunti e successivamente incollandolo ad es. in un documento Word.



## 8 Gestione dei pazienti

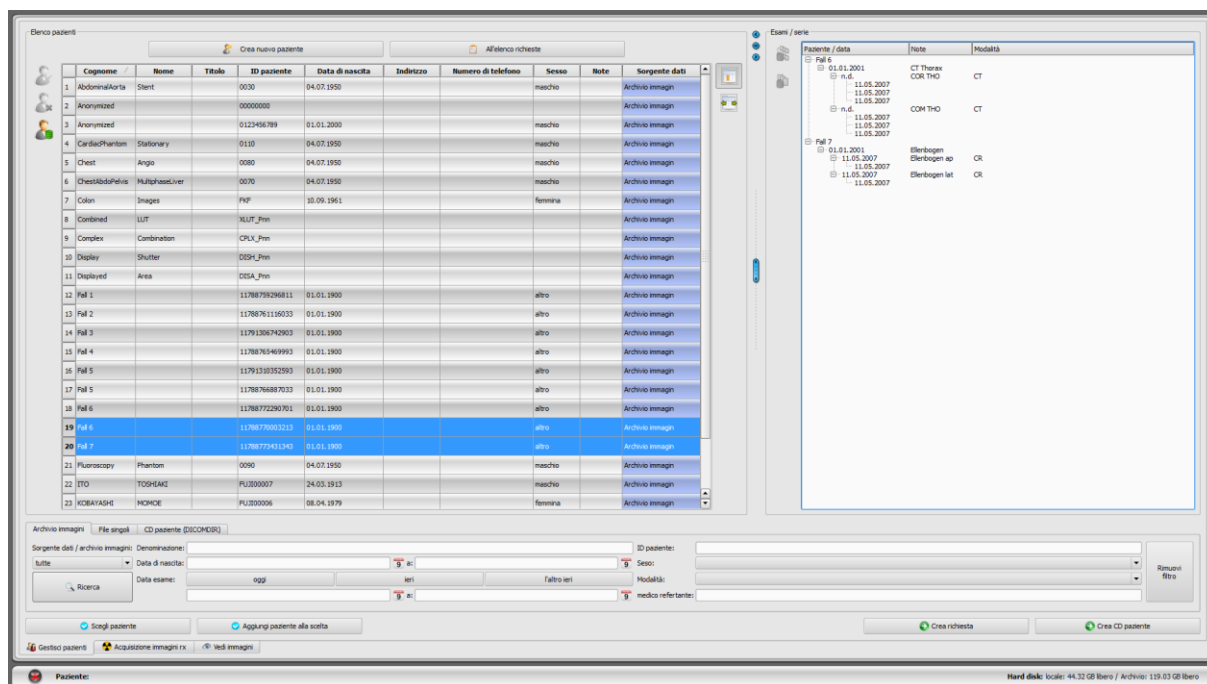

Se la gestione dei pazienti deve essere utilizzata come componente separato, nella configurazione al punto "Interfaccia utente" bisogna deselezionare la scheda della gestione pazienti. L'avvio della gestione pazienti viene effettuato attraverso il menu di avvio o attraverso l'intestazione, se questa è attiva.

### 8.1 Dati dei pazienti

Per ogni paziente vengono visualizzati nella tabella i seguenti dati:

- cognome
- nome
- titolo
- ID paziente
- data di nascita
- sesso
- sorgente dati

Le colonne possono essere visualizzate singolarmente o nascoste. A tal fine cliccare con il pulsante destro del mouse sull'intestazione dell'elenco dei pazienti ed abilitare o disabilitare le colonne desiderate. È possibile modificare l'ordine delle colonne trascinandole nella posizione desiderata, tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse.

L'amministratore può attivare colonne aggiuntive ad es. con indirizzo, numero di telefono e annotazioni. Per poter visualizzare questi dati può risultare necessario adattare precedentemente il database. A questo proposito rivolgersi all'amministratore del sistema.

Sul lato destro vengono visualizzati gli esami per ogni paziente e le serie di immagini presenti in questi esami.

## 8.2 Sorgenti dati

È possibile cercare i dati sia negli archivi di immagini, così come in file DICOM locali. La ricerca nei file DICOM può avvenire in forma di scansione delle directory o con l'apertura dei singoli file o attraverso l'importazione di DICOMDIR, tecnica comunemente utilizzata durante la masterizzazione dei CD pazienti.

L'elenco dei pazienti mostra sempre i pazienti della sorgente dati attualmente selezionata, quindi della scheda selezionata. Cambiando scheda cambierà anche la lista dei pazienti visualizzata nella parte superiore.

Dopo l'avvio del programma la gestione pazienti viene avviata automaticamente, se ciò avviene tramite il GDT (formato di interscambio dati, usato nella sanità tedesca) non sono necessarie altre operazioni (vedi 19Connettore GDT). All'utente viene subito chiesto se l'elenco dei pazienti deve essere aggiornato. Se la risposta è "sì" tutti gli archivi di immagini vengono ricercati senza filtraggio (vedi 8.2.1 Archivio immagini). A seconda del numero di pazienti, della rete e del database utilizzato ciò può occupare abbastanza tempo. Nella configurazione è possibile modificare questa procedura nella categoria "Altro". In tale categoria è possibile effettuare le impostazioni, inerenti se all'avvio del programma l'elenco dei pazienti deve essere aggiornato senza chiedere all'utente conferma di tale operazione. In questo modo è possibile introdurre un filtro che consenta di accelerare la ricerca.

### 8.2.1 Archivio immagini

#### 8.2.1.1 Ricerca

In quest'area possono essere ricercati gli archivi immagini configurati (PACS), nonché i dati creati localmente, previsti per salvare le immagini in archivio. Nell'elenco a tendina "Sorgenti dati/Archivio immagini" è possibile definire esattamente quali fonti devono essere cercate. Da qui è possibile scegliere l'opzione "Tutte" per ricercare tutte le sorgenti disponibili, "Locali" per ricercare solo i dati locali, o immettere il nome di un archivio immagini specifico. Gli archivi immagine inutilizzati (presenti nella configurazione, ma inattivi) non sono presenti nella lista e non verranno ricercati.

Cliccando il pulsante "Cerca" le sorgenti verranno ricercate considerando il filtro eventualmente impostato e l'elenco dei pazienti trovati verrà aggiornato.

Per aumentare la velocità di ricerca di archivi di grandi dimensioni, il numero di record dati visualizzato sarà limitato. Se il paziente ricercato non si trova nella lista dei pazienti, dato che questa è stata ridimensionata, è necessario limitare la selezione utilizzando un filtro adeguato o aumentare il numero massimo di record dati consentiti. Nella configurazione è possibile impostare il numero di record di dati visualizzato o disattivare la limitazione (vedi capitolo 17 Configurazione sottopunto Altro).

Ogni campo (colonna) della tabella può essere ordinato in ordine decrescente o crescente cliccando sull'intestazione della colonna.

#### 8.2.1.2 Filtri

L'elenco dei pazienti può essere filtrato in base a diversi criteri. Con il filtro attivo tutti i pazienti che non soddisfano i criteri del filtro non verranno visualizzati nell'elenco. È possibile

anche combinare liberamente diversi filtri. Cliccando il pulsante "Rimuovi filtri" tutti i filtri attivi verranno disabilitati.



**I dati locali, in altre parole i pazienti che sono stati creati localmente nel sistema, o sono stati trasmessi come nuovi pazienti dal GDT, non vengono filtrati. Non compariranno nell'elenco dei risultati, anche se soddisfano i criteri di ricerca.**

#### 8.2.1.2.1 Casella di ricerca

Nella configurazione nel punto Utenti/Restanti è possibile attivare campi di ricerca aggiuntivi per cognome ed ID paziente (vedi capitolo 17).

Nei campi di ricerca cognome (vengono confrontati i cognomi) ed ID paziente può essere immesso ogni volta il valore ricercato. Quando viene modificato il testo in uno dei campi di input, viene sempre selezionato il primo paziente trovato nella lista dei pazienti.

Dopo aver digitato il testo in uno dei campi di ricerca verrà rimosso il testo da tutti gli altri campi di testo. I campi di ricerca vengono colorati di verde quando viene trovato almeno un risultato. Se non vengono trovati risultati, i campi sono colorati di rosso.

Nella casella di ricerca è sufficiente digitare le prime lettere del cognome (ad es. "Ver") o i primi segni dell'ID paziente (ad es. „123“). Il sistema fornisce automaticamente il primo risultato corrispondente ai dati immessi.

#### 8.2.1.2.2 Filtra per cognome

Immetti le prime lettere del cognome ricercato e digita asterisco (ad es. "Ver\*") per ricercare tutti i pazienti i cui nomi iniziano con le lettere "Ver". È possibile utilizzare un asterisco (metacarattere) all'inizio (ad es. "\*schi") per visualizzare tutti i pazienti nei cui cognomi è presente "schi". È inoltre possibile immettere insieme cognome e nome, separati da una virgola (ad es. Ver, Giov). In tal caso verranno visualizzati tutti i pazienti i cui cognomi iniziano con "Ver" ed i nomi con "Giov".

#### 8.2.1.2.3 Filtra per data di nascita

Premendo il pulsante è possibile filtrare i pazienti la cui data di nascita rientra tra le due date indicate nei criteri di ricerca.

#### 8.2.1.2.4 Filtra per data dell'esame

Premendo il pulsante è possibile filtrare i pazienti i cui esami contengono la data indicata o il periodo di tempo indicato. Con tale criterio vengono filtrati anche gli esami stessi, ossia per un dato paziente vengono visualizzati solo gli esami che soddisfano i criteri di ricerca.

#### 8.2.1.2.5 Filtra per ID paziente

È possibile cercare per uno specifico ID paziente, digitandolo nella casella di ricerca e cliccando invio o "Cerca". O ricercare in base a parte di questo ID, utilizzando i metacaratteri (asterischi "\*"), come per filtrare in base al cognome.

#### 8.2.1.2.6 Filtra per sesso

Ricerca solo i pazienti del sesso desiderato.

#### 8.2.1.2.7 Filtra per modalità

Tutte le modalità possibili (procedura di ottenimento dell'immagine) sono elencate nell'elenco a tendina ed è possibile scegliere una di esse. Successivamente verranno visualizzati solo i pazienti che contengono immagini ottenute in questa modalità. Ciò significa che vengono filtrate anche le serie di immagini e vengono visualizzate solo le serie che soddisfano i criteri di ricerca.

#### 8.2.1.2.8 Filtra per medico prescrittore

Come nel caso del filtro per cognome o ID paziente utilizza i metacaratteri per filtrare in base al cognome del medico prescrittore. In alternativa può essere necessario inserire un asterisco sia all'inizio sia alla fine (ad es. "\*erd\*").

### 8.2.2 File singoli



Usando questa scheda è possibile importare rapidamente e visualizzare i file DICOM locali. Dopo aver selezionato una directory o un disco, e premuto il pulsante "Scansiona" il sistema tenterà di aprire tutti i file che corrispondono alle impostazioni del filtro. È possibile specificare un filtro per i file aperti ed un filtro per i file che non devono essere importati. In primo luogo attivare il filtro desiderato ed immettere il nome del file, utilizzando i metacaratteri ("\*" e "?"). È possibile allo stesso tempo immettere alcuni nomi di possibili file, separati da spazi. Ad esempio impostando il filtro "\*.dcm CT\*" per l'opzione "Solo i file specificati" verranno trovati tutti i file che terminano con l'estensione dcm e tutti i file il cui nome inizia con CT. Se viene attivata l'opzione "Questi file no" e viene utilizzato come filtro ad es. "\*.exe \*.zip", verranno esclusi i tentativi di importazione di programmi o archivi ZIP.

Se viene attivata l'opzione "Includi sottodirectory", tutte le sottodirectory trovate ed anche le loro sottodirectory verranno scansionate.


Se il file corrispondente alle impostazioni del filtro non può essere importato, questo evento sarà registrato nel log, i cui record possono essere controllati in caso di errori.

La directory selezionata verrà salvata in modo che sia sempre rapidamente selezionabile dall'elenco a tendina. La nuova directory può essere selezionata con il pulsante "...".

Utilizzando il pulsante "Aggiungi file DICOM..." è possibile aprire i singoli file. È possibile selezionare più file utilizzando i tasti Maiusc e Ctrl.

Cliccando sul pulsante "Pulisci lista" è possibile cancellare la sorgente dati selezionata. Tutte le immagini contenute all'interno di essa verranno rimosse dal sistema. **Tuttavia i file non verranno eliminati.**

### 8.2.3 CD paziente (DICOMDIR)

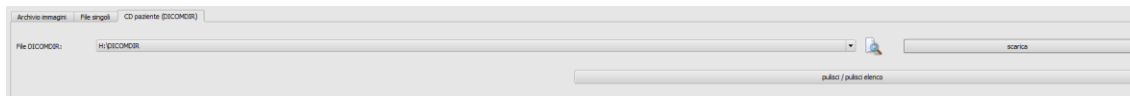

Spesso le directory per i file DICOM vengono create nei cosiddetti file DICOMDIR. Il più delle volte ciò accade quando si crea un CD paziente. Tali CD paziente possono essere importati rapidamente nel sistema tramite questa scheda.

Il file DICOMDIR (nome: "DICOMDIR" senza estensione del file) può essere selezionato utilizzando "...". Le posizioni già in uso nella memoria vengono inserite nell'elenco a tendina e possono essere selezionate rapidamente. Premendo "Scarica" il file DICOMDIR verrà scaricato, e le informazioni in esso contenute, inerenti il paziente o i pazienti, la posizione delle immagini loro assegnate nella memoria, verranno collocate nella sorgente dati.

Cliccando il pulsante "Pulisci elenco" anche in questo caso la sorgente dati verrà pulita. E così tutte le immagini contenute in essa verranno rimosse dal sistema. **I file in questo caso non vengono eliminati.**

I CD pazienti possono essere importati nel sistema anche in modalità automatica. Se il CD paziente viene inserito nell'unità dischi quando l'applicazione è aperta, dopo la richiesta il CD verrà letto dal sistema digipaX. Dopo il caricamento i dati possono essere facoltativamente salvati direttamente nell'archivio immagini. Per ulteriori informazioni sul salvataggio dei dati nell'archivio vedi punti 8.5Invio di immagini di pazienti nell'archivio immagini e 8.6Modifica dei dati dei pazienti.

## 8.3 Immissione di un nuovo paziente / modifica dei dati del paziente

La creazione di nuovi pazienti, così come la modifica dei dati del paziente, è possibile solo per le sorgenti dati degli archivi di immagini. Pertanto deve essere selezionata questa scheda.

Per creare un nuovo paziente scegliere il pulsante "Crea nuovo paziente". Per creare un nuovo paziente è necessario inserire nella una finestra di dialogo i dati del paziente. Il successivo ID paziente disponibile viene scelto automaticamente. Questo ID può essere assegnato manualmente, se non è già stato assegnato ad un altro paziente. Attraverso la configurazione è anche possibile impostare l'assegnazione manuale dell'ID paziente come pratica fissa. In tal caso il sistema non propone alcun ID. Dopo aver abbandonato questa finestra, cliccando su OK il nuovo paziente verrà creato localmente. Questo significa che non è ancora disponibile nell'archivio immagini, poiché negli archivi DICOM è possibile il trasferimento solo di immagini complete e non di singoli dati. Solo all'avvenuta creazione di un esame, serie ed immagine per questo paziente, sarà possibile spostare tutto insieme nell'archivio immagini, come oggetto DICOM.

La modifica dei dati dei pazienti è possibile solo per i pazienti locali. Dopo che i dati saranno trasferiti sul server (nell'archivio immagini) questo non sarà più possibile.

Se nella configurazione è stato impostato che per ogni ID paziente deve essere incluso un marcatore identificativo (ad es. il numero del medico o il numero identificativo del datore di lavoro), allora all'ID paziente inserito verrà automaticamente aggiunto tale marcatore identificativo (separato da "-"). Se durante la configurazione è stato impostato che l'ID paziente deve essere creato automaticamente dal sistema (con i dati del paziente), allora nella finestra di dialogo di inserimento o di modifica dei dati del paziente, il campo di input dell'ID paziente sarà inattivo.



L'uso dei seguenti caratteri nel cognome e nell'ID paziente non è consentito \ / ^  
” “ ‘ .

In generale evitare l'uso di caratteri speciali quali ^ ° : \* ? < > | @ € μ ~ ² ³ !. E' sufficiente utilizzare i cognomi reale del paziente ed un numero crescente per l'ID paziente. Ad esempio è possibile iniziare con il numero 000001.


## 8.4 Rimozione del paziente

La funzione di rimozione dei pazienti è generalmente disponibile in tutte le sorgenti dati. Nel caso di sorgenti degli archivi immagini tuttavia è possibile eliminare solo i pazienti locali attraverso la funzione di gestione pazienti. Questo significa che i pazienti già salvati nell'archivio immagini possono essere rimossi solo direttamente nell'archivio, o attraverso l'uso della funzione di rimozione messa a disposizione dall'amministratore del sistema.

Nel caso di sorgenti dati per i singoli file e CD pazienti, il paziente selezionato o i pazienti selezionati vengono rimossi dall'elenco. **I loro file tuttavia non vengono eliminati fisicamente.**

## 8.5 Invio di immagini di pazienti nell'archivio immagini

L'invio di immagini è possibile per tutte le sorgenti dati. Le serie o gli esami dalle sorgenti dati possono essere inviati anche singolarmente nell'archivio. Per inviare un singolo esame contrassegnare l'esame nell'angolo in alto a destra e premere il pulsante "Invia esame all'archivio immagini", posto accanto alla struttura ad albero. Per inviare una singola serie, selezionare la serie e premere il pulsante "Invia serie nell'archivio immagini".

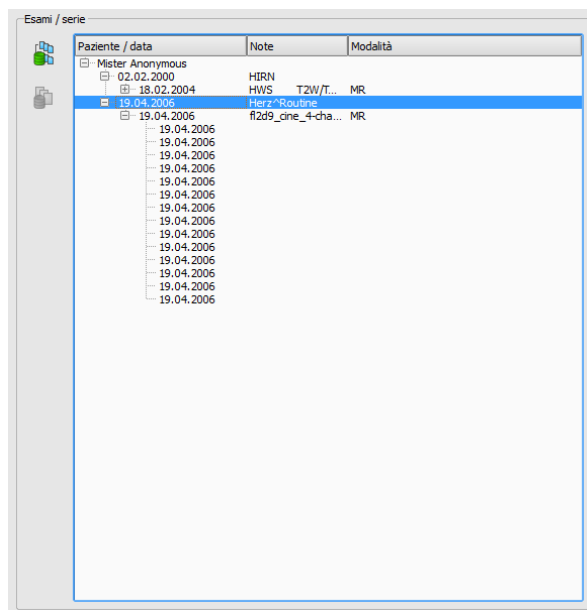


Prima di inviare questa nell'archivio, può essere necessario adeguare determinati dati, come ad es. l'ID paziente. Per fare questo leggere il punto 8.6 Modifica dei dati dei pazienti.

Se sono stati configurati ed attivati alcuni archivi immagini (server PACS) selezionare l'archivio di destinazione nella finestra di dialogo sottostante. Tutti le immagini dei pazienti selezionati (tutte gli esami, incluse tutte le serie) vengono inviate in quest' archivio. Eventualmente aggiornare l'elenco pazienti (fonte dati archivio immagini) per rendere visibili i cambiamenti.

## 8.6 Modifica dei dati dei pazienti

A tal fine selezionare nella finestra di dialogo uno o più pazienti, ed adattare nel campo destro i dati desiderati. Successivamente cliccare su "Importa" per spostare nell'archivio immagini le immagini dei pazienti selezionati. Se si desidera applicare i dati del paziente già aperto o del paziente trasmesso tramite GDT, selezionare il pulsante "Dati del paziente corrente".

**Nota:** se sono aperti più pazienti, verranno sempre applicati i dati del primo paziente.

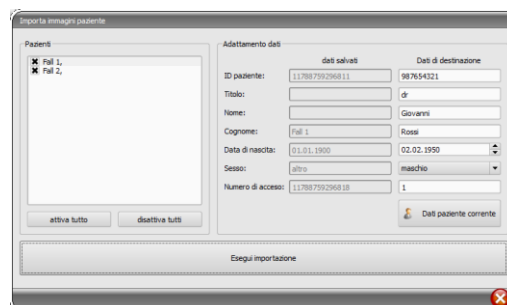



## 8.7 Elenco di esami, serie ed immagini

In parallelo all'elenco dei pazienti vengono visualizzati gli esami del paziente selezionato o dei pazienti selezionati. Esami, serie ed immagini vengono presentati sotto forma di albero. Per ogni immagine viene visualizzata data di immissione, note e nel caso delle serie, la modalità. E' anche consentita la selezione multipla di pazienti, nella struttura ad albero i nodi principali saranno costituiti dalle informazioni sui pazienti, e sotto di essi si troveranno i loro esami.

## 8.8 Uscire dalla gestione pazienti

La scelta del paziente avviene cliccando la riga corrispondente nella tabella. Facendo doppio clic sulla tabella o sul pulsante "Seleziona" il paziente verrà selezionato, la finestra di dialogo verrà chiusa ed il browser verrà preparato adeguatamente per i dati dell'immagine di questo paziente. Inoltre nella tabella è possibile effettuare una selezione multipla, consentendo così di modificare contemporaneamente più pazienti.

Facendo doppio clic sull'esame nella lista viene aperto solo l'esame selezionato del paziente. I pazienti possono essere aggiunti alla selezione corrente dei pazienti. A tal fine utilizzare il pulsante "Aggiungi alla selezione".



Tenendo premuto Maiusc la finestra di dialogo non verrà chiusa quando si preme il pulsante "Aggiungi alla selezione". Il paziente sarà aggiunto alla selezione e la finestra di dialogo rimarrà aperta. In questo modo è possibile cercare e selezionare più pazienti.

In alternativa è possibile utilizzare i seguenti pulsanti per passare direttamente ad un altro componente dopo l'attivazione del paziente:

**All'elenco richieste** → Apre la gestione richieste

**Crea richiesta** → Crea una nuova richiesta nella gestione richieste (possibile solo nel caso di scelta singola)

**Crea CD paziente** → Masterizza il CD paziente (è possibile selezionare più di un paziente)

## 8.9 Funzione di rimozione

### 8.9.1 Rimozione immagini

Se la funzione di rimozione è messa a disposizione dall'amministratore del sistema è possibile eliminare le immagini dall'archivio.




**Prima di iniziare quest' operazione assicurarsi di disporre di un backup aggiornato dei propri dati. Dopo il completamento dell'operazione di eliminazione è necessario aggiornare il backup, in modo che vengano apportate le dovute modifiche.**

La funzione di rimozione viene applicata all'intera serie di immagini, l'intero esame o al paziente nel suo complesso. Questo significa che non è possibile cancellare le singole immagini dalla serie, ma solamente l'intera serie. Normalmente ogni immagine radiografica costitui-

sce una serie separata. Nel caso di sequenze di immagini (CT o MR) tutte le immagini appartengono alla serie. In casi eccezionali può accadere che in una serie vi sia un'immagine impropria. In tal caso rivolgersi all'amministratore del sistema.

Scaricare nel browser l'immagine errata o l'immagine della serie sbagliata o dell'esame e fare clic sullo strumento funzione "Rimozione". Il paziente corrente verrà aggiornato e si aprirà una finestra di dialogo per rimuovere le immagini.

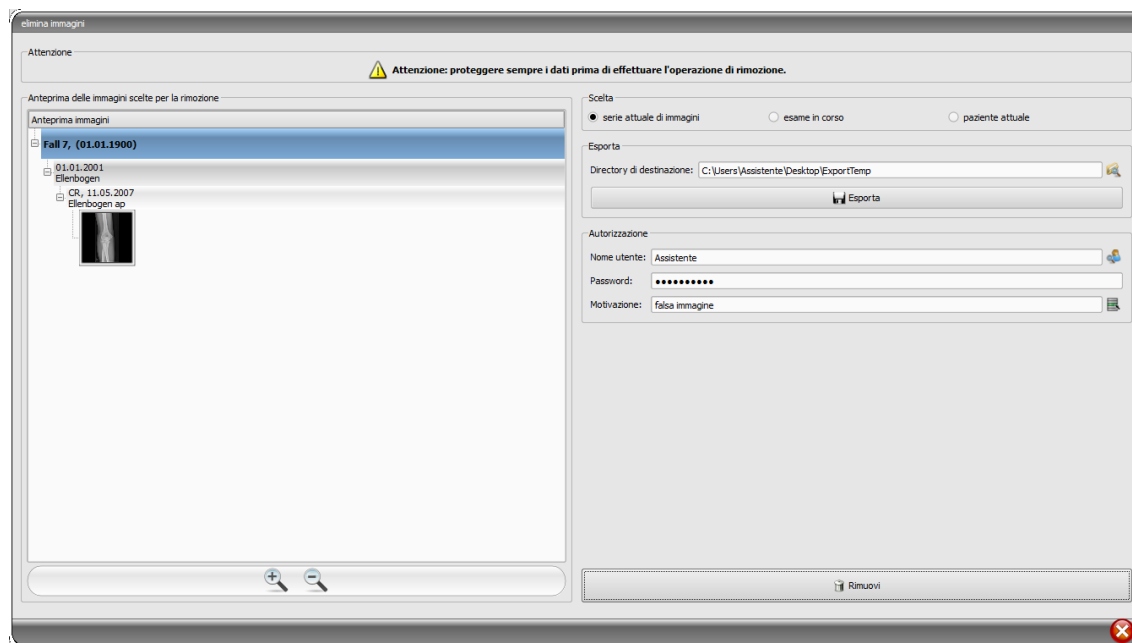

Selezionare la serie, l'esame o l'intero paziente da rimuovere.

Inserire il percorso della directory di esportazione desiderata ed esportare le immagini prima dell'eliminazione.

Digitare il nome dell'utente, la password ed inserire il motivo per cui le immagini devono essere cancellate. Riceverai la password dall'amministratore del sistema. Quest'ultimo deve definire una password all'avvio di questa funzione.

Fare clic su rimuovi per iniziare l'operazione. Le immagini verranno eliminate dall'archivio.



**Se doveste dimenticare di esportare le immagini prima dell'eliminazione:** Tutte le immagini sono protette contro l'inizio della procedura di rimozione. Rivolgersi all'addetto al sistema, che vi aiuterà a ripristinare le immagini eliminate dal backup.

### 8.9.2 Modifica dell'assegnazione delle immagini

La modifica dell'assegnazione delle immagini al paziente può risultare necessaria quando le immagini sono state erroneamente attribuite ad un paziente improprio durante la loro acquisizione, ad es. quando il paziente elaborato precedentemente era ancora attivo nel sistema. Queste immagini devono essere successivamente assegnate al paziente giusto. A tale scopo è necessario innanzitutto esportare dall'archivio le immagini impropriamente assegnate, quindi eliminarle dall'archivio ed importandole nuovamente assegnarle al paziente giusto.

Per assegnare al paziente corretto le immagini erroneamente assegnate, attenersi alla seguente procedura:

In primo luogo creare una directory in cui verranno esportate le immagini prima della loro rimozione (ad es. sul desktop "ExportTemp"). Selezionare il paziente desiderato (dall'archivio immagini corretto). Eliminare le immagini secondo le istruzioni fornite nel capitolo 8.9.1 Rimozione immagini, esportandole prima nella directory appena creata.

Ora è necessario assegnare le immagini esportate al paziente giusto. Per fare questo aprire normalmente il paziente desiderato nel sistema di gestione della clinica. Se non operiamo dal sistema di gestione della clinica, selezionare il paziente direttamente nella gestione pazienti digipaX o crearlo manualmente (vedi capitolo 8.3). Quando il paziente è già selezionato tornare alla gestione pazienti digipaX, da lì alla scheda file singoli ed aprire le immagini esportate. Questa procedura è già stata descritta nel capitolo 8.2.2. Quando le immagini vengono scaricate seguire i passaggi di "Invio di immagini di pazienti nell'archivio immagini" del capitolo 8.5 e "Modifica dei dati dei pazienti" del capitolo 8.6.

## 9 Importazione

### 9.1 Nota generale

Nel componente di importazione possono essere rimosse per il paziente attivo sia i grafici in pixel dai file immagine, che le immagini (tramite connettori TWAIN). I pulsanti per la rimozione sono disponibili solo quando il modulo appropriato è avviato.




**La funzione d'importazione di immagini tramite connettore TWAIN non è prevista per l'importazione di immagini radiografiche per la diagnosi. La destinazione d'uso prevista è limitata all'importazione di immagini e documenti, che successivamente possono essere assegnati in formato DICOM al paziente e saranno disponibili insieme agli altri dati del paziente sotto forma di immagine.**

Attraverso il connettore TWAIN possono essere importate immagini a colori con profondità di colore a 32 bit, immagini in scala di grigi con profondità di colore a 8 bit (256 sfumature di grigio), ed immagini esclusivamente in bianco e nero (immagini binarie 1 bit per pixel).

**I documenti devono essere scansionati impostando sullo scanner la modalità "Scala di grigi" o "Colore". Documenti scansionati solo in modalità "bianco e nero" non possono essere importati.**

## 9.2 Finestra di dialogo di importazione

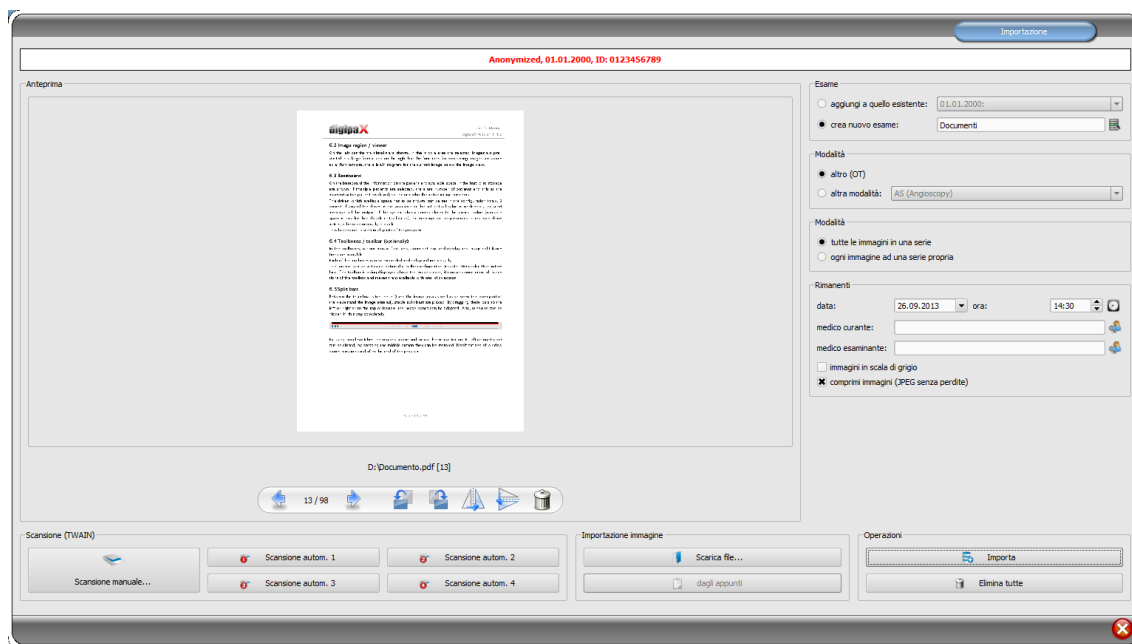

Per poter aprire questa finestra di dialogo può essere aperto (attivo) solo un paziente. Il paziente attivo, per cui verranno importate le immagini, viene visualizzato nell'intestazione della finestra di dialogo.

Attraverso "Scarica file..." è possibile aprire uno o più file di immagine. Questi non vengono importati immediatamente, ma prima vengono salvati nell'elenco. Premendo il pulsante di scansione è possibile scaricare le immagini dallo scanner attraverso l'interfaccia TWAIN. Anche queste immagini vengono innanzitutto aggiunte all'elenco. Utilizzando il pulsante "negli appunti" possono essere aggiunte all'elenco le immagini provenienti da altri programmi per l'elaborazione di immagini, copiandole negli appunti.

L'elenco può essere pulito con il pulsante "Rimuovi tutte".

Le immagini aggiunte vengono visualizzate sul lato sinistro come miniature. Con i cursori è possibile navigare tra le immagini. Ogni immagine può essere ruotata e capovolta utilizzando le icone nella barra degli strumenti. Inoltre è possibile rimuovere le immagini dall'elenco. Sul lato destro è possibile configurare le impostazioni per l'importazione di queste immagini. Le immagini possono essere aggiunte all'esame già esistente di un determinato paziente, o aggiunte ad un nuovo esame. Nel primo caso è necessario selezionare l'opzione "aggiungi ad esistente" e scegliere dall'elenco a tendina l'esame desiderato. Nel secondo caso sarà necessario selezionare l'opzione "crea nuovo esame" e digitare nel campo successivo il nome di questo esame. Inoltre è possibile creare un proprio elenco di nomi ed utilizzarlo in seguito. Scegliere la modalità (tipo di immagine) che deve essere introdotta per le nuove immagini. Solitamente si consiglia di utilizzare "OT" (altre), ma è anche possibile scegliere una diversa modalità, adatta alle immagini aperte.

Nel gruppo "Modalità" definire se tutte le immagini devono essere salvate in una serie (consigliata), o se ogni immagine deve essere salvata in una serie separata.

Sotto la voce "Altro" definire la data e l'ora che devono venire inserite al momento della creazione del file DICOM, il medico prescrittore ed esaminante, che verranno inseriti quando verrà creato un nuovo esame. Facoltativamente è possibile convertire tutte le immagini in immagini in scala di grigi, prima di salvarle. Per risparmiare spazio nella memoria dell'archivio ed accelerare la trasmissione di immagini, è possibile comprimere le immagini senza perdite di qualità, attivando l'opzione "Comprimi immagini" durante l'importazione. Utilizzando questo metodo di compressione non verrà perduta alcuna informazione.

Il salvataggio delle immagini avviene tramite "Importa". Tutte le immagini presenti nell'elenco vengono convertite in file DICOM (secondo le opzioni selezionate), ed inviate nell'archivio immagini. Tutte le immagini salvate correttamente verranno poi rimosse dall'elenco.

Durante l'importazione vengono create immagini DICOM a 8-bit. Dalle immagini già in formato a 16 bit (DICOM, TIF) durante l'importazione vengono create immagini DICOM a 16 bit.



**Dopo l'importazione le immagini non possono più essere modificate o rimosse (ciò può essere effettuato solamente dall'amministratore, operando nell'archivio immagini).**

Se quest'opzione è stata impostata dall'amministratore, dopo l'importazione verrà creato un file in formato GDT, che può essere caricato ad es. nel sistema di gestione della clinica per generare una voce nella scheda del paziente.


### 9.3 Scansione di documenti

Sono disponibili le opzioni di "Scansione manuale" e scansione automatica con l'ausilio di quattro pulsanti programmabili. Selezionando l'opzione "Scansione manuale" verrà aperta una finestra di dialogo con lo scanner e sarà possibile definire manualmente le impostazioni desiderate per la risoluzione ed il colore, ecc. prima di ogni singola scansione. Questa finestra di dialogo non è parte integrale del software digipaX, ma appartiene al software dello scanner. Per informazioni dettagliate fare riferimento alla documentazione dello scanner. Se si dispone di più dispositivi TWAIN o un dispositivo è equipaggiato con alcuni connettori TWAIN, tenendo premuto il tasto di commutazione (Maiusc) e allo stesso tempo cliccando sul pulsante "Scansione manuale" sarà possibile selezionare un dispositivo specifico o un connettore.

Inoltre sono disponibili quattro pulsanti cui possono essere assegnate varie impostazioni. Questi parametri saranno durante la stampa inviati automaticamente allo scanner ed i documenti verranno scansionati automaticamente con queste impostazioni. In questo caso è sufficiente impostare manualmente i parametri desiderati quali colore, risoluzione, ecc.


Per impostare i parametri per il pulsante di scansione automatica premere contemporaneamente l'apposito pulsante ed il pulsante di commutazione (Maiusc). Quindi digitare la descrizione di questo pulsante ed impostare i parametri desiderati. Può accadere che il vostro dispositivo non supporti tutte le funzioni, ed alcuni parametri potrebbero non essere disponibili. Se vengono utilizzati più dispositivi è necessario scegliere il dispositivo, come descritto sopra utilizzando il pulsante "Scansione manuale", per cui verranno utilizzati i pulsanti di scansione automatica. Verrà sempre avviato lo scanner che è stato selezionato come ultimo nella scheda impostazioni.

di scansione automatica premere

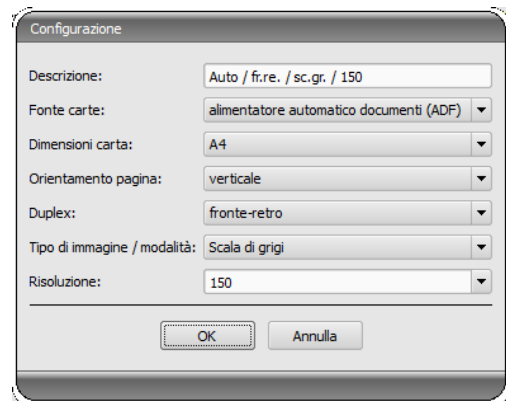

## 10 Esportazione

La funzione di esportazione consente di esportare le immagini o l'intera serie con un programma o di inviarle in forma di email. Le immagini possono essere esportate come immagini JPEG o in formato DICOM.

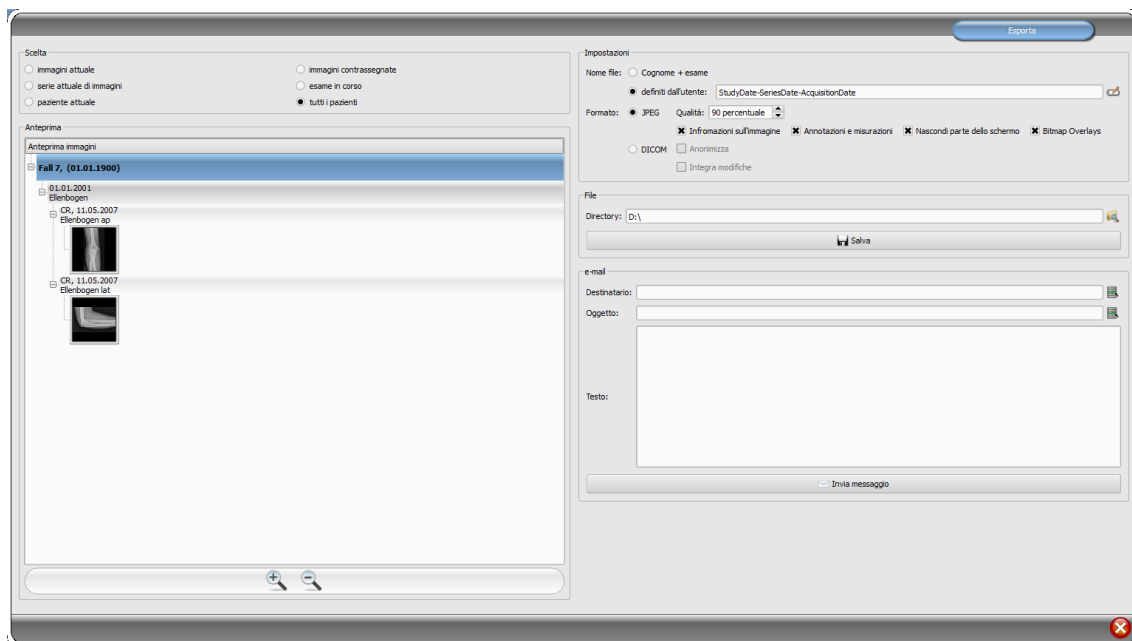

### 10.1 Selezione

In primo luogo è necessario selezionare il paziente o i pazienti le cui immagini devono essere esportate, e quindi aprire il componente di esportazione. Nella parte sinistra della finestra di dialogo è possibile selezionare le immagini da esportare. Nell'anteprima vengono visualizzate le immagini selezionate.

Se si desidera esportare alcune singole immagini da diversi esami, è necessario prima selezionarle (vedi capitolo 7.2.6 Selezione dell'immagine) e scegliere selezionando l'opzione "Immagini selezionate".


## 10.2 Impostazioni

### 10.2.1 Nome del file per l'esportazione di immagini

Con l'opzione "Cognome + esame" i nomi dei file vengono creati automaticamente dal cognome del paziente e dalla descrizione dell'esame aggiungendo un numero in ordine crescente (ad es. Rossi-Giovanni-Gomito-1.jpg).

Per utilizzare nomi di file diversi selezionare l'opzione "Definito dall'utente". Premere il pulsante "Modifica" per aprire la finestra di dialogo. Qui è possibile digitare qualsiasi testo o altre informazioni dell'immagine (ad es. la data di creazione delle immagini) come nome del file.

per utilizzare qualsiasi testo inserire il testo nel campo di descrizione. Ad ogni immagine esportata verrà assegnato questo nome di file con un numero aggiuntivo crescente (ad es. Immagine-1.jpg).

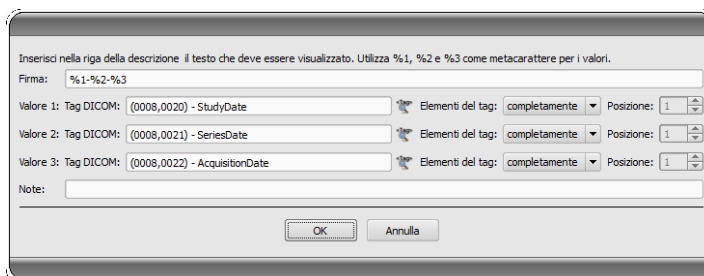

come nome del file inoltre è possibile utilizzare fino a tre valori delle informazioni dell'immagine. In questo caso è necessario selezionare il valore desiderato dai tag DICOM. Nella barra della descrizione digitare 1% per il valore, 2% per il valore e %3 per il valore 3. I nomi dei file verranno creati automaticamente con queste informazioni. Allo stesso tempo si può scegliere liberamente l'ordine. Se i valori nella barra di descrizione sono separati da trattini, anche nel nome del file verranno visualizzati dei trattini in questa posizione.

Nel sistema MS Windows© per i nomi di file non è consentito utilizzare caratteri come \ / : \* ? „ “ < > |.

### 10.2.2 Formato per l'esportazione delle immagini

#### 10.2.2.1 Esporta come file JPEG

Le immagini possono essere esportate in formato JPEG, o come immagini DICOM. La quantità di dati nel caso di immagini JPEG può essere ridotta modificandone la qualità. In tal caso le immagini verranno compresse. Questo può risultare utile quando le immagini devono essere inviate via email. Maggiore sarà il valore percentuale, migliore sarà la qualità. All'aumentare della qualità aumenteranno anche le dimensioni del file.

Bisogna ricordare che le serie multi-fotogramma vengono salvate in un unico file DICOM. Pertanto durante l'esportazione anche durante la selezione di una singola immagine, viene sempre esportata tutta la serie e viene creato un numero corrispondente di immagini singole in formato JPEG.

Inoltre è possibile determinare se devono essere esportate o meno anche informazioni sull'immagine, misurazioni ed annotazioni, parziale oscuramento dello schermo ed overlay bitmap.



#### 10.2.2.2 Esportazione come file DICOM

La seconda opzione consiste nell'esportare le immagini in formato immagine DICOM. Le immagini vengono esportate in originale direttamente come file DICOM, come nel caso del CD paziente. Anche in questo caso i dati del paziente possono essere resi anonimi.

Utilizzando la funzione "Integra modifiche" nelle immagini esportate verranno permanentemente integrate rotazioni, inversioni, modalità di finestra, filtri e parziale oscuramento dello schermo. Nel formato DICOM non è possibile esportare le annotazioni e le misurazioni.

Nella versione veterinaria è disponibile l'opzione aggiuntiva "Standard veterinario DICOM". I dati del paziente utilizzati internamente, vengono salvati nei tag DICOM previsti per questo scopo secondo lo standard. Ciò garantisce la compatibilità con altri sistemi DICOM.

#### 10.2.3 Esportazione come file

Per esportare le immagini come file, ad esempio su una chiavetta USB, è necessario indicare direttamente il percorso o esplorare la directory di destinazione. Premere il pulsante "Salva" e le immagini verranno salvate nella directory di destinazione in funzione delle opzioni impostate.

#### 10.2.4 Esporta come email

Le immagini possono essere trasmesse direttamente a programmi di posta elettronica. Per questo scopo è necessario installare sul computer e configurare il programma di posta elettronica appropriato. Possono essere usati programmi quali Outlook, Outlook Express o Windows Mail, ecc. Se le email vengono inviate direttamente tramite il sito internet è necessario esportare le immagini come file, come descritto nel paragrafo precedente, e quindi inviarle tramite il vostro provider di posta elettronica.

Se si dispone di un programma di posta elettronica appropriato è possibile utilizzare la funzione qui illustrata.

Nel campo "Destinatario" inserire l'indirizzo e-mail del destinatario, nel campo "Oggetto" inserire l'oggetto del messaggio e digitare il messaggio nella casella di testo.


Quindi fare clic su "Invia email". Viene aperto il programma di posta elettronica e le informazioni fornite vengono inserite automaticamente. Le immagini selezionate verranno allegate. Le informazioni su destinatario, oggetto e testo del messaggio possono essere inserite nel programma di posta elettronica usando ad es. la rubrica e la formattazione del testo esistente. Se tutte le informazioni ed i dati sono corrette è possibile inviare l'e-mail.



**In conformità con le disposizioni di legge è necessaria la codifica dei messaggi di posta elettronica contenenti informazioni sui pazienti o i loro dati personali. Perciò il programma di posta elettronica deve essere configurato in modo tale che i dati siano codificati, e solo il destinatario possa leggerli. Esistono apposite estensioni per programmi di posta elettronica, che consentono la codifica dei messaggi.**

Come alternativa gratuita al software crittografico può essere utilizzato "The GNU Privacy Guard". Quest'ultimo può essere scaricato dal sito <http://www.gnupg.org> ed installato. L'installazione e la configurazione del programma devono essere effettuate da un professionista.

## 11 Stampa

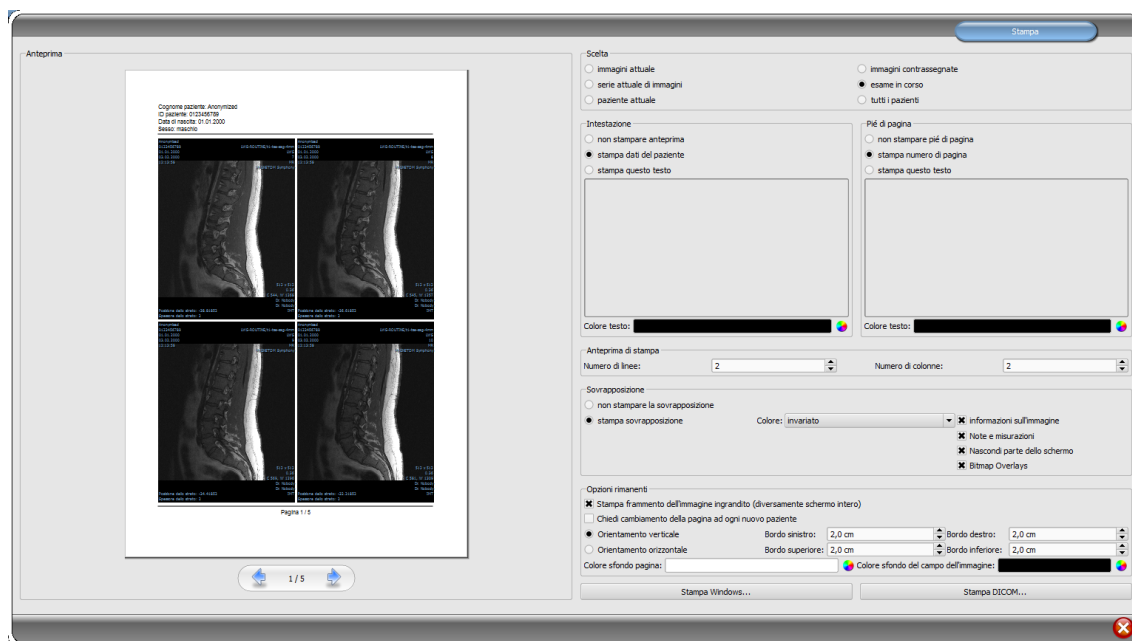

È possibile stampare l'immagine corrente o più immagini alla volta. Il tipo di stampa viene definito nella scheda "Scelta". Nel caso di serie multi-fotogramma vengono sempre stampate tutti i fotogrammi della serie di immagini.

L'intestazione, se attivata, viene stampata sempre nella parte superiore della pagina, in una dimensione fissa predefinita e nel carattere predefinito. Non è possibile cambiare queste impostazioni. È possibile stampare le informazioni standard dell'immagine, comprendenti i dati del paziente o un testo liberamente definito. È possibile scegliere il colore del testo.

L'intestazione, se attivata, viene stampata sempre nella parte inferiore della pagina, in una dimensione fissa predefinita e nel carattere predefinito. Anche in questo caso non è possibile cambiare queste impostazioni. È possibile stampare i numeri di pagina o qualsiasi altro testo liberamente definito. Anche in questo caso è possibile scegliere il colore del testo.

Su una pagina è possibile stampare più immagini. Il numero di righe e di colonne può essere selezionato nella scheda "Aspetto pagina".

È possibile scegliere se l'overlay deve essere stampata sull'immagine/i o no. Dopo la stampa gli oggetti in sovrapposizione possono essere difficilmente visibili. Pertanto è possibile scegliere se l'overlay deve essere di colore nero, bianco o invariato. Scegliendo colore invariato l'overlay verrà stampata come appare sul monitor. L'oscuramento parziale dello schermo viene sempre presentato nel colore impostato (configurazione). Le bitmap delle overlay vengono stampate come appaiono sullo schermo.

Facoltativamente è possibile stampare solo la zona di immagine attualmente ingrandita. Altrimenti verrà stampata l'intera immagine.

Se si desidera stampare le immagini di diversi pazienti, facoltativamente è possibile richiedere la modifica della pagina prima di ogni nuovo paziente (consigliato). Nell'intestazione standard vengono sempre visualizzati i dati del paziente cui appartiene la prima immagine nella pagina, quindi se sulla pagina saranno presenti più immagini, queste potrebbero essere erroneamente attribuite non ai pazienti appropriati. Durante la stampa di immagini di un

nuovo paziente su una nuova pagina verranno sempre visualizzati i dati del paziente appropriato.

Nelle restanti opzioni è possibile determinare anche l'orientamento, i margini di pagina ed il colore dello sfondo, dello sfondo dei campi in cui vengono inserite le immagini.

Tutte le modifiche delle impostazioni sulla destra sono immediatamente visibili nell'anteprima disponibile sulla sinistra. Il numero di pagine viene aggiornato regolarmente. È possibile navigare tra le pagine usando i cursori. Tutte le impostazioni vengono salvate, in modo da essere utilizzate automaticamente al prossimo avvio del componente di stampa (anche al riavvio del programma).

Il pulsante "Stampa Windows..." viene utilizzato per stampare su una normale stampante Windows. Nella finestra di dialogo aperta premendo il pulsante è possibile selezionare la stampante, e definire facoltativamente il numero di pagine stampate quando la stampa si estende su più pagine.

Il pulsante "Stampa DICOM..." viene utilizzato per la stampa su una delle stampanti DICOM configurate. Questo pulsante è disponibile solo dopo l'avvio del modulo di stampa DICOM. Nella finestra di dialogo aperta premendo il pulsante è possibile selezionare la stampante desiderata, la dimensione della pellicola ed il tipo di supporto. La stampa avviene tramite la stampante DICOM definita.

Durante la preparazione e l'invio dei dati per la stampa viene visualizzata una barra di avanzamento. Quando la stampa occupa più pagine è possibile interromperla premendo il pulsante "Annulla". Quando il comando di stampa è stato creato ed è pronto verrà visualizzato un messaggio.


## 12 CD paziente

### 12.1 Nota generale

Il programma digipaX offre diverse possibilità per la creazione di CD/DVD dei pazienti. Il modo più comune è masterizzare i dati direttamente su CD o DVD. A questo scopo può essere necessario il software "Nero" del marchio "Nero AG". A tale proposito rivolgersi all'amministratore del sistema. Se la masterizzazione su CD/DVD non è possibile, un'altra opzione è copiare i dati nella directory di destinazione o su un supporto dati esterno, come ad es. una memoria USB. Da quest'ultima è possibile aprire direttamente i dati in un altro sistema o masterizzarli su CD/DVD.

Un'altra soluzione è usare un robot di masterizzazione (Disc Producer). Con l'aiuto del robot i CD/DVD possono essere salvati in modo automatizzato e sovrastampati automaticamente. Il modulo per il collegamento del robot di masterizzazione deve essere avviato separatamente ed è disponibile solo in combinazione con il modulo "Stampa etichette su CD".

### 12.2 Selezione delle immagini

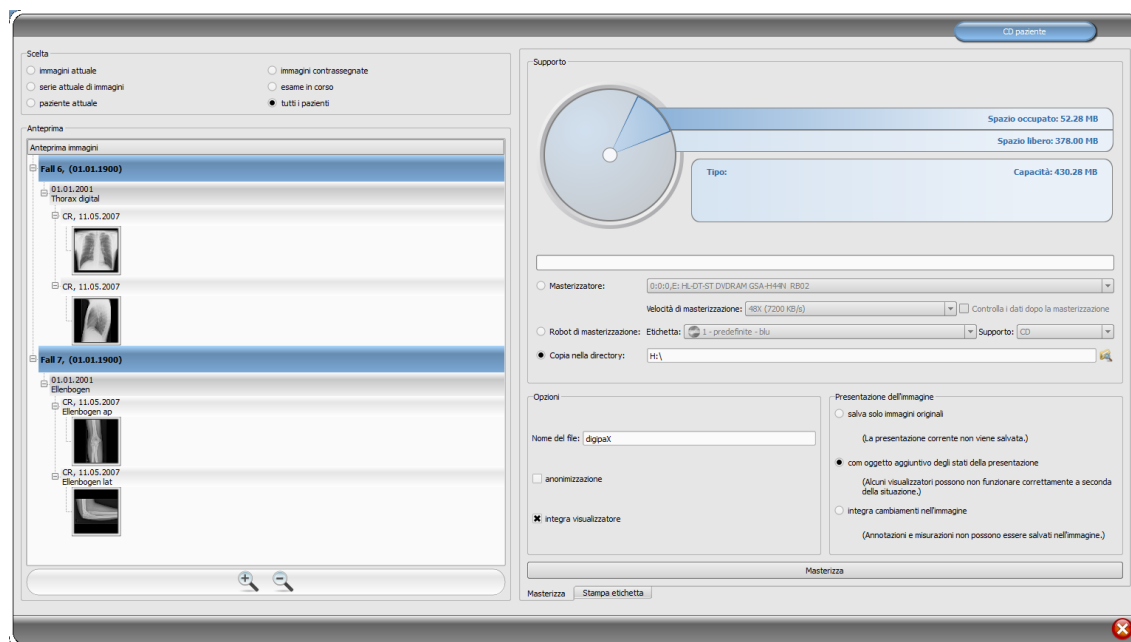

Nella scheda "Selezione" è possibile selezionare quali immagini verranno masterizzate su CD/DVD. Nell'anteprima sul fondo vengono visualizzate nuovamente sotto forma di albero le immagini selezionate nella scheda "Selezione", divise per pazienti, esami e serie.

### 12.3 Unità / supporti

Nella scheda "Supporto" è possibile selezionare il supporto CD o DVD masterizzato, inoltre vengono presentate in forma grafica le informazioni sul supporto: tipo di supporto (CD, DVD), capacità (capacità totale disponibile), spazio disponibile ed occupato in memoria dopo

aver completato la masterizzazione delle immagini attualmente selezionate. Queste informazioni vengono aggiornate continuamente per tutta la durata della masterizzazione.

La velocità media di masterizzazione può essere impostata. Questa velocità dipende dal masterizzatore e dai supporti dati vergini utilizzati.

Selezionando l'opzione "Verifica i dati dopo la masterizzazione" verrà effettuato il controllo dei dati dopo la masterizzazione

Se si dispone di un robot di masterizzazione sarà possibile selezionarlo in questa punto. Inoltre deve essere selezionata l'etichetta che deve essere stampata sul supporto dati, ed il tipo di supporto. Le etichette disponibili vengono elaborate e collocate nella scheda "Stampa etichette" e sono immediatamente disponibili per il robot di masterizzazione. Nel capitolo 13Stampa delle etichette viene spiegato come creare e modificare le proprie etichette. L'uso del robot di registratore è descritto nel capitolo 12.6.

Se i dati vengono solo copiati nella directory di destinazione, il valore "Capacità" indica un valore di spazio disponibile pari alla capacità dell'unità, il valore "Spazio occupato" indica il volume di memoria che sarà occupato dai nuovi dati, e "Spazio disponibile" lo spazio disponibile in memoria dopo aver copiati i dati. In questo caso non viene visualizzato il tipo.

## 12.4 Opzioni

I dati salvati possono essere resi anonimi. Questo significa che appariranno come segue:

- cognome: "Anonim" o "Anonim1", "Anonim2", ecc. con un numero maggiore di pazienti
- data di nascita: 01.01.2000
- sesso: O (altro)
- ID: 0 un numero con un numero maggiore di pazienti

I seguenti tag vengono rimossi durante l'anonimizzazione:

- indirizzo del paziente
- numeri di telefono del paziente
- nome del medico prescrittore
- indirizzo del medico prescrittore
- numero di telefono del medico prescrittore
- identificativo del medico prescrittore
- cognome del medico prescrittore
- identificativo del medico esaminante
- nome dell'operatore
- identificativo dell'operatore
- medico richiedente
- cognome del medico esaminante previsto
- identificativo del medico esaminante previsto
- nome dell'istituzione
- indirizzo dell'istituzione
- codice dell'istituzione
- nome del reparto dell'istituzione

Facoltativamente è possibile masterizzare su CD/DVD anche il browser digipaX, in modo tale che inserendo il CD nel computer il programma per la visualizzazione delle immagini venga avviato automaticamente.

Nella scheda "Presentazione immagine" è possibile selezionare una delle seguenti opzioni:

1. Immagini originali

Le immagini vengono salvate nella forma in cui sono presenti in archivio. Ossia come sono state generate originariamente dall'unità che le ha ricevute.

2. Oggetto supplementare degli stati di presentazione

Ad ogni immagine in scala di grigi viene aggiunto un file DICOM (Grayscale Softcopy Presentation State) che contiene informazioni su zoom, gestione finestra, rotazione, inversione, capovolgimento, annotazioni grafiche ed oscuramento parziale dello schermo. Non ogni browser DICOM è in grado di interpretare correttamente questo tipo di informazioni. Utilizzare quest'opzione se anche il browser è stato masterizzato su CD o se il destinatario del CD utilizza a casa un software che consente un'analisi corretta delle informazioni in questa forma.

3. Includi modifiche dell'immagine

Per ogni immagine viene creata una nuova immagine che contiene le modifiche apportate in essa (gestione finestre, rotazione, capovolgimento, oscuramento parziale dello schermo). Il tipo di immagine è impostato su "SECONDARY" e per la nuova immagine viene generato un nuovo identificatore di classe SOP (SOP Instance UID).

L'immagine appena creata viene salvata e trasmessa sul CD paziente.

Se possibile è consigliabile utilizzare la variante 2 con i file supplementari degli stati di presentazione.

**Filtri impostati:**



Quando si utilizza l'opzione "stati supplementari di presentazione" o "integrazione modifiche" vengono salvati anche i filtri impostati. Tuttavia questi non possono essere interpretati da altri sistemi. Se i filtri devono essere presentati sul CD paziente, sul CD deve essere masterizzato anche il browser digipaX, poiché solo quest'ultimo applica correttamente le impostazioni dei filtri.

## 12.5 Masterizzazione/copia dei dati

Dopo aver premuto il pulsante "Masterizza" vengono raccolti i dati (le immagini vengono facoltativamente decomprese e rese anonime). Ora è inoltre possibile aggiornare i dati riguardanti lo spazio occupato nella memoria. Se l'opzione di registrazione è abilitata i dati vengono scritti su CD/DVD, quindi il disco viene espulso dal computer. Se l'opzione di registrazione non è attivata, i dati vengono copiati nella directory di destinazione. Una barra di avanzamento consente di visualizzare l'attuale stato di avanzamento del processo.

## 12.6 Creazione di un CD paziente sfruttando il robot di masterizzazione

### 12.6.1 EPSON PP-100 / PP-100N


#### 12.6.1.1 Nota generale

Quando vengono raccolti i dati per la masterizzazione su CD/DVD e premendo il pulsante "Masterizza", l'ordine viene inviato al robot di masterizzazione. Il robot di masterizzazione è in grado di raccogliere alcuni ordini e di elaborarli autonomamente nel loro ordine di arrivo. Gli ordini sono gestiti dal software fornito dal produttore con il robot di masterizzazione. Il software deve essere precedentemente installato ed impostato appropriatamente. Successivamente per poter utilizzare il dispositivo è necessario configurare le impostazioni speciali nel sistema digipaX.

Consigliamo di fare installare e configurare il dispositivo al responsabile del sistema digipaX e leggere la documentazione allegata dal produttore.

Il dispositivo deve essere acceso prima che venga creato il primo ordine. In caso contrario l'ordine verrà interrotto con un errore e non apparirà nell'elenco degli ordini di "EPSON Total Disc Monitor".

#### 12.6.1.2 Creazione del CD paziente

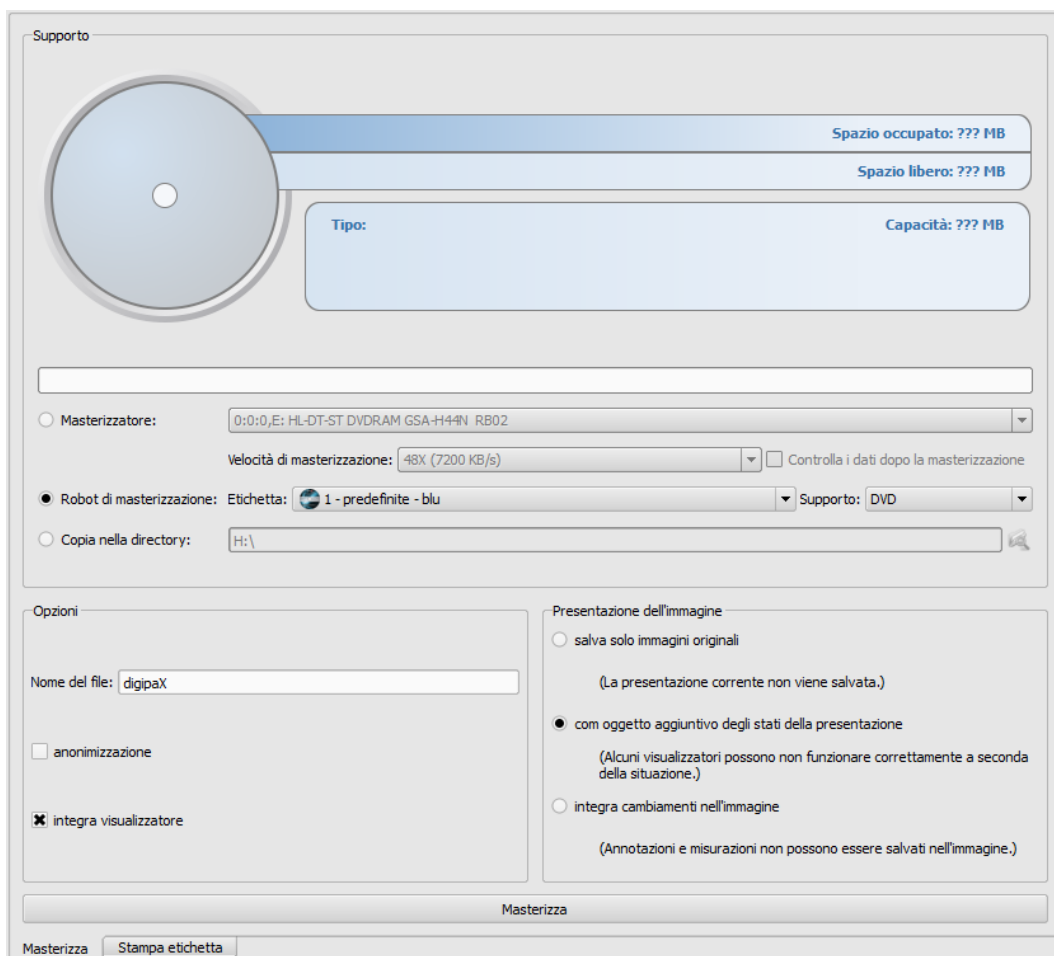

Supporto

Spazio occupato: ??? MB

Spazio libero: ??? MB

Tipo: Capacità: ??? MB

Masterizzatore: 0:0:0,E: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H44N RB02

Velocità di masterizzazione: 48X (7200 KB/s) ☐ Controlla i dati dopo la masterizzazione

Robot di masterizzazione: Etichetta: 1 - predefinite - blu Supporto: DVD

Copia nella directory: H:\

Opzioni

Nome del file: digipaX

☐ anonimizzazione

☒ integra visualizzatore

Presentazione dell'immagine

☐ salva solo immagini originali  
(La presentazione corrente non viene salvata.)

☒ con oggetto aggiuntivo degli stati della presentazione  
(Alcuni visualizzatori possono non funzionare correttamente a seconda della situazione.)

☐ integra cambiamenti nell'immagine  
(Annotazioni e misurazioni non possono essere salvati nell'immagine.)

Masterizza

Masterizza Stampa etichetta



Nella finestra di dialogo per la creazione del CD paziente selezionare l'opzione "Robot di masterizzazione". Selezionare dall'elenco a discesa l'etichetta che deve essere apposta sul supporto, come nel caso della scelta del supporto.

Le etichette vengono elaborate nella scheda "Stampa etichette", subito dopo la loro creazione sono disponibili per il robot di masterizzazione.

Quando tutto è pronto premere il pulsante "Masterizza". I dati vengono raccolti e trasmessi al robot di masterizzazione (ossia vengono copiati nella directory di trasmissione). I file del browser vengono collocati nella directory "SharedData" e verranno utilizzati nuovamente, perciò non è necessario copiarli inutilmente più volte.

**Consiglio:**

Al fine di garantire la corretta elaborazione della richiesta, il software digipaX attende l'elaborazione dei file della richiesta. L'elaborazione dei file della richiesta da parte del software EPSON, avviene sempre in sequenza, e non in parallelo. Di conseguenza in caso di creazione simultanea di ordini di masterizzazione su più stazioni, o di rapida generazione di ordini gli uni dopo gli altri, la procedura di verifica può protrarsi più a lungo. Accade raramente ma in questo caso il tempo di attesa può durare fino a 60 secondi (a seconda delle dimensioni della richiesta e delle prestazioni del computer).

**12.6.1.3 Gestione richieste**

I software "EPSON Total Disc Monitor" o "Total Disc Net Administrator" consentono di sfogliare l'elenco delle richieste. E' possibile interrompere, rimuovere le richieste o modificare il loro ordine (solo Disc Monitor). "Net Administrator" è disponibile solo per il tipo di dispositivo PP-100N, ma può essere utilizzato su tutte le stazioni.

**12.6.1.4 Eliminazione dei dati**

Sia i file delle richieste, che i dati da masterizzare su CD o DVD vengono archiviati nella directory di trasmissione impostata precedentemente. Il software DigipaX crea al suo interno una directory "SharedData", dove deposita automaticamente i file necessari per il browser. Questa directory può essere eliminata manualmente, ad esempio per rimuovere le versioni precedenti del browser. I file necessari vengono spostati nuovamente all'utilizzo successivo. I file DICOM per le richieste di masterizzazione vengono eliminati automaticamente. Il controllo viene eseguito all'avvio della stazione digipaX. In questa fase vengono eliminate le directory che risalgono a più di 2 ore. Questo è il periodo di tempo utilizzato anche dal sistema EPSON per la rimozione da questa directory dei file di richiesta obsoleti.

**12.6.2 PRIMERA Disc Publisher****12.6.2.1 Nota generale**


Quando vengono raccolti i dati per la masterizzazione su CD/DVD e premendo il pulsante "Masterizza", l'ordine viene inviato al robot di masterizzazione. Il robot di masterizzazione è in grado di raccogliere alcuni ordini e di elaborarli autonomamente nel loro ordine di arrivo. Gli ordini sono gestiti dal software fornito dal produttore con il robot di masterizzazione. Il software deve essere precedentemente installato ed impostato appropriatamente. Successi-

vamente per poter utilizzare il dispositivo è necessario configurare le impostazioni speciali nel sistema digipaX.

Consigliamo di fare installare e configurare il dispositivo al responsabile del sistema digipaX e leggere la documentazione allegata dal produttore.

Il dispositivo deve essere acceso prima che venga creato il primo ordine. In caso contrario la richiesta verrà interrotta con un errore.

### 12.6.2.2 Creazione del CD paziente

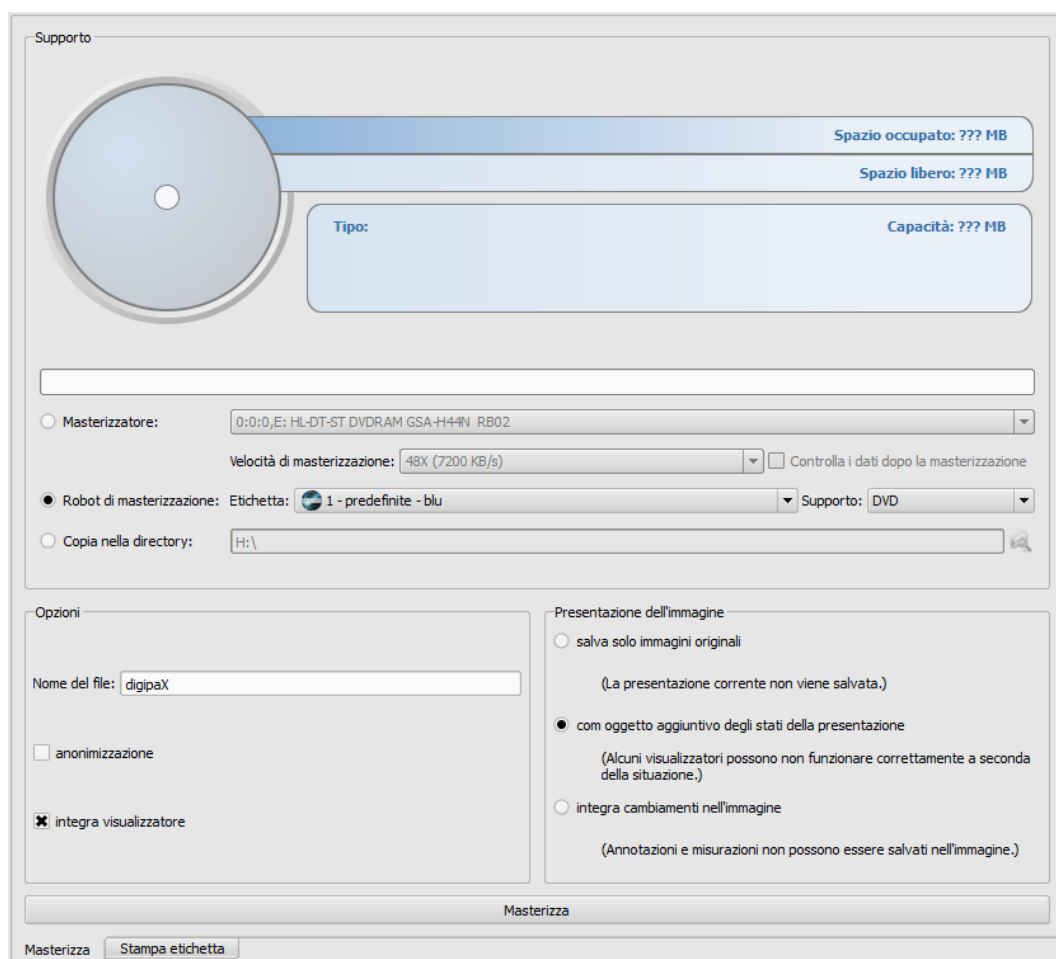

Nella finestra di dialogo per la creazione del CD paziente selezionare l'opzione "Robot di masterizzazione". Selezionare dall'elenco a discesa l'etichetta che deve essere apposta sul supporto, come nel caso della scelta del supporto.

Le etichette vengono elaborate nella scheda "Stampa etichette", subito dopo la loro creazione sono disponibili per il robot di masterizzazione.

Quando tutto è pronto premere il pulsante "Masterizza". I dati vengono raccolti e trasmessi al robot di masterizzazione (ossia vengono copiati nella directory di trasmissione). I file del browser vengono collocati nella directory "SharedData" e verranno utilizzati nuovamente, perciò non è necessario copiarli inutilmente più volte.

#### Consiglio:

Al fine di garantire la corretta elaborazione della richiesta, il software digipaX attende l'elaborazione dei file della richiesta. L'elaborazione dei file della richiesta da parte del software

PRIMERA, avviene sempre in sequenza, e non in parallelo. Di conseguenza in caso di creazione simultanea di ordini di masterizzazione su più stazioni, o di rapida generazione di ordini gli uni dopo gli altri, la procedura di verifica può protrarsi più a lungo. Accade raramente ma in questo caso il tempo di attesa può durare fino a 60 secondi (a seconda delle dimensioni della richiesta e delle prestazioni del computer).

#### 12.6.2.3 Eliminazione dei dati

Sia i file delle richieste, che i dati da masterizzare su CD o DVD vengono archiviati nella directory di trasmissione impostata precedentemente. Il software DigipaX crea al suo interno una directory "SharedData", dove deposita automaticamente i file necessari per il browser. Questa directory può essere eliminata manualmente, ad esempio per rimuovere le versioni precedenti del browser. I file necessari vengono spostati nuovamente all'utilizzo successivo. I file DICOM per le richieste di masterizzazione vengono eliminati automaticamente. Il controllo viene eseguito all'avvio della stazione digipaX. In questa fase vengono eliminate le directory che risalgono a più di 2 ore.

## 13 Stampa delle etichette



La stampa delle etichette è possibile solo dopo l'avvio del modulo appropriato.

### 13.1 Nota generale

Utilizzando lo strumento "Stampa etichette" è possibile sovrastampare sui CD/DVD dei pazienti informazioni quali nome del paziente, data di nascita, ID paziente, ecc. Queste informazioni vengono lette automaticamente dalle immagini (Intestazione DICOM) e non devono essere inserite manualmente. Il programma sfrutta le linee guida del DRG (Società Radiografica Tedesca) contenute nel "Catalogo dei requisiti DRG per i supporti per i dati dei pazienti" <http://www.dicom-cd.de/specs.php.de>.

Sono disponibili vari modelli. Questi possono essere modificati, inoltre è possibile creare propri modelli.

A questo modulo si può accedere premendo il pulsante "CD paziente" e selezionando la scheda "Stampa etichette".

### 13.2 Stampanti e supporti

Si necessita di una stampante speciale, capace di stampare direttamente su CD, come ad es. il modello Canon PIXMA. Questi tipi di stampante sono offerti da molti produttori. Non vi sono indicazioni speciali per il modello di stampante. L'unico requisito è che la stampante sia supportata dal sistema operativo Windows. Deve essere installato il driver della stampante appropriato al sistema operativo installato. Non sono necessari software aggiuntivi.

I supporti per la stampa sono offerti da diversi produttori. Possono essere utilizzati sia CD che DVD. **È consigliabile fare riferimento al catalogo dei requisiti del DRG, che al momento ufficialmente non contempla ancora l'uso dei DVD.**

DigipaX non fornisce raccomandazioni speciali sui supporti dati da utilizzare. Può accadere che non tutti i supporti siano supportati da un determinato modello di stampante. A questo proposito consultare la documentazione della stampante. Il modulo "Stampa etichette" è dedicata solo a CD/DVD destinati per la stampa diretta. Il sistema non supporta l'utilizzo di etichette incollabili.


### 13.3 Selezione modello e stampa

La condizione base è la corretta installazione del driver della stampante ed il funzionamento senza errori della stampante. Le sovrastampe esemplificative qui descritte sono state realizzate utilizzando una stampante Canon PIXMA iP4000.

In concomitanza con l'installazione del digipaX vengono installati una varietà di modelli per CD con immagini di un solo paziente e CD con immagini di più pazienti.

Selezionare il paziente e fare clic su CD paziente. Solitamente in primo luogo le immagini desiderate e le impostazioni vengono masterizzate sul CD paziente. Dopo si passa alla funzione di stampa del supporto desiderato, disponibile nella scheda "Stampa etichette".


Cliccando sul lato sinistro e destro della miniatura è possibile vedere i vari modelli. Questi sono ordinati alfabeticamente. I nomi vengono visualizzati nella parte inferiore.

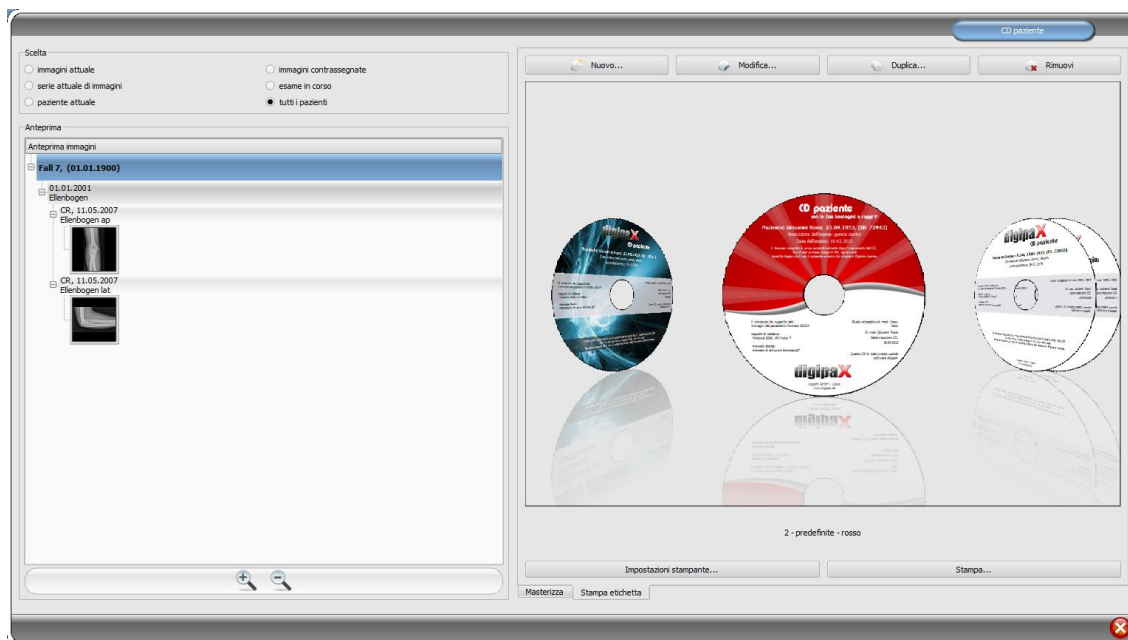

Selezionare il modello desiderato e cliccare su "Stampa".

Verrà aperta una finestra di dialogo per la selezione della stampante. All'interno di quest'ultima è possibile selezionare la stampante appropriata, attivare l'anteprima nella finestra di dialogo in "Proprietà" e proseguire premendo il tasto "Stampa".

Nelle finestre di dialogo successive viene visualizzata l'anteprima del supporto dati. Qui è possibile vedere come i dati del paziente vengono caricati automaticamente dalle immagini. Quest'anteprima può essere visualizzata in diversi modi, a seconda del modello di stampante.

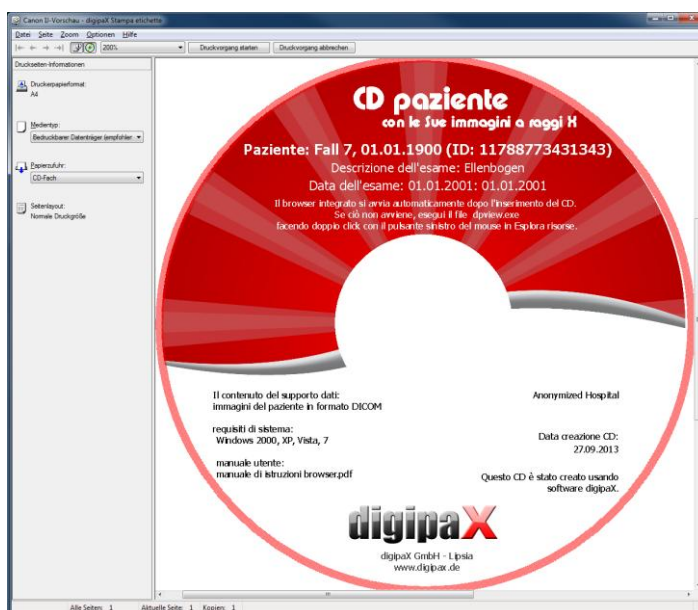

Una volta premuto il pulsante "Inizia stampa", il supporto dati verrà sovrastampato con le informazioni.

### 13.4 Impostazioni della stampante

In questa scheda è possibile impostare le dimensioni e la posizione del supporto dati.

Le dimensioni dell'etichetta si riferiscono alla dimensione del supporto dati. Il diametro esterno della superficie stampata del CD è solitamente di 118 o 119 mm. I diametri interni della zona sovrastampata possono essere differenti. A seconda del produttore e della versione del supporto è possibile impostare il valore adatto.

La posizione di stampa dipende dal modello di stampante e deve essere impostata solo una volta affinché la stampante stampi correttamente sul supporto dati. Modificando il valore delle immagini stampate è possibile spostare a sinistra / destra (posizione X) e su / giù (posizione Y). Utilizzando l'anteprima è possibile collocare l'immagine stampata al posto giusto con una precisione millimetrica.




Valori esemplificativi:

Modello di stampante	Posizione X	Posizione Y
<i>Canon PIXMA iP4000</i>	<i>2,60 mm</i>	<i>83,60 mm</i>
<i>Canon PIXMA MG5250</i>	<i>2,60 mm</i>	<i>87,50 mm</i>
<i>Canon PIXMA iP4850</i>	<i>2,80 mm</i>	<i>87,50 mm</i>
<i>Canon PIXMA iP4950</i>	<i>2,60 mm</i>	<i>87,50 mm</i>

## 13.5 Creazione di un modello

Il pulsante "Nuovo" consente di aprire un nuovo modello vuoto di stampa. In primo luogo nella riga superiore bisogna immettere un nome per il nuovo modello di stampa.

È possibile impostare l'immagine di sfondo, inserire immagini (o simboli), caselle di testo, rettangoli e linee.

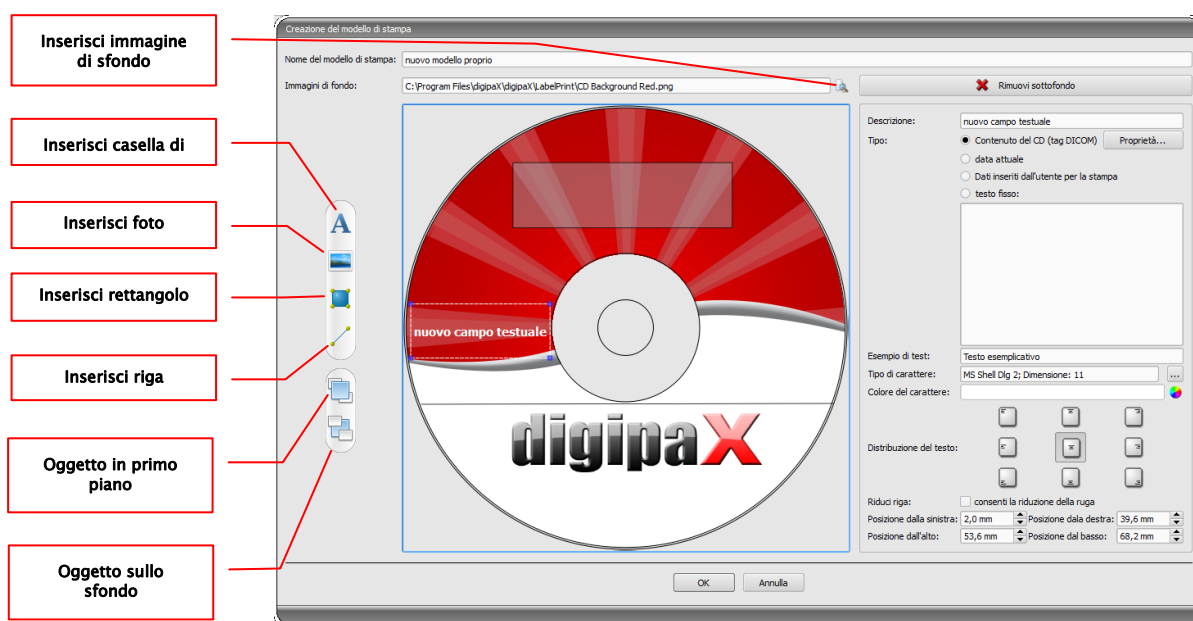

### 13.5.1 Inserimento, modifica ed eliminazione di elementi

L'etichetta può essere corredata di una varietà di elementi grafici. Questi elementi sono sempre collocati e posizionati utilizzando il mouse. Sul lato destro della finestra di dialogo verrà visualizzata ogni volta una pagina con le proprietà dell'elemento attivo. Le modifiche della proprietà sono immediatamente visibili nell'immagine. Cliccando con il pulsante sinistro del mouse sull'elemento quest'ultimo viene attivato.

#### Immagine di sfondo:

Come immagine di sfondo può essere utilizzato un qualsiasi elemento grafico. Si consiglia l'uso di elementi grafici in formato "png" con dimensioni min. 500 x 500 pixel.

Per creare un proprio sfondo è possibile utilizzare il modello Photoshop CD-Template.psd dalla cartella "Stampa etichette" stampa" nella directory di installazione.

Premere il pulsante "Trova file" e selezionare l'elemento grafico desiderato. Lo sfondo selezionato verrà inserito automaticamente nel modello.

Con il pulsante "Rimuovi sfondo" è possibile rimuovere la grafica. Lo sfondo ritornerà nuovamente bianco.



### Inserisci casella di testo:

Clicca su "Inserisci casella di testo". Quindi fare clic su un qualsiasi punto del modello e trascinare la casella di testo nella forma e dimensione desiderata. Il mouse può essere utilizzato anche per spostare in tutte le direzioni l'oggetto. Le funzioni delle caselle di testo sono descritte più specificatamente nel prosieguo delle istruzioni, nella sezione 13.5.2 Modifica dei campi di testo. La posizione e le dimensioni possono anche essere adattate con precisione millimetrica nella pagina delle proprietà.

Posizione dalla sinistra:	2,0 mm	Posizione dalla destra:	39,6 mm
Posizione dall'alto:	53,6 mm	Posizione dal basso:	68,2 mm


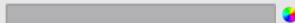
### Inserisci immagine:

Come nel caso dello sfondo, è possibile inserire qualsiasi immagine. Clicca su "Inserisci immagine" e seleziona l'immagine desiderata. Utilizzando "Apri" viene inserita la grafica selezionata. Il mouse può essere utilizzato anche per spostare l'oggetto in tutte le direzioni e per adattarne le dimensioni.

### Inserisci rettangolo

L'inserimento del rettangolo avviene in modo analogo all'inserimento di una casella di testo. Clicca su "Inserisci rettangolo" e trascina il rettangolo con il mouse. Il mouse può essere utilizzato anche per spostare l'oggetto in tutte le direzioni e ridimensionarlo.


Utilizzando le funzioni di edizione è possibile modificare le proprietà del rettangolo. È possibile impostare il colore e lo spessore del bordo, il colore del riempimento, l'opacità e l'arrotondamento degli angoli. La posizione e le dimensioni possono essere regolate con precisione millimetrica.

Colore linea:			
Spessore linea:	0,2 mm		
Colore riempimento:			
Trasparenza:	50 %		
Arrotondamento X:	0,0		
Arrotondamento Y:	0,0		
Posizione da sinistra:	29,6 mm	Posizione da destra:	88,8 mm
Posizione dall'alto:	15,5 mm	Posizione dal basso:	33,1 mm

### Inserisci riga:

Clicca su "Inserisci riga" e trascina con il mouse la linea sul modello.

Nella pagina con le proprietà è possibile impostare il colore e lo spessore delle linee, nonché posizionare la linea con precisione millimetrica.

Colore linea:				
Spessore linea:	0,2 mm			
Punto 1 X:	4,9 mm	Punto 1 Y:	80,7 mm	
Punto 2 X:	116,0 mm	Punto 2 Y:	80,4 mm	

### Rimuovi elementi:

Clicca sull'elemento che desideri eliminare e premi il pulsante "Elimina".

## 13.5.2 Modifica dei campi di testo

### 13.5.2.1 Funzioni

#### Descrizione

- viene utilizzata solo per descrivere la casella di testo, non viene stampata (o viene visualizzata sull'immagine modificata)

#### Tipo

- contenuto del CD (tag DICOM): il contenuto dei tag viene inserito automaticamente nel campo durante la stampa, proprietà: vedi sezione 13.5.2.2 Principio e caratteristiche del contenuto del CD (tag DICOM) nella casella di testo
- data corrente: data corrente inserita nella casella di testo
- dati immessi dall'utente durante la stampa: richiesta di immissione di testo prima della stampa
- testo fisso: nel campo viene inserito un testo predefinito

#### Testo esemplificativo:

- immetti il testo esemplificativo che sarà visualizzato nell'anteprima delle etichette

#### Tipo e colore del carattere:

- regolazione della dimensione, colore e tipo del carattere

#### Disposizione del testo:

- posizionamento del testo all'interno di una casella di testo (ad es. allineamento a sinistra o a destra)

#### Linea con testo a capo:

- quando quest' opzione è attiva alla fine della casella di testo il testo verrà mandato a capo automaticamente, diversamente il testo a seconda del posizionamento verrà troncato all'inizio, alla fine o su entrambi i lati

### 13.5.2.2 Principio e caratteristiche del contenuto del CD (tag DICOM) nella casella di testo



In ogni immagine DICOM sono contenute informazioni sul paziente, sull'esame e sull'immagine. Tutte queste informazioni si trovano nei cosiddetti tag nell'intestazione DICOM di ogni immagine. Il contenuto dei tag, come ad es. il cognome del paziente, l'esame, l'istituzione, sono indicati anche negli angoli dell'immagine. I tag DICOM sono numerati (ad es. il tag "0010,0010" per il cognome del paziente). Il capitolo 0 descrive come possono essere visualizzate le informazioni nell'intestazione

Nella casella di testo è possibile utilizzare tre diversi tag. Se ad esempio all'interno si trovano cognome, data di nascita e ID paziente, deve essere caricati i tag (0010,0010), (0010,0020) e (0010,0030). A tale scopo bisogna impostare i tag per i valori da 1 a 3. Alcuni tag hanno più elementi (ad es. nome, cognome, titolo). Se si desidera visualizzare solo un elemento specifico è possibile impostare quest' opzione nel tag dell'elemento. Nella riga della firma è ne-

cessario inserire il testo che si desidera visualizzare. Allo stesso tempo i valori % 1, %2 e % 3 svolgono la funzione di metacaratteri. Vengono sostituiti con il contenuto effettivo del tag. Nell'esempio sottostante la casella di testo appare come segue: Giovanni Rossi, 01.01.1960, ID: 12345

È possibile creare un elenco per i valori di molte immagini. Ciò è necessario ad es. quando devono essere inseriti i cognomi di tutti i pazienti che sono stati salvati sul supporto. Per fare ciò viene utilizzata la parola chiave LIST nella linea di didascalia. Componente:

`LIST{<DICOM Tags>|<separatore>}`

Il valore per <DICOM Tags> è impostato esattamente come descritto sopra per la riga singola. Il <separatore> è inserito ogni volta tra i singoli dati. E' necessario utilizzare:

- "nl" per linea con testo a capo
- "tab" per scheda
- qualsiasi altro carattere, ad es. punto e virgola o virgola.

La riga si presenta ad es. come segue: `LIST{%1, %3, ID: %2|nl}`.

### 13.6 Modifica, duplicazione ed eliminazione dei modelli

Per modificare il modello cercare il file e quindi fare clic su "Modifica". La modifica avviene secondo gli stessi principi della creazione del modello.

Con il pulsante "Duplica" è possibile creare una copia del modello. La copia contiene il nome dell'originale con l'aggiunta del suffisso "Copia 1" alla fine del nome. La copia può essere elaborata e si può modificarne il nome. Cliccando il pulsante "Elimina" il modello verrà rimosso dal sistema. Attenzione: quest'operazione è irreversibile.

Tutti i modelli si trovano nella directory di installazione digipaX, nella cartella "Stampa etichette". Ogni modello possiede in quest'ultima una sottodirectory separata con il nome del modello. Per spostare il modello su un altro sistema è necessario copiare l'intera cartella del modello.

### 13.7 Requisiti sulle informazioni presenti sui supporti dati

Si consiglia di seguire le istruzioni incluse nel catalogo dei requisiti per supporti dati contenenti informazioni sui pazienti DRG. All'interno nel capitolo 2.4 è presente una descrizione su come etichettare i supporti dati.

Fonte:

<http://www.dicom-cd.de/docs/DRG-Anforderungskatalog-2006.pdf>

## **2.4 Marcatura dei supporti dati**

### **2.4.1 Marcatura esterna**

*Per una marcatura ed un'identificazione univoca del supporto è necessario etichettare questi ultimi con una descrizione esterna contenente informazioni accessibili alle persone.*

*Suggerimento: utilizzando un robot di masterizzazione, che può descrivere i supporti dati senza l'interferenza dell'utente, tale descrizione è obbligatoria. I sistemi che non possono descrivere autonomamente i supporti dati devono essere coadiuvati dall'utente nella corretta descrizione manuale del supporto, ad esempio visualizzando la descrizione proposta nella finestra di dialogo che appare sullo schermo al momento dell'espulsione del supporto dati.*

### **2.4.2 Contenuto della marcatura esterna (raccomandazione)**

*Si consiglia di contrassegnare il supporto con il cognome e la data di nascita del paziente, l'ID del paziente, data di creazione del supporto dati, dati degli esami presenti sul supporto o con il nome dell'istituzione in cui è stato creato il supporto dati. Nel caso in cui su un supporto vi siano i dati di molti pazienti, si consiglia di collocare sulla parte esterna del supporto un'annotazione appropriata. Inoltre si consiglia di collocare all'esterno del supporto dati le informazioni sulla natura del suo contenuto (DICOM, rete, browser DICOM, ecc.).*

## 14 Gestione richieste



### **RICORDA!**

Per evitare inutili esposizioni a raggi X, e dunque un inutile esposizione del paziente alle radiazioni, si deve chiedere a quest'ultimo, prima di creare una nuova richiesta, se è in possesso delle sue precedenti immagini radiografiche.

Attraverso la gestione richieste (DICOM-Worklist-Management) è possibile trasferire le richieste tra diversi sistemi all'interno del DICOM. Il MPPS (Modality Performed Procedure Step) per applicare lo stato delle richieste non è supportato.

### 14.1 Creazione della richiesta e aggiornamento dell'elenco richieste

L'elenco viene aggiornato regolarmente in cicli impostati nella configurazione (nella categoria "Gestione richieste" – disponibile solo per gli amministratori). Nella configurazione è possibile disabilitare l'aggiornamento automatico dell'elenco.

Il pulsante "Aggiorna" corrisponde al comando per l'aggiornamento dell'elenco.

Nell'elenco a sinistra vengono visualizzati tutti i pazienti per cui esiste almeno una richiesta. Una volta selezionato un paziente da questa lista, nell'elenco a destra vengono visualizzate tutte le richieste per questo paziente. Allo stesso tempo ogni richiesta ha un numero di accesso univoco.

### 14.2 Filtra elenco delle richieste

Come un filtro è possibile selezionare la modalità desiderata, ad es. CR per immagini radiografiche o US per immagini ecografiche, o il titolo dell'entità applicativa (titolo AE) della stazione su cui viene effettuata la richiesta, o la data in cui è stato eseguito l'esame. A tale scopo è necessario prima abilitare la casella di scelta e quindi selezionare la modalità desidera-

ta, o digitare il nome della stazione desiderata, o definire la data d'inizio e di fine. Premendo il pulsante "Aggiorna" (in alto a destra) l'elenco delle richieste viene scaricato nuovamente, e contiene solo quelle richieste che soddisfano i criteri definiti per il filtraggio. Le impostazioni vengono salvate e verranno applicate al successivo avvio del componente lista di lavoro.

Si noti che sulle stazioni che utilizzano l'acquisizione di immagini, la lista di lavorazione selezionando un paziente viene filtrata secondo le impostazioni della configurazione. Può avere un aspetto diverso a seconda dei criteri di filtraggio applicati.

### 14.3 Creazione di richieste

La nuova richiesta viene sempre creata per il paziente attualmente selezionato nel sistema. Se sono stati selezionati più pazienti nella gestione richieste la nuova richiesta non può essere creata.


I dati del paziente per il quale è stata creata la richiesta sono visualizzati nella parte superiore della finestra di dialogo, ma non è possibile modificarli.

Sul lato sinistro della finestra di dialogo si trova il campo per la definizione delle richieste. Le parte del corpi ed i piani possono essere definiti anche utilizzando l'immagine sul lato destro della finestra di dialogo. Per fare ciò spostare il mouse sull'immagine, portare il mouse sulla regione del corpo desiderata ed attendere che questa venga evidenziata in rosso. Cliccare con il pulsante sinistro o destro del mouse sulla regione per visualizzare il menu dei possibili dettagli. Selezionare il dettaglio desiderato ed attivare nel sottomenu in apertura il comando di scelta del piano (proiezione). E' possibile selezionare più piani contemporaneamente e confermare la scelta selezionando la voce del menu "Pronto". La parte del corpo selezionata, il dettaglio ed il piano sono mostrati nell'elenco sul lato sinistro della finestra di dialogo. Le voci possono essere aggiunte manualmente all'elenco. A tal fine fare doppio clic sulla voce libera successiva nell'elenco e digitare l'organo desiderato. Allo stesso modo è possibile modificare le voci presenti nell'elenco (solo se non è stabilito il codice di procedura (Procedure Code)). La voce può essere rimossa dall'elenco premendo la piccola X rossa (in alto a destra nell'elenco). Con il pulsante "Seleziona dall'elenco" posto sotto, è possibile selezionare le

voci predefinite o le descrizioni dell'elenco. In questa finestra di dialogo della descrizione è inoltre possibile aggiungere nuovi descrizioni all'elenco.

Clicca sullo sfondo dell'immagine. Verrà visualizzato il menu con tutte le parti del corpo disponibili. Questa lista contiene in determinate circostanze ulteriori definizioni cui non sono assegnate regioni del corpo. I particolari sono sempre elencati nel sottomenu.


Nel menu di scelta rapida fare clic sulla voce del menu "Gestisci...", per personalizzare l'elenco dei dettagli e delle proiezioni (a tal fine vedi il capitolo 14.4 Gestione della tabella organi e codici di procedura).

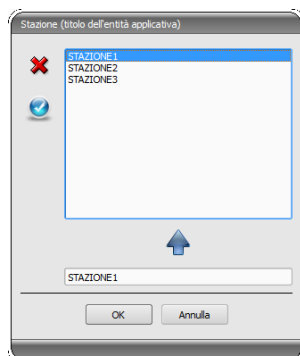

Utilizzando i piccoli pulsanti, posti oltre i campi di inserimento, si passa alla finestra di dialogo in cui è possibile utilizzare rapidamente i termini definiti. Questi possono essere aggiunti all'elenco utilizzando la freccia verde, rimossi dall'elenco tramite la X rossa e scelti per l'utilizzo con un doppio click.

Una delle voci può essere definita come standard. Quando la finestra di dialogo è in esecuzione la voce sarà inserita nella casella

appropriata per la definizione delle richieste. Lo stesso accade nel caso dei cognomi delle persone.

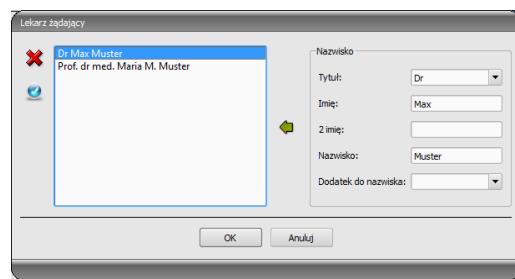


Quando la finestra di dialogo per la creazione delle richieste verrà confermata con "OK", la richiesta viene trasmessa al server liste di lavoro. Se sono configurati più server liste di lavoro, nella finestra di dialogo per la scelta sarà necessario indicare il server desiderato. Se vengono forniti più piani, per ogni piano verrà creata una richiesta. Ciò è necessario poiché le immagini vengono acquisite anche singolarmente e per ciascuna di esse viene inserita una voce nel registro radiografico digitale.

## 14.4 Gestione della tabella organi e codici procedurali

Nel menu di scelta rapida dell'immagine premendo la voce del menu "Gestisci..." si passa alla finestra di dialogo per la modifica della tabella organi. Questa finestra mostra in modo ordinato gerarchicamente le parti del corpo, i dettagli e le proiezioni. Le ultime due voci possono essere attivate o disattivate. Le voci disattivate non vengono visualizzate nel menu di scelta rapida per la selezione degli organi.

E' possibile aggiungere e rimuovere liberamente i dettagli e le proiezioni. Per aggiungere un dettaglio selezionare la parte del corpo corrispondente o il dettaglio già esistente

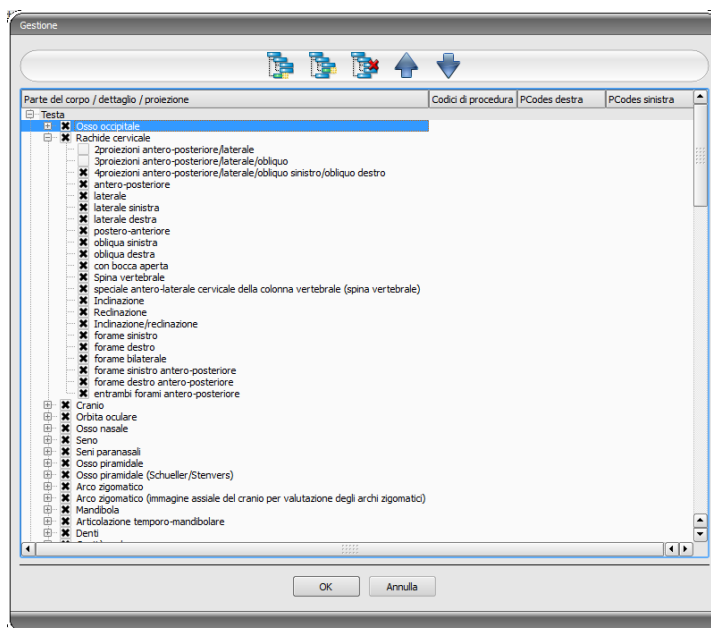

al suo interno e cliccare il pulsante "Aggiungi dettaglio". Verrà visualizzato un nuovo nodo e sarà possibile definire il suo nome. Per aggiungere una nuova proiezione selezionare il dettaglio corrispondente, o la proiezione già esistente al suo interno, e premere il pulsante "Aggiungi proiezione". Anche per la nuova proiezione è necessario immettere un nome. Utilizzando il pulsante "Elimina l'elemento selezionato" il nodo attivo verrà rimosso insieme ai sotto-elementi eventualmente contenuti al suo interno. Non è possibile eliminare i nodi per le parti del corpo.

Con i cursori è possibile ordinare le voci.

Per ogni proiezione è possibile specificare i cosiddetti codici procedurali (Procedure Codes). Questi codici vengono inviati durante il trasferimento delle immagini e vengono nuovamente analizzati nella stazione di destinazione. Devono essere adattati alle caratteristiche della stazione di destinazione, poiché ogni produttore utilizza i propri codici di accesso alle proprie impostazioni definite. Facendo doppio clic sulla cella corrispondente, nella parte destra dell'albero, è possibile specificare in questa linea il codice per la proiezione. Per ogni proiezione è possibile immettere un massimo di tre codici. I codici devono essere separati da un punto e virgola (";"). Si noti che sia prima, che dopo il punto e virgola non devono essere utilizzati spazi, a meno che lo spazio non appartenga al codice stesso. Grazie a ciò i codici possono essere inviati contemporaneamente a più dispositivi. La configurazione della trasmissione dei codici e l'impostazione o il collegamento di dispositivi appropriati devono essere effettuati dall'amministratore di sistema.

Nella finestra di dialogo di creazione delle richieste il codice di procedura viene visualizzato come suggerimento accanto alla voce nell'elenco delle richieste (viene visualizzato mantenendo il puntatore del mouse senza cliccare sulla voce). In questo caso non è possibile modificare la descrizione della richiesta. In caso le richieste venissero inserite completamente a mano, quindi senza la scelta sull'immagine, non sarà possibile inviare il codice di procedura.



## 14.5 Cancellazione delle richieste

La richiesta selezionata (contrassegnata) nell'elenco può essere rimossa con il pulsante "Rimuovi richiesta". **Il sistema non richiede conferma per quest' operazione.**

Inoltre le richieste possono essere eliminate automaticamente allo scadere di un determinato periodo di tempo dalla loro creazione. Dato che le richieste possono essere rimosse solo attraverso il sistema digipaX (e ciò dipende dai server liste di lavoro usati) e non dalla stazione su cui sono state create, ossia su cui vengono realizzate le immagini, questa rappresenta un'opzione utile per la rimozione automatica delle richieste. Il periodo di tempo deve essere scelto in modo tale che tutte le richieste possano essere sicuramente completate entro quella data.

## 14.6 Voce del registro radiografico

*Se in questo sistema non è stato avviato il registro radiografico il pulsante per la creazione di una nuova voce non sarà disponibile.*

Nella finestra di dialogo della nuova voce del registro radiografico possono essere trasferiti i valori per semplificare il lavoro e prevenire errori. Conformemente alla configurazione impostata sono possibili diverse modalità:

1. trasferimento di dati della richiesta dalla lista di lavoro
2. trasferimento di dati dalle immagini ottenute automaticamente
3. senza trasferimento di dati

Inoltre esiste la possibilità di utilizzare i dati del generatore collegato e/o del dispositivo per la misurazione della dose superficiale. Se il sistema è stato configurato correttamente dall'amministratore, è possibile utilizzare i valori ottenuti dalla tabella facendo doppio clic o selezionando la riga con i valori e trasportandola con il cursore.

### 14.6.1 Dati della richiesta dalla lista di lavoro

E' necessario selezionare prima la richiesta per la quale si desidera creare la voce nel registro radiografico. Dati quali cognome e data di nascita del paziente vengono trasferiti, per quanto possibile, dalla richiesta ed inseriti nei campi della finestra di dialogo per l'inserimento della voce. E' necessario compilare i campi restanti ed archiviare la voce nel registro, confermando con OK.

### 14.6.2 Dati dalle immagini ricevute

Come nel caso della creazione di una nuova voce direttamente nel registro radiografico (vedi 15 Registro radiografico), la ricezione automatica delle immagini in sottofondo deve essere attiva e configurata correttamente. Le nuove immagini vengono caricate dall'archivio immagini nella stazione e possono essere usate come modello per le voci del registro. È necessario innanzitutto scegliere dall'elenco delle immagini appena generate, l'immagine per cui deve essere creata la voce. Tutti i dati possibili, ossia già esistenti nell'immagine DICOM, vengono utilizzati nella finestra di dialogo. Per inviare i dati nel registro anche in questo è necessario compilare i dati restanti ed uscire dalla finestra di dialogo, premendo il pulsante OK.

### **14.6.3 Senza trasferimento dei dati**

La finestra di dialogo con maschera di input per la nuova voce in questo caso è completamente vuota. È necessario inserire tutti i dati e salvarli nel registro radiografico, premendo OK.

### **14.7 Visualizzazione delle immagini ottenute**

Se il percorso delle immagini (routing) è specificato correttamente, sia per l'archivio immagini, che per la stazione digipaX, la stazione digipaX può ricevere automaticamente le immagini in sottofondo. In questo caso nella configurazione della gestione richieste viene attivata dall'amministratore l'opzione "Visualizza colonna con le immagini ottenute ed evidenzia le nuove immagine inserite nell'elenco" e l'utente può controllare le richieste eseguite. Se dalla stazione su cui vengono create le immagini non è possibile eliminare le richieste, quest'opzione offre la possibilità di verificare quando la richiesta sarà completata e sarà pronta. Se sulla stazione ricevente le immagini (digipaX) vengono rimosse le richieste, queste verranno rimosse automaticamente dalla lista anche su questa stazione.

### **14.8 Uscire dalla gestione richieste**

Se nell'elenco dei pazienti è stato selezionato un paziente, è possibile utilizzare l'opzione "Seleziona paziente" disponibile sul lato sinistro (o fare doppio clic sulla voce nell'elenco dei pazienti) per inserire il paziente selezionato nella selezione dei pazienti (la nuova selezione sostituisce quella precedente) e quindi chiudere il componente. Se il paziente ancora non è presente nella lista dei pazienti (sorgente dati archivio immagini), verrà creato localmente come nuovo paziente.

Inoltre da qui è possibile passare direttamente alla gestione pazienti. Se è già stato scelto un paziente dall'elenco, questo inoltre sarà scelto anche come paziente attivo.

Se il registro radiografico è stato installato ed è attivo si può passare direttamente a quest'ultimo. In questo caso non verrà selezionato nessun paziente.

## 15 Registro radiografico

Il registro radiografico può essere aperto con il pulsante di avvio, se il registro radiografico è in esecuzione sul sistema.

### 15.1 Nuova voce

Cliccando con il pulsante in alto a sinistra è possibile creare una nuova voce del registro radiografico.



Questo pulsante è disponibile solo presso la stazione configurata per creare voci del registro radiografico. Altrimenti in questo punto è presente un pulsante per aggiornare la visualizzazione.

Aggiungendo una nuova voce al registro radiografico è possibile utilizzare i valori dell'immagine ottenuta, quando la ricezione dell'immagine in sottofondo è correttamente configurata. A tal fine è necessario scegliere dall'elenco delle immagini, l'immagine per cui deve essere creata la voce. Nella finestra di dialogo d'input dei valori, i campi sono opportunamente riempiti con i valori dall'immagine. Se non è stata selezionata l'immagine o non è stata impostata la ricezione dell'immagine, tutti i campi saranno vuoti. In tal caso per salvare la voce nel registro è necessario immettere i valori nei campi appropriati e confermare con OK.

Se il generatore o il dispositivo per la misurazione della dose superficiale sono collegati direttamente al sistema e l'amministratore ha effettuato le impostazioni appropriate, i valori ottenuti da questi dispositivi, presenti nella tabella che viene visualizzata aggiuntivamente nella finestra di dialogo, possono essere inseriti nei campi della finestra di dialogo facendo doppio clic o usando il cursore. I valori già utilizzati non vengono visualizzati all'apertura successiva della finestra di dialogo.

### 15.2 Visualizzazione delle voci del registro radiografico

Aprire il registro con il pulsante di avvio come descritto sopra. Verrà visualizzato il contenuto del registro radiografico. Le voci sono ordinate in ordine cronologico crescente. Il registro radiografico può essere modificato solo su una stazione. Su tutte le altre stazioni è possibile solo visualizzare le voci del registro radiografico, ma non è possibile crearne di nuove. Se durante la visualizzazione del registro radiografico viene aggiunta una nuova voce a quest'ultimo, sarà necessario aggiornare la visualizzazione del registro. Per fare questo premere il pulsante "aggiorna" in alto a sinistra.

### 15.3 Filtraggio

Nella parte inferiore della finestra di dialogo è possibile impostare i filtri per i cognomi dei pazienti, le regioni del corpo e la data d'acquisizione. Per applicare i filtri è sempre necessario selezionare la casella di controllo desiderata (è possibile selezionare più caselle).

Per visualizzare nuovamente l'elenco completo di tutte le voci è necessario deselectare tutte le caselle di controllo e cliccare su "Filtra".

Le impostazioni vengono salvate ed al successivo avvio del registro radiografico verranno usate come filtro.

### 15.3.1 Cognome del paziente

Digitare parte del cognome ricercato ed utilizzare il simbolo ("\*") come metacarattere (ad es. "Camil\*").

### 15.3.2 Regione del corpo

Digitare una o più parole, o loro frammenti, nella casella di input per la regione del corpo. Nell'elenco a discesa accanto al campo di input è possibile specificare se la descrizione del corpo deve contenere tutte le parole (E), o solo uno di esse (O). Premendo il pulsante "Filtra" le voci del registro vengono filtrate, verranno visualizzate solo quelle che contengono le parole desiderate.

### 15.3.3 Intervallo temporale

Digitare nel campo "da" la data da cui si desidera iniziare il filtraggio dell'elenco, ed nel campo "a" la data in cui devono terminare le voci nel registro. Premendo il pulsante "Filtra" verranno visualizzate solo quelle voci in cui la data di esecuzione dell'esame radiografico è posteriore o uguale alla data iniziale, e antecedente o uguale alla data di fine.

## 15.4 Esportazione

È possibile esportare il registro completo come file CSV (file di testo con punto e virgola come carattere separatore tra i valori) per caricarlo ad es. nel programma Excel.

Se è stato impostato il filtro, anche quest'ultimo verrà utilizzato per l'esportazione. Verranno quindi salvate quelle voci del registro che sono presenti anche nella tabella.

Su richiesta è possibile aprire immediatamente i file esportati utilizzando il software standard appropriato (ad es. Excel), modificarli o stamparli.

## 15.5 Pulizia (rimozione)

Per pulire il registro è necessario immettere la password di cancellazione.

Password: digipax

Dopo aver digitato la password tutte le voci verranno rimosse dal registro radiografico.

## 16 Acquisizione di immagini

### 16.1 Nota generale

Tre differenti moduli sono destinati all'acquisizione di immagini, tuttavia per ogni stazione può essere attivato solo un modulo.

Il modulo di acquisizione immagini radiografiche può essere utilizzato per ricevere immagini radiografiche digitali dai dispositivi collegati, come ad esempio lettori per immagini radiografiche e detector.

Il modulo frame grabber/immagini video viene utilizzato per ricevere immagini o sequenze di immagini da dispositivi che utilizzano uscite video, e sono collegati al sistema utilizzando un'attrezzatura informatica appropriata. Come ad esempio endoscopi, dispositivi ad ultrasuoni ecc. Per controllare l'acquisizione possono essere utilizzati interruttori a pedale.


Ulteriori dispositivi possono essere collegati attraverso un modulo di acquisizione per serie di immagini. Si tratta di un'interfaccia per dispositivi che non necessitano di essere collegati direttamente alla stazione digipaX, ma conservano autonomamente i dati delle immagini nella directory predeterminata sul computer o nella rete. Le immagini vengono successivamente raccolte dal digipaX ed elaborate ulteriormente.



**Durante l'installazione di dispositivi si dovrebbe sempre prestare attenzione alla disposizione sicura dei cavi, per eliminare il rischio di incidenti o danni alle apparecchiature. Gli interruttori a pedale operano con bassa tensione e non rappresentano un potenziale pericolo.**


## 16.2 Processo di acquisizione immagini/ricezione immagini con la gestione richieste

Sostanzialmente i passaggi successivi per l'acquisizione o la ricezione dell'immagine sono identici per tutti i moduli. Dal componente "Gestione richieste" selezionare il paziente per il quale deve avvenire la prossima ricezione di immagini. Per fare questo selezionare il cognome del paziente nella lista dei pazienti, vedere i requisiti dettagliati nella parte inferiore della finestra di dialogo, e premere "Seleziona paziente" (o fare doppio clic sul cognome del paziente).

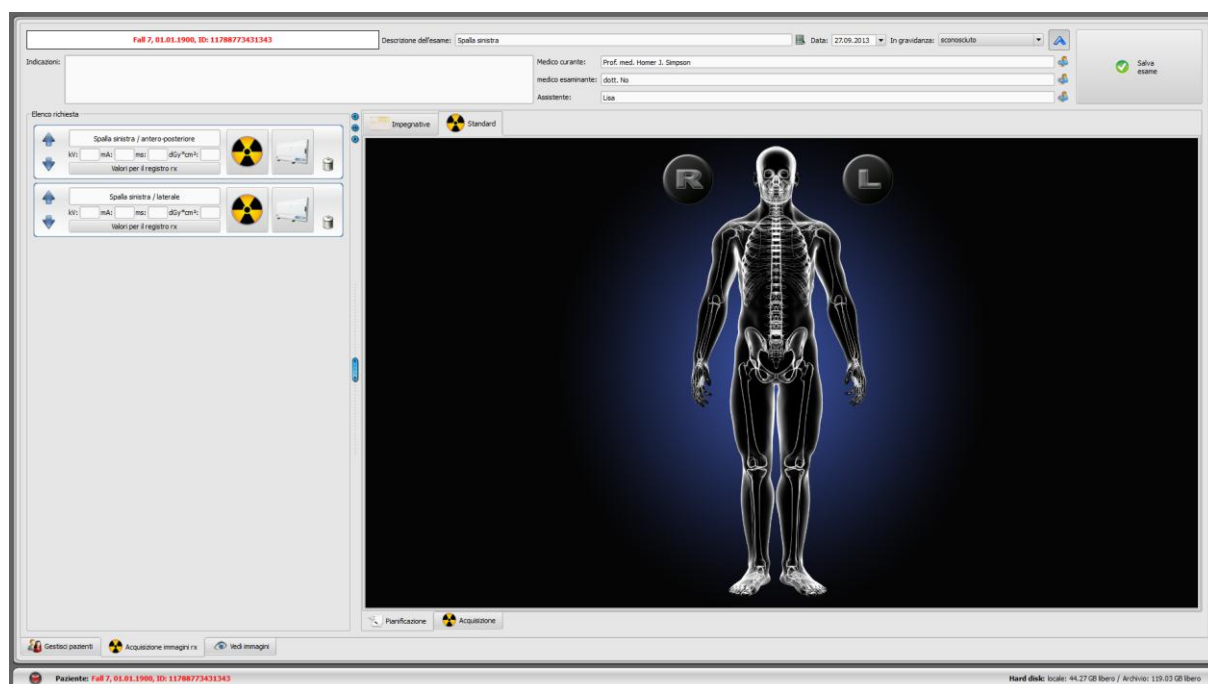

Il paziente viene selezionato, il programma passa alla pianificazione della richiesta, in cui le richieste assegnate al paziente sono visibili sul lato sinistro della finestra di dialogo casella sotto forma di elenco. Fermando il cursore del mouse sopra una delle voci in questo elenco (senza cliccare) nel riquadro dei suggerimenti sono visibili i dettagli di questa richiesta. Ora ordinare le richieste nell'ordine in cui devono essere scaricate le immagini.

Nella parte superiore si trovano i campi di input per la descrizione, la data dell'esame e lo stato di gravidanza. La descrizione e la data dell'esame solitamente vengono inserite automaticamente dalla richiesta selezionata. Se così non fosse è necessario inserire i dati corretti ed indicare lo stato di gravidanza. Per i pazienti di sesso maschile il campo stato di gravidanza naturalmente è vuoto e non può essere modificato.

Sotto si trovano ulteriori campi per inserire informazioni riguardanti il medico, l'assistente che realizza le immagini, le indicazioni per il paziente. Se queste informazioni non sono necessarie (ad es. nel caso di cliniche veterinarie), è possibile omettere questi campi o persino nasconderli, usando la freccia blu in alto a destra . Accanto ad essa si trova il pulsante per l'invio di nuove immagini nell'archivio.

### 16.2.1 Pianificazione richieste

Ora si dispone della possibilità di ordinare le richieste nell'ordine in cui si desidera eseguire le immagini.

Se non tutte le richieste sono visibili, ciò è causato dall'impostazione di un filtro da parte dell'amministratore di sistema.

E' possibile aggiungere altre richieste o eliminarle direttamente nella pianificazione delle richieste. Qui sono a disposizione gli stessi tipi di organi, come nella gestione richieste, in forma di schede. La selezione della parte del corpo e dell'organo per creare la richiesta avviene nel modo descritto in precedenza nel capitolo 14.3. Tuttavia qui non è possibile inserire dati aggiuntivi. Inoltre per la modalità e la stazione di destinazione (titolo dell'entità applicativa) vengono applicati automaticamente i valori predefiniti impostati dall'amministratore. Se sono necessari altri valori o ulteriori dati, utilizzare la gestione richieste per aggiungere altre richieste. Nella pianificazione richieste è possibile inoltre gestire le tabelle degli organi ed i codici delle procedure (vedi sezione 14.4).

Consiglio: Se nel sistema non è attiva la scelta visiva degli organi, quindi non è presente nessun aiuto grafico per la creazione delle richieste, anche la pianificazione richieste non sarà disponibile. In questo caso da questa funzione sarà possibile solo ordinare le richieste. A tale proposito rivolgersi all'amministratore del sistema.

Le singole richieste possono essere eliminate utilizzando l'icona del cestino.

Dal passo successivo inizia l'acquisizione / ricezione di immagini. A seconda del tipo di modulo installato i passi successivi possono essere differenti.

Dopo aver salvato le nuove immagini, le richieste realizzate possono essere eliminate a seconda della configurazione scelta.

I singoli passi dell'acquisizione e della ricezione, nonché dell'elaborazione delle immagini/serie in ogni modulo sono descritti nel prosieguo del manuale. Per ulteriori informazioni vedere anche le sezioni 16.4 acquisizione di immagini radiografiche e 16.5 Frame grabber / acquisizione di serie di immagini.

## 16.3 Processo di acquisizione/ricezione di immagini senza gestione richieste

La pianificazione richieste è disponibile anche senza la gestione richieste, a patto che nel sistema sia attiva la selezione visiva degli organi. Nella pianificazione richieste è possibile creare richieste ancor prima dell'acquisizione. Se il server liste di lavoro non è attivo le richieste tuttavia non verranno salvate, e verranno rimosse alla chiusura del digipaX.

Selezionare il paziente nel programma di gestione della clinica o gestione pazienti digipaX. Il sistema passa alla pianificazione richieste. Ora è possibile creare, eliminare ed ordinare le richieste come descritto in precedenza nella sezione 16.2.1. Quindi avviare l'acquisizione/ricezione dell'immagine. Se non si vuole creare nessuna richiesta, è possibile passare direttamente all'acquisizione di immagini. Nel caso dell'acquisizione di immagini radiografiche, è necessario premere nuovamente il pulsante di acquisizione nel menu di scelta rapida

sulla barra degli strumenti di destra. A seconda del software del dispositivo di imaging è necessario selezionare manualmente l'organo e la proiezione delle immagini.

Scaricare l'immagine o la serie ed effettuare l'elaborazione. Per ulteriori informazioni vedere anche le sezioni 16.4 Acquisizione di immagini radiografiche o 16.5 Frame grabber / acquisizione di serie di immagini.

Prima di salvare le nuove immagini è necessario inserire i dati mancanti, quali descrizione dell'esame, dell'immagine o della serie. È necessario inserire una descrizione generale dell'esame, che verrà applicata a tutte le immagini di questo esame, come "Colonna vertebrale lombare, colonna vertebrale toracica" o "Braccio, destro". Per le singole immagini o serie, inserire come commento la descrizione dettagliata dell'acquisizione, ad es. "Colonna vertebrale lombare, proiezione antero-posteriore". Successivamente digitare i parametri di acquisizione ed il cognome, o le iniziali dell'assistente che effettua l'immagine.

Quando tutti i dati saranno completi, salvare l'esame premendo il pulsante in alto a destra.

La data nella parte superiore della scheda foto viene inserita automaticamente ed aggiornata dall'ora di sistema Windows. Prima di salvare è possibile modificare manualmente la data. Successivamente la data verrà aggiornata automaticamente solo dopo il riavvio del sistema digipaX

## **16.4 Acquisizione di immagini radiografiche**

### **16.4.1 Nota generale**

Quando il modulo acquisizione immagini radiografiche è attivo, viene visualizzata la scheda aggiuntiva "Acquisizione immagini radiografiche". È composta dalla parte "pianificazione: (se in esecuzione) ed "acquisizione". L'acquisizione di immagini radiografiche contiene funzioni aggiuntive per l'acquisizione e l'elaborazione delle immagini.

Sul lato destro della scheda vengono visualizzati i dispositivi collegati (questa indicazione deve ancora essere eventualmente attivata nel menu di scelta rapida del toolbox). Questi campi sono temporaneamente evidenziati durante la ricezione dei valori (giallo durante la ricezione, verde alla ricezione completata con successo, rosso nel caso di ricezione con errori).

Nella scheda si trovano i componenti per la gestione dell'acquisizione immagini e gli strumenti per l'elaborazione delle immagini. Nel menu di scelta rapida è possibile nascondere le funzioni inutilizzate e visualizzare quelle necessarie. Per fare questo cliccare con il pulsante destro del mouse sull'area strumenti, ed abilitare o disabilitare le funzionalità nel menu visualizzato.

Sulla sinistra è presente l'elenco delle richieste per il paziente corrente.

### **16.4.2 Processo di acquisizione di immagini radiografiche**


Dopo la selezione del paziente è possibile avviare l'acquisizione delle immagini. Selezionare la richiesta desiderata e fare clic sull'icona di acquisizione. Se viene utilizzato un generatore che utilizza i codici di procedura per le impostazioni predefinite, e la trasmissione di questi codici è supportata da digipaX, iniziare l'acquisizione con l'invio di codici di procedura premendo il pulsante "Invia impostazioni al generatore". Quindi effettuare l'immagine del paziente. Per l'immagine è necessario ancora immettere i parametri di esposizione nei campi



previsti per questo scopo, se questi non sono già stati inseriti automaticamente. Durante l'inserimento dei valori utilizzare il separatore decimale (questo di solito è rappresentato da una virgola). Conformemente allo standard DICOM non è consentito inserire numeri decimali (dopo la virgola) per il valore mAs. Tuttavia l'amministratore può attivare l'opzione "Consenti numero decimale per mAs" nella configurazione.

Quindi è possibile caricare l'immagine nella richiesta ed inviarla al digipaX, premendo il pulsante "Inizia invio immagine".

Facoltativamente è possibile attivare il pulsante grande per l'acquisizione immagini nel menu di scelta rapida, nella barra degli strumenti a destra. Se si desidera utilizzarlo ricordarsi che la richiesta desiderata deve essere stata in precedenza contrassegnata di blu (con un solo clic sulla richiesta), affinché l'immagine scaricata venga correttamente assegnata. Se nessuna richiesta è contrassegnata in blu o la richiesta selezionata contiene già un'immagine, una nuova immagine verrà assegnata alla prima richiesta priva di immagine. Quando si opera con le richieste è consigliabile eseguire tutte le operazioni utilizzando direttamente gli interruttori delle richieste e nascondendo il pulsante destro. Si dovrebbe, per quanto possibile, seguire sempre l'ordine dei passaggi al fine di garantire una corretta ripartizione di richieste, codici di procedura, parametri, esposizione ed immagini.

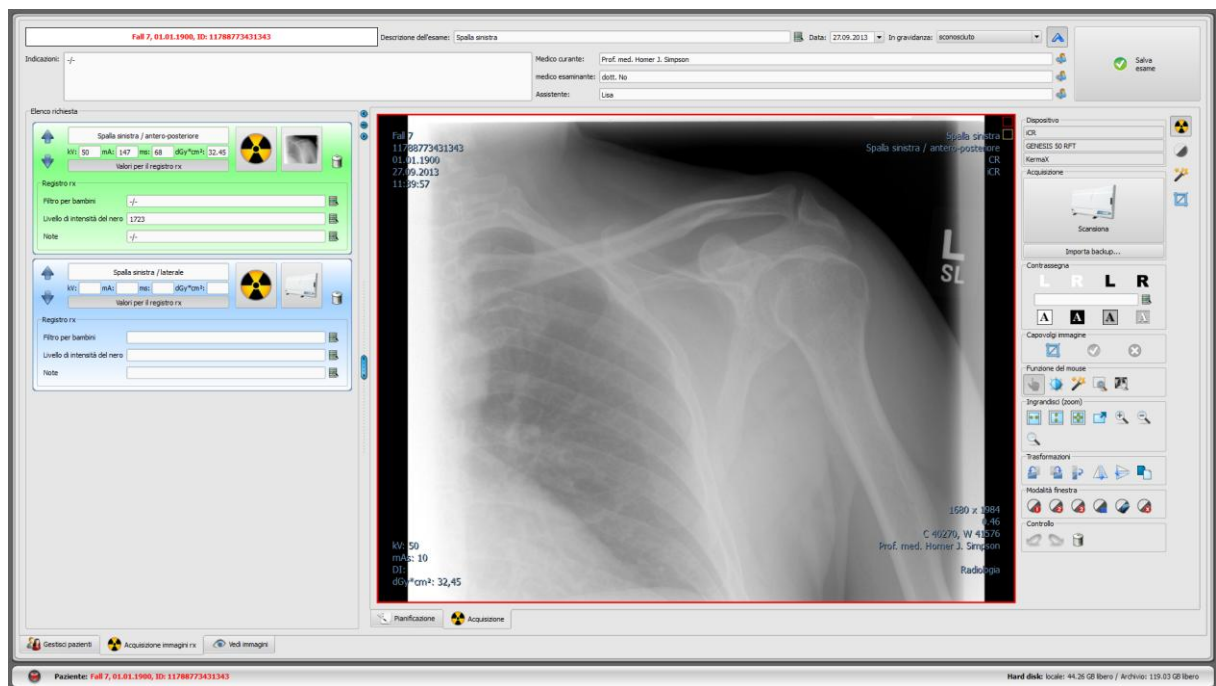

All'avvio della procedura di acquisizione, viene aperto il programma di acquisizione fornito dal produttore del dispositivo, attraverso il quale vengono trasmessi i dati dell'immagine.



La scritta ed il simbolo sul pulsante di acquisizione immagini possono differire in una determinata installazione, a seconda della configurazione del sistema.

Se la prima immagine è un'immagine scansionata, questa viene assegnata alla richiesta appropriata e viene visualizzata come miniatura nella richiesta, ed in formato grande nella finestra. In alcune circostanze, durante la lettura e la trasmissione dei dati dell'immagine, può

avere luogo la ricezione dell'immagine successiva. Il software per lettura dei dati dell'immagine deve essere chiuso dopo la ricezione di ogni immagine (ma non il sistema digipaX).

Le immagini vengono assegnate al nuovo esame e ciascuna di esse viene inserita nella propria serie. Il nome dell'esame viene creato automaticamente dalla richiesta o può essere inserito manualmente.

Digitare il cognome del tecnico radiologo. Una volta elaborate tutte le richieste ed i dati sono completi, è possibile completare la procedura. Cliccare il pulsante "Salva esame" per caricare le nuove immagini in archivio.

### 16.4.3 Selezione



La selezione è disponibile solo se è stato eseguito il modulo appropriato.

Prima del salvataggio è possibile inserire la selezione nell'immagine (nella configurazione, in "Acquisizione immagine" deve essere abilitata la funzione "Selezione"). Selezionare ad es. una delle lettere virtuali di piombo (S o D) cliccando il tasto sinistro del mouse, e quindi spostando il cursore del mouse sull'immagine. Si può vedere l'immagine della lettera, la cui dimensione può essere modificata con lo scroll del mouse o con i tasti più e meno sulla tastiera. Spostare il simbolo nella posizione desiderata sull'immagine ed inserirlo in tale punto facendo nuovamente clic con il pulsante sinistro del mouse. Il simbolo verrà inserito permanentemente sull'immagine e sarà costantemente collegato ad essa. Quest'operazione può essere annullata immediatamente dopo la sua esecuzione (con i cursori sotto il toolbox) prima di salvare l'immagine; se l'immagine viene salvata le selezioni non potranno essere rimosse.

Sulle immagini possono anche essere posizionati testi. A tale scopo digitare il testo desiderato nel campo "Testo libero" o selezionarlo dall'elenco dei testi predefiniti. I 4 pulsanti per la configurazione del testo vengono utilizzati per definire l'aspetto del testo sull'immagine, si può scegliere tra testo nero su sfondo bianco, testo bianco su sfondo nero, testo nero senza sfondo o testo bianco senza sfondo. È anche possibile modificare la dimensione della casella di testo, nello stesso modo in cui vengono modificate le dimensioni delle lettere virtuali di piombo.

### 16.4.4 Ritagliare un'immagine



La funzione ritaglia immagine è disponibile solo se è stato eseguito il modulo appropriato.

Prima di salvare è possibile ritagliare i bordi dell'immagine. Da quest'operazione provengono i seguenti vantaggi:

- è immediatamente visibile l'area dell'immagine che ci interessa, senza dover ingrandire l'immagine sin dall'inizio
- minore utilizzo di memoria
- maggiore velocità di trasferimento dati

- più veloce presentazione e modifica dell'immagini (ad es. gestione finestra)

Tuttavia esiste il rischio di ritagliare insieme ai bordi, anche importanti informazioni presenti sull'immagine.



**L'immagine originale è disponibile solo in forma di backup nell'elenco di immagini appena acquisite. Se l'immagine viene salvata nell'archivio immagini, non sarà più possibile ripristinare i bordi ritagliati.**

Per ritagliare l'immagine presentata è necessario prima premere il pulsante "Seleziona area". Quindi fare doppio clic con il pulsante sinistro del mouse sull'immagine per selezionare i punti angolari dell'immagine che si desidera ottenere. Ora è visibile sull'immagine l'anteprima dell'area che verrà ritagliata. **Controllare nuovamente nell'anteprima se con il taglio dell'immagine non sono state ritagliate anche informazioni importanti presenti su di essa.** Cliccando il pulsante "Accetta" confermare il troncamento dell'immagine e l'operazione verrà eseguita. L'immagine tuttavia non verrà immediatamente salvata o spostata automaticamente nell'archivio immagini. L'operazione eseguita può essere annullata con il pulsante "Annulla", come le altre operazioni. Facendo clic su "Rifiuta" è possibile annullare la selezione e effettuarne una nuova. In questo modo è possibile rimuovere la selezione errata.

#### 16.4.5 Trasformazioni delle immagini / modalità finestra / filtri / diaframma

Prima di salvare le immagini scansionate di recente è possibile sottoporle ulteriormente ad elaborazione, ad es. trasformazioni (rotazione/capovolgimento), impostare i filtri o cambiare la modalità finestra. Per tale scopo utilizzare le funzioni del mouse e gli strumenti di ingrandimento, come nel browser immagini (vedasi capitolo 7.2.1 e 7.2.2) e gli strumenti per la modalità finestra e la trasformazione (vedi capitolo 7.3.1 e 7.3.2).

Nei toolbox sul lato destro sono presenti dei cursori con impostazioni predefinite per la modalità finestra (preset) e strumenti specifici per filtri e diaframmi.

Rotazione, capovolgimento, parametri finestra ecc. vengono salvati direttamente nell'immagine ed inviati con essa nell'archivio. Questi cambiamenti vengono inoltre visualizzati immediatamente sulle altre stazioni su cui l'immagine viene visualizzata.

nella configurazione (scheda "Acquisizione immagini") è possibile impostare la rotazione ed il capovolgimento automatico, che verranno applicati immediatamente a tutte le nuove immagini.

#### 16.4.6 Rifiuto delle immagini

Le singole immagini possono essere rifiutate. Questo significa che le immagini non verranno trasferite nell'archivio immagini e verranno cancellate. Cliccare sulla miniatura del cestino presente nella richiesta, successivamente seleziona "Rimuovi solo immagini", o sulla miniatura nella richiesta per visualizzarla in formato grande nel browser, e premere il pulsante "Rifiuta" in basso a destra in fondo nel toolbox degli strumenti. Il sistema richiede conferma del rifiuto dell'immagine. Alla richiesta di conferma rispondere "Sì". Allo stesso tempo vengono rimossi i valori del generatore o i valori del misuratore del rapporto dose-superficie associati all'immagine.

### 16.4.7 Dispositivi supplementari

Come descritto in precedenza è possibile collegare al sistema dispositivi aggiuntivi, quali generatore radiografico o un dispositivo per la misurazione del rapporto dose-superficie. Questi dispositivi inviano automaticamente i nuovi valori al sistema o il sistema controlla periodicamente i dispositivi per la ricerca di nuovi valori. Non appena i nuovi valori sono disponibili vengono assegnati o alla richiesta corrente (evidenziata in blu) o all'immagine successiva nella lista ancora priva di qualsiasi valore. In caso contrario viene creata una richiesta vuota e vi vengono assegnati i valori.

Se si desidera prima scaricare sul dispositivo radiografico più immagini consecutive e quindi inviarle al digipaX è necessario prestare attenzione all'ordine delle richieste. Se all'immagine sono state assegnati valori errati, è necessario immettere manualmente i valori appropriati nei campi appropriati, prima che l'immagine venga inviata nell'archivio.

### 16.4.8 Backup

Per ogni immagine scansionata, in primo luogo viene creato un backup, prima che l'immagine sia sottoposta ad ulteriore elaborazione. Se al sistema sono collegati dispositivi supplementari, nel backup verranno protetti anche i loro valori.

Per riprodurre l'immagine del backup prima attivare il paziente, cui sono assegnate a queste immagini. Quindi premere il pulsante "Importa backup...", sotto il pulsante di acquisizione immagini. Nella finestra di dialogo vengono visualizzate le miniature delle immagini, la data e l'ora di acquisizione. Selezionare l'immagine che si desidera importare e confermare la scelta con "OK". L'immagine verrà importata in forma tale, come se fosse stata appena scansionata. Verrà creata una nuova richiesta nel nuovo esame. Se si lavora su un esame ancora non salvato, la richiesta verrà associata a questo esame. Ora compilare normalmente i campi per l'inserimento dei valori richiesti. Dopo una nuova acquisizione o l'importazione di tutte le immagini dal backup, salvare gli esami completi con il pulsante in alto a destra.

### 16.4.9 Registro radiografico

Se il modulo di registro radiografico è stato lanciato sulla stazione su cui vengono caricate le immagini nuove, dopo il salvataggio dell'esame le nuove voci vengono inserite nel registro radiografico. La creazione delle voci nel registro radiografico avviene automaticamente. Nel campo di visualizzazione della richiesta è presente l'interruttore "Valori del registro radiografico". Cliccando questo pulsante vengono visualizzati i campi di input aggiuntivi. Qui è possibile completare i valori che si desidera inserire nel registro insieme ad una determinata immagine. Se manca la voce obbligatoria richiesta, prima del salvataggio dell'esame verrà visualizzato un messaggio di avviso e l'esame non potrà essere completato. Completare le voci mancanti e quindi fare nuovamente clic su "Salva esame".

L'amministratore di sistema deve prima impostare quali valori saranno inviati al registro radiografico durante l'acquisizione dell'immagine, ossia quali sono obbligatori, e quali facoltativi.

#### 16.4.10 Risoluzione dei problemi

##### **Cosa fare quando le cassette sono state mischiate e l'ordine delle immagini non corrisponde?**

Le richieste prima del loro salvataggio possono essere ordinate in qualsiasi ordine, ed in tale ordine verranno salvate. Anche la descrizione dell'immagine e di tutti i valori della foto può essere modificata manualmente. Pertanto prestare attenzione a modificare correttamente le descrizioni, i valori e l'ordine, prima del salvataggio dell'esame.

##### **Come procedere quando un paziente errato è ancora attivo?**

Se le nuove immagini sono state attribuite al paziente sbagliato, è possibile prima eliminarle. Per fare questo scartare le singole immagini ed eliminare le richieste. Quindi aprire il paziente corretto ed importare nuovamente, con il pulsante "importa backup...", una delle ultime immagini. A tale fine vedere 16.4.6Rifiuto delle immagini e 16.4.8Backup.

Se le immagini sono già state salvate, è possibile importarle dal backup e salvarle nuovamente per il paziente corretto. Tuttavia le immagini salvate impropriamente per il primo paziente devono essere rimosse dall'archivio immagini dal supervisore o dall'amministratore del sistema, o utilizzando la funzione di eliminazione (vedi capitolo 8.9).

##### **Come procedere nella situazione in cui i dati del dispositivo sono già stati inviati, prima che venisse aperto il paziente?**

Anche i dati dei dispositivi vengono protetti in forma di backup. In primo luogo selezionare il paziente ed importare i dati del dispositivo dal backup. Quindi caricare come al solito i dati dell'immagine e salvarli.

##### **Come procedere nella situazione in cui si tenta di modificare il paziente o chiudere il programma, anche se ancora non tutte le immagini del paziente attivo sono state salvate?**

Compare un messaggio il quale riporta che è necessario salvare o eliminare tutte le immagini del paziente attivo. Il paziente non può essere modificato, o il programma terminato, finché ci sono immagini non protette.

##### **Come procedere in caso di errore del sistema durante l'acquisizione delle immagini?**

È necessario riavviare l'applicazione. Se non si è sicuri se la procedura per salvare le immagini è stata completata correttamente, è necessario scegliere il paziente nella gestione pazienti e controllare le immagini di quest'ultimo.

Per riprodurre le immagini non ancora salvate è necessario innanzitutto aprire l'elenco di backup e verificare che l'immagine/i siano presenti in forma di backup. Se sono presenti, importare la copia di backup per il paziente appropriato già selezionato, ed effettuare nuovamente il salvataggio delle immagini. Se il backup non esiste, dopo aver premuto il pulsante di acquisizione immagine verrà visualizzata una finestra di dialogo che permetterà di scaricare nuovamente queste immagini. Successivamente verranno importate le eventuali immagini esistenti e potranno essere salvate normalmente. Se non viene importato nessun dato delle immagini, utilizzare il manuale di istruzioni del dispositivo per ripristinare i dati delle immagini e se necessario contattare il supervisore (servizio tecnico) del sistema.

## 16.5 Frame grabber / acquisizione di serie di immagini

### 16.5.1 Nota generale

Il modulo "Frame grabber" consente di acquisire immagini singole o loro serie complete da una sorgente esterna, utilizzando un convertitore video e trasmettendole all'archivio immagini. La condizione per l'installazione del frame grabber è il possesso, da parte della sorgente immagini, di connettori video tipo Composite o S-Video, cui sia possibile collegare il convertitore video. Il convertitore trasforma i dati delle immagini e li trasmette al computer. Possono essere utilizzati solo dispositivi del produttore "The Imaging Source" che supportino la tecnologia DirectShow o siano dotati di driver WDM. L'amministratore di sistema fornirà informazioni sui dettagli tecnici ed aiuterà a scegliere i dispositivi più adatti.

Esistono dispositivi che devono essere costantemente integrati nel computer ed altri che possono essere collegati tramite una porta di comunicazione esterna USB. La gestione può avvenire tramite tastiera, mouse o un interruttore a pedale esterno. Possono essere utilizzati interruttori a pedale con connettore USB o connettore seriale (porta COM). In caso di utilizzo di interruttori a pedale con connettore USB, si consiglia l'uso di interruttori con due pedali programmabili. Ad un pedale verrà assegnato il tasto "F5" ed all'altro il tasto "F9" della tastiera del computer, tuttavia è possibile scegliere liberamente a quale pedale, destro o sinistro, verranno assegnati i tasti. La programmazione di norma avviene con l'aiuto del software allegato all'interruttore.

Condizione per l'uso di interruttori a pedale con connettore seriale è la presenza di tale porta che ne consenta la connessione al computer. Attualmente molti computer **sono privi** di tale porta e sarà necessario aggiungerla.

Per il collegamento e l'installazione del dispositivo fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore. L'installazione dovrebbe essere eseguita rigorosamente da un professionista.

Il modulo "Acquisizione serie di immagini" consente di creare dati di immagini da un sistema esterno e trasmetterli al digipaX per l'ulteriore elaborazione. Il programma riceve in tal caso i dati e li elabora ulteriormente.

### 16.5.2 Requisiti di sistema per l'installazione del processore video frame grabber

Per l'elaborazione di sequenze di immagini con una velocità di diverse immagini al secondo è richiesto un computer con prestazioni adeguate. La seguente tabella presenta i requisiti minimi che devono essere soddisfatti dal computer per poter supportare frame grabber insieme con il digipaX.

<b>Processore</b>	Dual Core o Quad Core da 2,5 GHz o superiore
<b>RAM</b>	2 GB di RAM o superiore
<b>Sistema operativo</b>	Windows XP Prof. (32/64 bit) o Windows 7 Prof. (32/64bit)
<b>Software</b>	DirectX 9c o superiore
<b>Scheda grafica</b>	da 128 MB DVI (Dual), min. 1280 x 1024
<b>Disco rigido</b>	capacità min. 60 GB

<b>Rete</b>	1000BaseT (Gigabit Ethernet)
<b>Collegamenti hardware</b>	porta USB 2.0 libera per dispositivi esterni o porta plug-in (PCI o PCIe) per dispositivi integrati nel computer e porta USB supplementare in caso di utilizzo di un interruttore con connettore USB. porta COM in caso di utilizzo di un interruttore a pedale con connettore seriale


### 16.5.3 Configurazione di frame grabber nel digipaX

Il modulo "Frame grabber" per poter essere utilizzato nel sistema digipaX deve essere concesso in licenza ed essere in esecuzione. Anche l'installazione e la configurazione nel sistema digipaX deve essere effettuate da un professionista. Se il modulo è acceso, nel browser delle immagini comparirà un nuovo toolbox per la configurazione del controllo del dispositivo.

Con gli interruttori "Sorgente video" e "Configurazione" avviene la selezione e la configurazione del dispositivo collegato. I componenti di configurazione e gestione diventano attivi solo quando è stato aperto UN SOLO paziente. Se sono stati aperti più pazienti, i componenti diventano inattivi. In questo modo i dati dell'immagine non possono essere assegnati a pazienti sbagliati.

#### 16.5.3.1 Sorgente video

- **Nome del dispositivo:** se la periferica video è stata installata correttamente appare nella lista "Nome dispositivo". Se questo elenco è vuoto il dispositivo è stato installato in modo errato o non è conforme ai requisiti di cui sopra. Se nell'elenco sono presenti diversi dispositivi è necessario scegliere uno di essi.
- **Numero di serie:** indica il numero seriale del dispositivo selezionato.
- **Proprietà:** apre una finestra di dialogo per diverse impostazioni del dispositivo. Per ulteriori informazioni vedere la documentazione del produttore.
- **Standard video:** imposta lo standard video. Lo standard dipende dalla sorgente video o dalla fonte delle immagini. In Europa solitamente viene utilizzato lo standard PAL.
- **Formato video:** si raccomanda di utilizzare la risoluzione immagine più alta, in concomitanza con la migliore profondità di colore disponibile per il dispositivo.
- **Prestazioni del trasduttore:** specifica il numero di immagini al secondo fornite dalla sorgente video. Ad una velocità di 25 immagini al secondo, ogni 40 millisecondi una nuova immagine viene trasmessa dalla sorgente video.
- **Canale di input:** connettore video al convertitore video cui collegata la sorgente video.

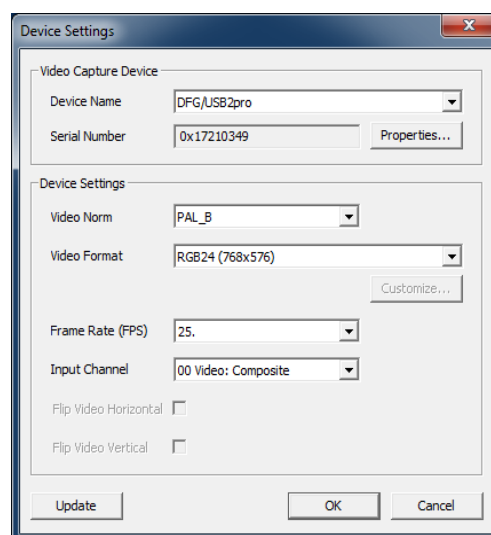

Per tutte queste impostazioni generalmente non esistono valori vincolanti. Questi dipendono sempre dall'hardware utilizzato e possono variare. Per ulteriori informazioni consultare la



documentazione fornita dai produttori dell'hardware, del convertitore video, della sorgente immagini o della sorgente video.

### 16.5.3.2 Configurazione

Qui viene aperta una finestra di dialogo simile per diverse impostazioni supplementari come per "Sorgente video/proprietà". Con la differenza che nella finestra di dialogo in questo punto è possibile aprire e configurare impostazioni anche con la trasmissione immagini attiva.


### 16.5.4 Componenti di gestione del processore video frame grabber

Per la gestione è possibile utilizzare il mouse o la tastiera. Inoltre esiste la possibilità di collegare al computer un interruttore a pedale esterno. Grazie a questo dispositivo è possibile operare con i piedi per la sorgente video, in modo da avere le mani libere. I pulsanti "F5" (eseguire immagine dal vivo) ed "F9" (libera tendina/otturatore) possono essere liberamente assegnati all'interruttore a pedale, in modo da rendere più confortevole il lavoro della persona che utilizza il dispositivo.

- **attiva immagine dal vivo:** mostra l'immagine con la diretta dal vivo attiva nel browser.
- **adatta alle dimensioni della finestra:** ingrandisce o riduce l'immagine alle dimensioni della finestra.
- **Start (F5):** inizia la trasmissione di immagini dal vivo. Quest'operazione può essere richiamata con un clic del mouse, una pressione del tasto "F5" sulla tastiera o del pedale corrispondente dell'interruttore a pedale. Un'ulteriore pressione arresta la trasmissione.

**Va notato che le immagini acquisite o le serie possono essere elaborate solo dopo che la trasmissione dal vivo è stata interrotta.**

- **Istantanea (F9) per l'impostazione di immagini singole:** facendo clic con il mouse, premendo il pulsante "F9" o il corrispondente pedale dell'interruttore a pedale viene effettuata un'istantanea della trasmissione video corrente.
- **Acquisizione (F9) per l'impostazione di serie di immagini:** facendo clic con il mouse, premendo il pulsante "F9" o il corrispondente pedale dell'interruttore a pedale viene acquisita una sequenza di immagini per un determinato periodo di tempo. Per ulteriori informazioni in merito vedi il punto "Serie di immagini".
- **immagini singole:** commutare l'interruttore di acquisizione su istantanea. Vengono acquisite soltanto immagini singole.
- **serie di immagini:**
  - intervallo: – specifica ogni quanti millisecondi deve venire acquisita l'immagine. Si noti che il numero massimo di immagini al secondo dipende sia dal trasduttore frame grabber installato, che dalle prestazioni del computer.
  - Durata: – l'acquisizione viene chiusa automaticamente al termine della durata impostata. Il lancio dell'acquisizione con un clic del mouse o con la pressione del tasto "F9" o del corrispondente pedale dell'interruttore a pedale.

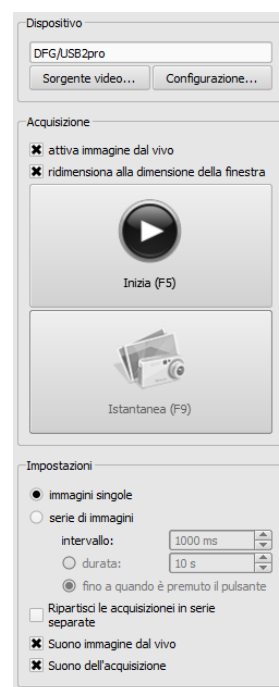




- fino a quando è premuto il pulsante: – l'acquisizione viene attivata con un clic del mouse, con la pressione del tasto "F9" o del corrispondente pedale dell'interruttore a pedale e rimane attiva finché il tasto è premuto.
- **suddividi acquisizioni in serie distinte:**
  - per l'opzione immagini singole, ciascun'immagine viene salvata in una serie separata e può essere descritta singolarmente
  - per l'opzione serie di immagini, ad ogni pressione del tasto viene iniziata una nuova acquisizione in una nuova serie
- **suono immagine dal vivo:** riproduzione del suono durante la presentazione dell'immagine dal vivo per il controllo acustico.
- **suono dell'acquisizione:** riproduzione del suono durante ogni acquisizione anche a fini del controllo acustico.

Per la riproduzione di suoni di segnalazione, il computer o il monitor deve essere equipaggiato con altoparlanti, e questi devono essere regolati correttamente. In caso di domande rivolgersi all'amministratore del sistema.

### 16.5.5 Acquisizione tramite il processore video frame grabber

Se la gestione richieste è attiva viene visualizzata anche una scheda per la pianificazione e la gestione delle richieste. Per scaricare una serie di immagini eseguire la trasmissione dal vivo facendo clic sull'icona appropriata nella richiesta, o contrassegnare la richiesta con colore blu e premere il pulsante "Start" nel toolbox degli strumenti sul lato destro o premere il tasto "F5", o l'interruttore a pedale (se utilizzato).

Le singole immagini ottenute o le sequenze di immagini appaiono come candidati nell'anteprima sottostante, ed il numero di immagini singole viene visualizzato nella richiesta. Appena viene arrestata la trasmissione dal vivo, le immagini scaricate possono essere elaborate ulteriormente.

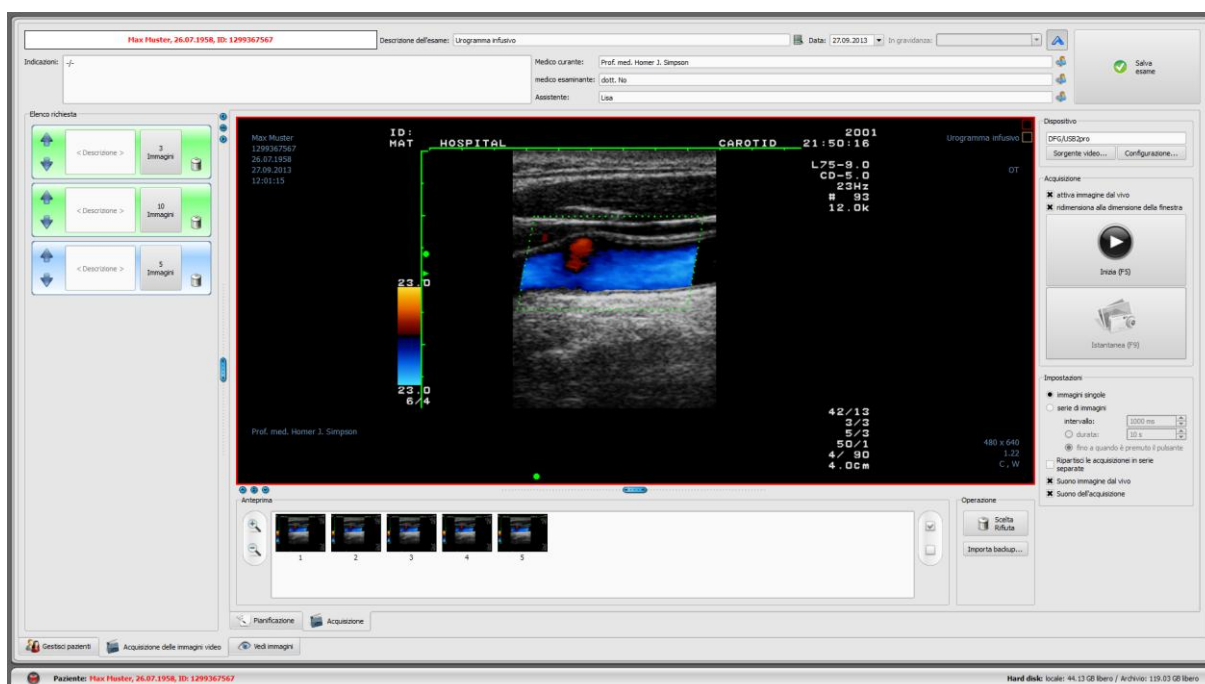

Dopo l'attivazione delle singole immagini, con ogni istantanea viene acquisita una nuova immagine e vengono aggiunti alla lista potenziali candidati per la richiesta attiva. Ad ogni

nuovo avvio della trasmissione dal vivo di immagini il sistema passa alla richiesta successiva. In questo modo è possibile elaborare un ordine dopo l'altro. Se prima non è stata creata nessuna richiesta, queste saranno create automaticamente con il lancio della trasmissione immagini dal vivo.


Anche per l'impostazione "Serie di immagini" tutte le immagini acquisite sono inserite in una serie, e la serie viene chiusa nel momento del completamento della trasmissione di immagini dal vivo.

L'ulteriore elaborazione dei dati ed il salvataggio nell'archivio sono descritti nella sezione 16.5.7 Elaborazione e salvataggio delle immagini ottenute.

### 16.5.6 Acquisizione tramite il modulo di acquisizione immagini

Le immagini vengono acquisite dal sistema esterno e trasmesse al computer, ed il programma riceve questi dati. Non appena viene trasmessa la prima immagine, il digipaX attende per il tempo di attesa impostato dall'amministratore di sistema. Se durante questo periodo di tempo non giungono altre immagini, le immagini ottenute vengono automaticamente aggiunte alla lista dei candidati della richiesta attiva, ed inviate in una nuova serie. Se si vuole scaricare intenzionalmente più serie per un paziente è consigliabile scaricare, nel limite del possibile, le immagini in una serie in un sistema esterno, e quindi trasmettere la serie chiusa al digipaX ed attendere fino all'importazione della serie da parte del digipaX. Successivamente è possibile continuare la procedura con una serie successiva, senza dover salvare anticipatamente la serie trasmessa. Alla fine è possibile elaborare adeguatamente le immagini adatto e salvarle nell'archivio.

### 16.5.7 Elaborazione e salvataggio delle immagini ottenute

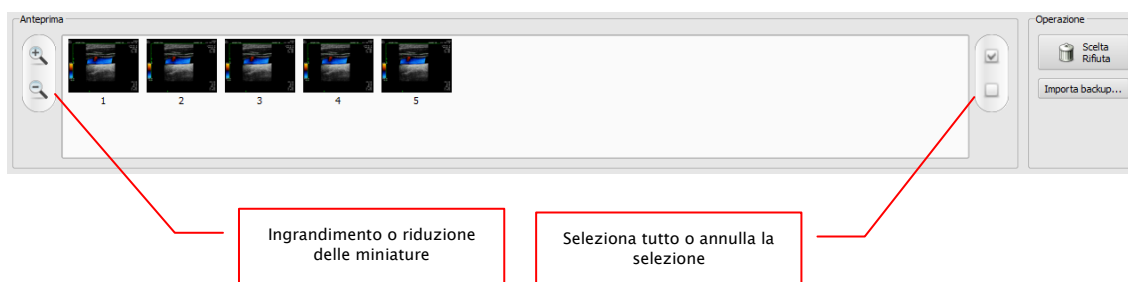

Cliccando su una serie nell'elenco richieste, nell'anteprima vengono visualizzate le immagini candidate. Per una migliore visualizzazione è possibile ingrandire o ridurre le miniature. Facendo doppio clic sulla miniatura l'immagine viene visualizzata in grande formato nel browser. Prima di salvare si può verificare le immagini ed eliminare quelle che non si desidera salvare. Facendo clic sulla miniatura, la miniatura viene evidenziata in blu, quindi fare clic sul "Rifiuta selezione". Cliccando su "Deseleziona" verranno deselezionate tutte le immagini selezionate. Se si desidera scartare l'intera serie, basta cliccare su "Seleziona tutte" e poi su "Scarta selezione", o cliccare direttamente sull'icona del cestino presente nella richiesta, e quindi selezionare "Rimuovi solo immagini".

Quando l'elaborazione di tutte le serie è pronta, inserire i dati richiesti nei campi appropriati e cliccare su "Salva esame" per inviare la serie nell'archivio.

### 16.5.8 Importazione del backup.

Per ciascuna trasmissione di immagini dal vivo o serie di immagini vengono creati dei backup delle istantanee o delle sequenze di immagini ottenute. Se necessario è possibile aprirle dal backup. A tal fine in primo luogo attivare il paziente cui devono essere assegnate le immagini. Cliccare su "Importa backup...". La finestra di dialogo mostra le miniature con data, ora di acquisizione ed il numero di immagini. Selezionare l'acquisizione che si desidera importare, e confermare con il pulsante "Ok". Le istantanee o la sequenza d'immagini verranno nuovamente importate ed assegnate ad una nuova richiesta. In alternativa è possibile assegnare un backup ad una richiesta esistente, evidenziando prima la richiesta di blu ed importando il backup.

### 16.5.9 Risoluzione dei problemi

#### **Come procedere quando un paziente errato è ancora attivo?**

Se le nuove immagini sono state assegnate al paziente sbagliato, è possibile prima eliminarle (rifiutare). Quindi aprire il paziente corretto e tramite il pulsante "Importar backup..." importare nuovamente una delle ultime acquisizioni. Ulteriori informazioni nei capitoli 16.5.7 Elaborazione e salvataggio delle immagini ottenute e 16.5.8 Importazione del backup..

Se le immagini sono già state salvate, è possibile importarle dal backup e salvarle nuovamente per il paziente appropriato. Le immagini erroneamente assegnate al primo paziente devono essere immediatamente rimosse dall'archivio dal supervisore o dall'amministratore di sistema, o utilizzando la funzione di eliminazione (vedi capitolo 8.9).

#### **Come procedere nel caso in cui i dati del dispositivo vengono inviati prima che sia stato aperto il paziente?**

Questo può accadere solo quando viene utilizzato il modulo di acquisizione serie di immagini.

Se il paziente non è aperto le immagini rimangono nella cartella di trasmissione impostata. Appena il paziente viene aperto, questi dati saranno importati ed assegnati al paziente. Dopo si può normalmente continuare a salvare le immagini.

#### **Cosa succede quando si tenta di modificare il paziente o chiudere il programma prima che tutte le immagini del paziente attivo sono state salvate?**

Compare un messaggio il quale riporta che è necessario salvare o eliminare tutte le immagini del paziente attivo. Il paziente non può essere modificato, né il programma terminato finché vi sono immagini non protette.


#### **Come procedere in caso di errore del sistema durante l'acquisizione?**

Riavviare l'applicazione. Se non si è sicuri o se il salvataggio iniziato è stato completato con successo, attivare il paziente nella gestione pazienti e controllare le immagini del paziente.

Nel caso del modulo di acquisizione serie di immagini, tutte le immagini non ancora totalmente importate vengono caricate automaticamente per il paziente ed è possibile continuare normalmente la procedura di salvataggio. Se ciò non accade o si lavora con il modulo frame grabber, sarà necessario importare le immagini dal backup. Per fare questo aprire l'elenco

dei backup ed importare una copia del backup del paziente correttamente selezionato ed effettuare nuovamente il salvataggio delle immagini.

## 17 Configurazione

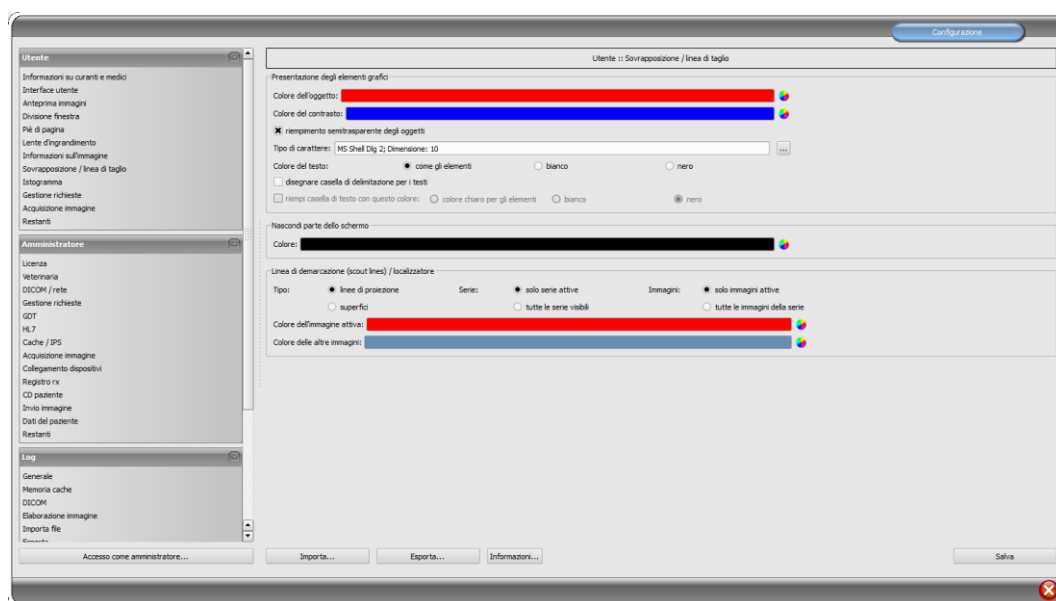

E' presente una scheda centrale per la configurazione del programma. Le configurazioni, così come una varietà di record del log sono divise nella finestra di dialogo in gruppi, rispettivamente per Utente, Amministratore e Log. Le configurazioni nel gruppo amministratore possono essere modificate solo se si dispone dei diritti di amministratore. L'amministratore ad ogni avvio di questo componente deve accedere attraverso la funzione di "Accedi come amministratore...". L'utente che ha effettuato l'accesso come amministratore può, utilizzando la funzione di "Importa..." ed "Esporta...", scaricare la configurazione completa o parti di essa, in forma di file INI o salvare queste ultime in un file simile.

Il pulsante "Info..." viene utilizzato per visualizzare le informazioni sul prodotto.

L'utente può effettuare le seguenti impostazioni nella configurazione:

- **Informazioni sulla clinica e sui medici**

*Istituzione:* nome della clinica veterinaria, clinica ecc.


*Indirizzo:* sede della clinica

*Cognome del medico:* cognome del medico che utilizza una determinata stazione

*Numero del medico / numero identificativo del stabilimento:* numero di identificazione del medico nel caso di cliniche in cui lavorano più medici o numero identificativo dello stabilimento (questo campo può essere lasciato vuoto)

- **Interfaccia utente**

*Monitor:* impostazione e disposizione dei monitor. Se sono stati avviati più monitor, i singoli componenti per le singole impostazioni possono essere visualizzati su tutti o solo su alcuni monitor – istogramma ed EasyReport possono essere disattivati su tutti i monitor – la scheda gestione pazienti può essere visualizzata solo su un monitor, è inoltre possibile personalizzare la distribuzione dei monitor

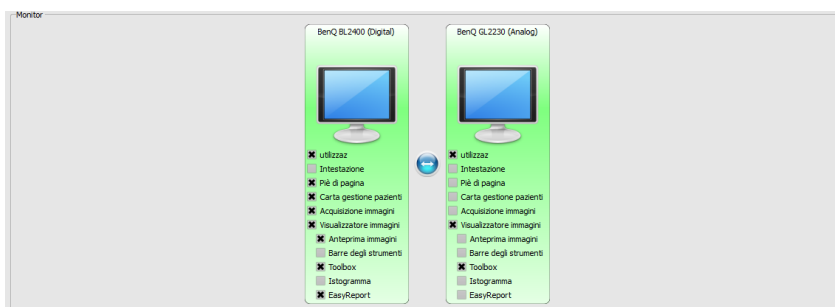

Il modulo di configurazione monitor multipli è coperto da una licenza aggiuntiva e richiede un avvio separato, dopo l'esecuzione il numero di monitor utilizzati dipende dall'hardware installato, senza licenza digipaX può essere visualizzato solo su uno dei monitor disponibili

*Design:* varietà di possibilità di presentazione

*Posizione della barra degli strumenti:* nel caso di schermi verticali se ne raccomanda il posizionamento sulla sinistra, questo avviene automaticamente o è possibile impostarlo (la visualizzazione delle barra degli strumenti deve essere eseguita su ciascun monitor)

*Altezza del toolbox degli strumenti (Windows):* nel caso di schermi verticali si consiglia un toolbox corto, ed una barra di lavoro più larga in basso (istogramma) – questo avviene automaticamente o è possibile impostarlo qui

*Carattere:* impostazione del tipo e della dimensione del carattere per le descrizioni di pulsanti, finestre, tabelle, consigli, informazioni, ecc. del programma

*Dimensione dei simboli:* impostazione della dimensione dei simboli sui pulsanti del programma

#### ▪ **Anteprima immagini**

*Visualizzazione a forma di albero:* scelta dei tag, secondo cui si desidera ordinare l'elenco delle immagini, la direzione dell'ordinamento e la definizione della visualizzazione del testo nei nodi delle immagini (medesimo principio come nel caso delle informazioni sulle immagini)

Per l'ordinamento o la visualizzazione è possibile utilizzare i seguenti tag:

0x0008, 0x0016	SOPClassUID
0x0008, 0x0018	SOPInstanceUID
0x0020, 0x0013	InstanceNumber
0x0008, 0x0023	ContentDate
0x0008, 0x0033	ContentTime
0x0028, 0x0008	NumberOfFrames
0x0008, 0x0022	AcquisitionDate
0x0008, 0x0032	AcquisitionTime
0x0028, 0x0002	SamplesPerPixel
0x0028, 0x0010	Rows
0x0028, 0x0011	Columns
0x0028, 0x0101	BitsStored
0x0008, 0x0008	ImageType
0x0054, 0x0400	ImageID

*Modalità di espansione:* Espandi gli ultimi esami: vengono espanse solo le immagini degli

esami più recenti; Espandi tutto: dopo la selezione del paziente tutti i nodi degli esami e le serie di immagini nella struttura ad albero vengono espansi e quindi vengono visualizzate in anteprima tutte le sue immagini; Riduci tutto: tutti i nodi degli esami sono ridotti e pertanto non vengono visualizzate le miniature – qui è possibile selezionare gli esami e le serie di immagini che saranno esaminate; Automaticamente: senza acquisizione immagini attiva l'ultimo esame viene espanso e vengono visualizzate tutte le miniature, con l'acquisizione immagini attiva i nodi degli esami sono espansi e solo gli esami recenti vengono espansi

Prima nuovi esami: ordinamento delle miniature di anteprima in modo tale che l'esame più recente venga visualizzato in alto; Primo esami più vecchi: ordinamento delle miniature di anteprima in modo tale che gli esami meno recenti sono visualizzati in alto

*Modalità di visualizzazione della serie di immagini:* in alternativa è possibile visualizzare tutte le immagini della serie sotto forma di albero di anteprima o di sola immagine (possibilità di impostare separatamente per ogni tipo di immagine) – selezionare prima sul lato sinistro la modalità appropriata, ad es. CT, e quindi sul lato destro, quale impostazione deve essere utilizzata per questo tipo di immagine (tutte le immagini o solo la prima, quella centrale e l'ultima immagine della serie)

*Altro:* lo scaricamento della struttura dell'esame consente, all'avvio del paziente in sottofondo, di ricercare i nodi (esami, serie ed immagini), quindi il sistema è più veloce (quando quest' opzione è disabilitata, verrà effettuata prima la ricerca completa di tutte le informazioni DICOM, prima di visualizzare la miniatura nell'anteprima)

- **Divisione finestra**

*Avvio:* all'apertura del paziente le serie dell'ultimo esame vengono automaticamente visualizzate nel browser immagini: la divisione standard della finestra è automatica ed ogni serie viene "sospesa" in una finestra separata; facendo doppio clic sul nodo dell'esame verrà sospesa anche la serie di questo esame, e la divisione della finestra verrà adattata automaticamente

*Monitor:* usando il modulo multi monitor viene qua definito per quale monitor deve essere eseguita l'opzione di sospensione automatica delle immagini

*Seleziona modalità:* per ciascuna modalità è possibile selezionare le singole impostazioni

*Divisione finestra:* automaticamente, questo significa che la divisione avviene automaticamente secondo il numero di serie visualizzate, altrimenti il browser immagini è sempre diviso in righe e colonne definite, in cui sono visualizzate le immagini della serie

- **Piè di pagina**

*Controllo:* selezionando la casella è possibile attivare o disattivare il controllo del disco; per il disco scegliere qualsiasi directory sul disco controllato (può essere anche un percorso di rete); il testo viene visualizzato nel piè di pagina può essere preceduto dal prefisso; se lo spazio disponibile sul disco scende sotto il valore critico, una volta per ogni sessione viene visualizzato un messaggio di avviso quando la capacità di archiviazione del disco cade al doppio del valore critico, il valore è evidenziato in rosso, altrimenti in nero

*Cicli di aggiornamento:* ciclo secondi, in cui deve essere aggiornato il controllo dello spazio di memoria disponibile

## ▪ Lente d'ingrandimento

*Rettangolo:* utilizzo della lente d'ingrandimento rettangolare nel browser con la dimensione in pixel specificata o con dimensione automatica

*Cerchio:* uso della lente di ingrandimento circolare nel browser con diametro specificato o scelto automaticamente

*Dimensione automatica:* larghezza ed altezza del rettangolo o il diametro del cerchio sono impostate ad un terzo della larghezza della finestra corrente o dell'altezza della finestra immagine, a seconda di quale valore è inferiore

*Fattore di ingrandimento:* il fattore di ingrandimento corrisponde al frammento dell'immagine presentata nella lente d'ingrandimento (si riferisce all'immagine originale)

## ▪ Informazioni sull'immagine


*Colore testo:* colore nel quale verranno visualizzate le informazioni negli angoli dell'immagine

*Tipo di carattere:* tipo di carattere per il testo dell'informazione

*Fattore di ingrandimento:* utilizzato per adattare la dimensione del carattere (la dimensione del carattere si adatta automaticamente alle dimensioni della finestra)

*Ombreggiatura:* poiché il testo sulle immagini su sfondo bianco può essere difficilmente leggibile, con quest' opzione è possibile applicare un'ombra, nel caso di immagini nere o scure è quasi invisibile,

*Gruppo di elementi:* per ogni tipo di immagine (modalità) è possibile determinare quali informazioni verranno visualizzate negli angoli della sovrapposizione dell'immagine. È necessario innanzitutto selezionare il tipo desiderato e poi selezionare l'opzione "Utilizza queste impostazioni" se vengono utilizzate le impostazioni predefinite. Selezionare la casella desiderata per specificare l'angolo dell'immagine e quindi fare clic su "Nuova voce nel campo attivo" per aggiungere un elemento a questo campo. Nella linea di didascalia è possibile digitare qualsiasi testo, che successivamente verrà mostrato nelle immagini. È necessario utilizzare % 1, %2 e % 3 come "variabili" (metacaratteri). Questi verranno sostituiti sul display con determinati tag DICOM. In caso di necessità è possibile definire anche la visualizzazione di solo una parte del tag, ad es. parte del cognome del paziente o il valore in un determinato luogo per i tag, che consentono più valori (moltiplicazione). Facendo doppio clic sulla voce nei campi dell'elenco o con il pulsante "Modifica voce attiva" è possibile modificare la voce. Utilizzare il pulsante "Elimina voce attiva" per rimuoverla dall'elenco. Per spostare o copiare le voci all'interno di un campo dell'elenco o tra i campi dell'elenco è possibile spostarle tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse (funzione trascina e rilascia). Tenere premuto il tasto Maiusc per spostare la voce. Senza Maiusc questo verrà copiato.

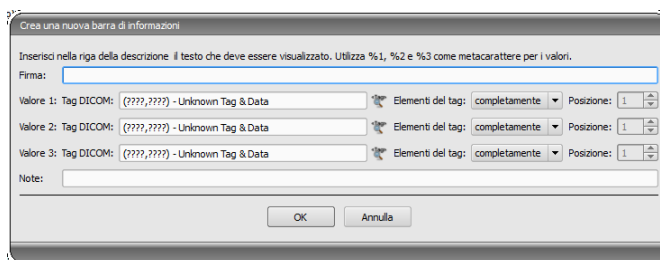

## ▪ Overlay / linee di taglio

Presentazione di elementi grafici:

*Colore dell'oggetto:* Colore degli oggetti grafici



*Colore del marker:* colore dei marker (punti angolari e terminali, punti intermedi, ecc.) per la modifica degli oggetti

*Riempimento semitrasparente degli elementi:* quando quest' opzione è attiva disegnando gli oggetti riempiti, questi vengono disegnati sull'immagine con un riempimento traslucido, in modo da poter riconoscere l'immagine dietro di loro, altrimenti gli oggetti avranno il riempimento nel colore scelto sopra

*Tipo carattere:* tipo di carattere utilizzato per gli elementi di testo

*Colore del testo:* nel colore prescelto, bianco o nero

*Disegna cornice rettangolare per i testi:* quando quest' opzione è attiva i testi saranno circondati da una cornice rettangolare nel colore scelto sopra per gli oggetti grafici; in modo tale che in determinate circostanze siano più facilmente leggibili

*Riempi con questo colore il rettangolo per il testo:* quando quest' opzione è attiva, il rettangolo che circonda gli oggetti di testo verrà riempito con il colore specificato (la trasparenza sopra selezionata viene applicata anche in questo caso), in caso contrario il rettangolo non verrà riempito e l'immagine sarà visibile; per il riempimento è possibile utilizzare lo stesso colore usato per gli oggetti (schiarito), bianco o nero

Oscuramento parziale dello schermo:

*Colore:* colore con cui si oscurerà parte dello schermo

Linee di taglio (scout lines):

*Tipo:* "linee di proiezione" – con quest' opzione vengono presentati solo tagli semplici alle immagini o le proiezioni dei bordi; "piano" – quest' opzione consente di visualizzare le immagini come piano di taglio 3D

*Serie:* "solo serie attive" – con quest' opzione vengono visualizzate solo le linee di proiezione o i piani delle serie attive; "tutte le serie visibili" – con quest' opzione vengono visualizzate le linee di proiezione o i piani di tutte le serie visibili – **Indicazione:** quest' opzione funziona solo quando è attiva l'opzione "tutte le immagini della serie".

*Immagini:* "solo serie attive" – con quest' opzione è visualizzata solo la linea di proiezione o il piano dell'immagine attiva; "tutte le immagini della serie" – con quest' opzione vengono visualizzate le linee di proiezione o i piani della serie

*Colore:* colore in cui verrà visualizzata l'immagine attiva ed il colore in cui saranno visualizzate le altre immagini

## ▪ Istogramma

*Ridimensiona a destra e a sinistra:* grazie a queste opzioni sulle estremità destra e sinistra dell'istogramma i valori sono impostati al valore massimo tra questi ultimi, in modo da poter visualizzare correttamente l'intero istogramma nella finestra. Se devono essere tagliate anche aree rilevanti, o i valori presentati tra questi limiti sono ancora troppo ridotti, si deve ridurre o aumentare appropriatamente le dimensioni indicate.

*Equalizza istogramma per visualizzazione:* equalizzazione dell'istogramma per la visualizzazione con un numero specificato di singole equalizzazioni. Le immagini non sono equalizzate. Quest'opzione serve solo per una migliore presentazione dell'istogramma.

*Valori:* vengono visualizzati sull'asse X solo quei valori che sono effettivamente utilizzati nell'immagine, o tutti i valori che potrebbero comparire sulla base della profondità di colore dell'immagine

- **Gestione richieste**

*Campo di gestione richieste:* selezione di tutti i campi che verranno utilizzati nel lavoro con le richieste. È necessario disattivare i campi che saranno inutilizzati.

*Utilizza selezione con colore dei campi:* quando quest' opzione è attiva i campi di dati in diversi ambiti di applicazione sono contrassegnati con colori diversi a seconda della loro importanza. Se quest' opzione non è attiva la selezione con colori non verrà applicata (i campi saranno bianchi).

- **Acquisizione immagini**

*Rimozione richieste dall'elenco di lavoro:* elimina gli ordini con conferma dell'utente o automatica dopo il salvataggio dell'immagine/serie di immagini o non rimozione di richieste

*Messaggio di stato salvataggio:* impostazione della durata di visualizzazione del messaggio (in secondi) o digitare 0, se il messaggio non deve essere visualizzato (il messaggio di stato visualizza informazioni sulle operazioni eseguite per l'immagine appena salvata)

*Backup:* numero di backup creati (quando il numero viene superato, il backup più vecchio viene eliminato)

*Selezione:* attivazione delle selezioni; selezione dei tipi di immagini per le lettere virtuali di piombo; selezione del tipo di carattere per qualsiasi testo

*Trasformazioni automatiche dell'immagine:* ogni immagine appena ottenuta è automaticamente sottoposta a trasformazioni

*Tasto di acquisizione immagine:* qui è possibile impostare una descrizione diversa ed un altro simbolo per il pulsante di acquisizione immagini radiografiche

- **Altro**

*Dati archiviati:* dopo l'apertura del programma questa impostazione viene utilizzata per l'avvio (inizializzazione) dell'elenco pazienti o per l'aggiornamento richiesto

*Funzione mouse: gestione finestra:* contemporaneamente all'istogramma sotto o in alternativa per mantenere l'abitudine ad un altro sistema

*Filtro MagicSharp:* per il filtro Magic Sharp si può limitare i valori minimi e massimi (in questo modo è possibile evitare l'effetto forte delle piastrelle), usando la funzione del mouse è possibile attivare automaticamente l'aumento del contrasto con l'intensità qui impostata

*Modalità scorrimento immagini :* le immagini possono essere modificate con lo scroll del mouse o usando i pulsanti "Immagine in alto" e "Immagine verso il basso". Qui è possibile effettuare l'impostazione, anche se lo scorrimento deve avvenire all'interno di una serie di immagini. Il cambiamento di immagini può avvenire anche al di fuori dei limiti di una serie e può includere tutte le immagini dell'esame e persino andare al di là di un esame ed includere tutte le immagini del paziente, ossia estendersi a più esami

*Presentazione delle immagini dopo l'ingrandimento:* se quest' opzione non è disponibile i pixel sono ingranditi e l'equalizzazione non ha luogo (immagini in pixel, tuttavia in alcune circostanze i dettagli possono essere più visibili), quando quest' opzione è attiva le immagini molto ingrandite vengono equalizzate (immagini non sono così nitide, ma i dettagli possono in determinate circostanze essere annullati)

*Presentazione delle immagini selezionate:* aggiunta o meno di ombreggiature per le immagini selezionate (in assenza di ombreggiatura solo punto rosso in alto a destra nell'immagine)

*Informazioni / messaggi:* per alcune operazioni vengono visualizzate delle indicazioni nella finestra piccola in basso a destra – qui è possibile impostare la durata della loro visualizzazione, questi messaggi possono anche essere disattivati completamente

*Unità di misura:* quest' opzione consente di impostare se per i valori delle misurazioni devono essere utilizzate unità "mm/mm<sup>2</sup>", o "cm/cm<sup>2</sup>"


*Gestione pazienti/campo di ricerca aggiuntivo:* quando quest' opzione è attiva, nella gestione pazienti saranno disponibili due campi aggiuntivi per la ricerca in base al cognome e all'ID paziente, in cui digitando le lettere iniziali o le cifre dell'ID è possibile passare direttamente nella tabella al paziente desiderato

*Gestione pazienti/numero massimo di risultati:* impostazione del numero massimo di voci dati visualizzabili per la ricerca dell'archivio (il valore standard è di 500, un valore più alto può rallentare la ricerca dell'archivio); quando quest' opzione è disattivata vengono visualizzati tutti i risultati

Per l'accesso ai record del log selezionare nel gruppo "Log" la categoria desiderata. Quindi sul lato destro della finestra verranno visualizzati i record del log per questa categoria. Le voci nella finestra del log possono essere selezionate con il mouse o con i tasti Ctrl + A e Ctrl + C per copiarli negli appunti. Questi possono essere quindi incollati e salvati in qualsiasi editor di testo. Inoltre il file log global.log viene condotto nella directory di installazione, in cui sono registrate tutte le operazioni dell'applicazione.

## 18 Chiusura

### 18.1 Chiusura del programma

Il programma può essere terminato con il simbolo  nell'angolo superiore destro dell'interfaccia o con la X rossa nella finestra Windows per chiudere la finestra principale (a seconda della configurazione). Allo stesso tempo, se l'amministratore non ha impostato diversamente, l'applicazione verrà solo ridotta ad icona nel barra di sistema che si trova in basso sul lato destro nella barra delle applicazioni (contrassegnata con una X rossa). L'applicazione è ancora attiva in sottofondo e può essere aperta nuovamente utilizzando il menu di scelta rapida dell'icona nel vassoio di sistema. Nel menu di scelta rapida è anche possibile terminare definitivamente l'applicazione.

L'applicazione può essere lasciata tranquillamente in sottofondo, non necessita di essere completamente chiusa allo spegnimento del computer.

Se durante la chiusura della finestra principale (X rossa in alto a destra nella finestra) viene tenuto premuto uno dei tasti controllo (Maiusc, Ctrl o Alt), l'applicazione immediatamente viene completamente chiusa e non verrà ridotta nel vassoio del sistema. Questo avviene anche in caso di chiusura con i tasti Alt + F4.

### 18.2 Spegnimento dell'hardware

Per disattivare completamente il sistema è necessario scollegare i dispositivi ed il computer dalla rete elettrica. Possono essere utilizzate a questo scopo delle prese multiple scollegabili.



**Prima di spegnere il computer chiudere correttamente il sistema operativo Windows. In caso contrario il sistema può essere danneggiato e diventare inutilizzabile.**

## 19 Connettore GDT

Denominazione GDT: **GDT-D-11**

Al programmare è possibile inviare file GDT in qualsiasi momento, sia all'avvio che durante il funzionamento del programma. La trasmissione avviene nella directory di comunicazione impostata e nel formato impostato. Le impostazioni vengono effettuate dall'amministratore di sistema.

Tipo di record GDT	Operazione
6301: Invia dati principali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il paziente trasmesso nel file GDT se ancora non esiste viene creato localmente in un uno degli archivi immagini impostati</li> <li>La gestione pazienti viene aperta all'avvio del programma o quando nessun altro componente è aperto</li> </ul>
6302: Richiedi nuovo esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anche in questo caso il paziente è innanzitutto creato localmente se non esiste ancora nel sistema</li> <li>Quindi viene scelto per la lavorazione</li> <li>All'avvio del programma o quando nessun altro componente è aperto, viene: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) selezionato solo se il paziente se il modulo acquisizione immagini è attivo e l'acquisizione avviene direttamente su questa stazione o</li> <li>B) avviato il componente dell'elenco di lavorazione e la finestra di dialogo aperta per creare una nuova richiesta, quando l'acquisizione immagini non è attiva o l'applicazione è stata avviata con il parametro /w</li> <li>C) avviato il componente di importazione, quando l'acquisizione immagini ed il componente dell'elenco di lavoro non sono attivi o l'applicazione è stata avviata con il parametro /i</li> </ul> </li> </ul>
6311: Visualizza dati dell'esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anche in questo caso il paziente viene innanzitutto creato localmente se tale opzione è necessaria ed è stata scelta</li> <li>Non è stato avviato alcun componente, ma tutti gli esami disponibili per questo paziente vengono mostrati sotto forma di albero di anteprima e possono essere visualizzati immediatamente nel browser</li> <li>Viene visualizzata la prima immagine dell'esame (quando viene trasmessa la data dell'esame e viene trovato l'esame con tale data)</li> <li>Viene eseguito il componente CD paziente quando l'applicazione è stata lanciata con il parametro /pcd</li> </ul>

I dati possono anche essere inviati ad altri sistemi, ad es. quando l'esame verrà completato. Questo avviene anche attraverso i file GDT nel percorso di comunicazione impostato.

## 20 Versione veterinaria

Il sistema può essere utilizzato per scopi veterinari. L'amministratore di sistema effettua speciali impostazioni ed è possibile lavorare con gli animali in qualità di pazienti. Nella versione veterinaria come dati dei pazienti vengono importati, modificati e visualizzati i dati dell'animale e del suo proprietario.

Nel prosieguo vengono fornite spiegazioni sui componenti del programma che differiscono nella versione veterinaria. La struttura fondamentale del programma rimane invariata.

Nota: il salvataggio dei dati di animali non è previsto nello standard internazionale DICOM (su cui si basa l'architettura del sistema). Pertanto l'amministratore deve effettuare delle impostazioni speciali affinché sia possibile salvare i valori con altri tag DICOM. Di conseguenza le immagini così ottenute non sono, o sono solo in determinate condizioni, "compatibili" con altri sistemi (ad es. il nome dell'animale o la specie animale non vengono visualizzati o vengono visualizzati in modo errato in un altro sistema, o il valore appare in un altro posto in un sistema differente). Questo tuttavia non ha alcun impatto negativo sul funzionamento dei sistemi stessi.

### 20.1 Gestione dei pazienti


Nella tabella dei pazienti sono presenti le seguenti colonne: nome dell'animale, nome del proprietario, specie animale, ID paziente, data di nascita del proprietario e sorgente dati.

Per ricercare il paziente nella tabella è possibile utilizzare i seguenti campi di ricerca: nome dell'animale, cognome del paziente ed ID paziente.

Per la sorgente dati "Archivio immagini" non è possibile, come nella versione normale del programma, utilizzare il filtro per il sesso del paziente, ma solo secondo la specie animale. Digitare nel campo di input la specie animale, la stessa utilizzata per la registrazione dell'animale, e quindi premere il pulsante "Cerca" per aggiornare la tabella dei pazienti.

Durante l'introduzione o la modifica dei dati dei pazienti vengono ricercati sia i dati del proprietario, che dell'animale. Può accadere che alcuni campi non siano disponibili nel sistema. Questi campi sono stati disattivati dall'amministratore di sistema poiché non sono rilevanti e ciò semplifica il lavoro con il sistema.

Nella versione veterinaria **non** è possibile manipolare i dati durante l'invio di immagini nell'archivio immagini.

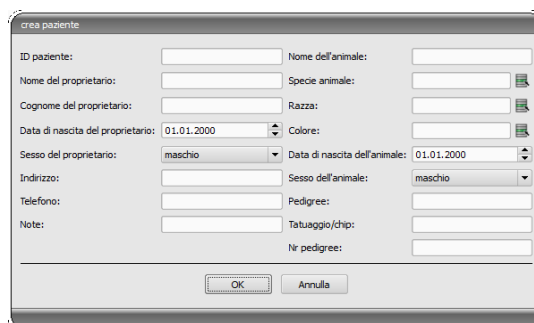

The screenshot shows a 'crea paziente' dialog box with the following fields:

- ID paziente: [text box]
- Nome del proprietario: [text box]
- Cognome del proprietario: [text box]
- Data di nascita del proprietario: [date picker (01.01.2000)]
- Sesso del proprietario: [dropdown (maschio)]
- Indirizzo: [text box]
- Telefono: [text box]
- Note: [text box]
- Nome dell'animale: [text box]
- Specie animale: [text box]
- Razza: [text box]
- Colore: [text box]
- Data di nascita dell'animale: [date picker (01.01.2000)]
- Sesso dell'animale: [dropdown (maschio)]
- Pedigree: [text box]
- Tatuaggio/chip: [text box]
- N° pedigree: [text box]

Buttons: OK, Annulla

## 20.2 Gestione richieste

Nella tabella dei pazienti in attesa vengono visualizzati nomi degli animali (cognome del proprietario), specie animali e eventualmente il numero di immagini ottenute. Il cognome del proprietario si trova tra parentesi dopo il nome dell'animale. Nei dettagli della richiesta vengono mostrati i restanti dati dell'animale.

Se non è stato impostato diversamente, la finestra di dialogo per la creazione delle richieste non visualizza l'immagine per la selezione degli organi. L'inserimento dei dati avviene interamente a mano in forma di testo.


## 20.3 Misurazioni speciali (veterinarie)

### HD (displasia dell'anca)

Misura dell'angolo di Norberg

Immagine radiografica: vista delle articolazioni dell'anca in proiezione ventro-dorsale (arti posteriori completamente estesi)

Nel corso di questa misurazione in primo luogo vengono inseriti automaticamente sull'immagine gli oggetti grafici. Questi oggetti devono essere adattati all'immagine. A tale scopo posizionare prima i cerchi sulle teste dei femori, quindi tracciare le linee fino agli angoli acetabolari dell'anca. Gli angoli vengono automaticamente aggiornati e visualizzati nei campi di misurazione.

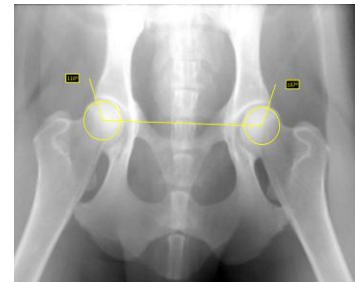


### VHS (Vertebral Heart Score)

Valutazione dimensione ombra cardiaca

Immagine radiografica: torace in proiezione laterale (immagine scattata in inspirazione)

Tracciare una linea per l'asse cardiaco longitudinale ed una seconda per la larghezza del cuore. Infine indicare il punto sul bordo della vertebra toracica (T4) ed un punto sul bordo della vertebra toracica (T9).

Le lunghezze degli assi cardiaci vengono sovrapposte sulla colonna vertebrale. I risultati delle misurazioni sono espressi in unità della colonna vertebrale (VU).

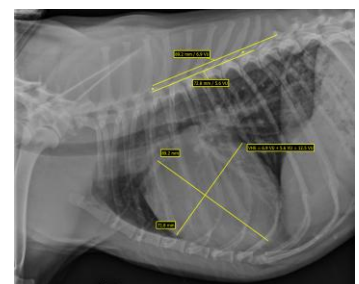

### TTA (Tibial Tuberosity Advancement)

Misurazione dell'avanzamento della tuberosità tibiale

Immagine radiografica: immagine laterale del ginocchio

Cliccando il pulsante sinistro del mouse posizionare il punto centrale del cerchio sul femore, ed il punto centrale dell'altro cerchio sulla tibia. Quindi posizionare un punto in corrispondenza dell'apice rotuleo e l'altro presso la tuberosità tibiale. Infine correggere i punti ed i cerchi designati. I cerchi devono toccarsi.



### TPA (Tibial Plateau Angle)

Misurazione dell'angolo d'inclinazione del piatto tibiale per l'esame TPLO (Tibial Plateau Leveling Osteotomy, osteotomia di livellamento del piatto tibiale)

Immagine radiografica: immagine laterale del ginocchio con caviglia

Posizionare un punto sul bordo del condile laterale e mediale dell'epifisi prossimale della tibia, quindi posizionare due punti per la linea che passa attraverso l'eminanza intercondiloidea ed il punto centrale dell'astragalo.



## 20.4 Stampa

Durante la stampa l'intestazione standard è opportunamente adattata. Viene sempre visualizzato l'ID paziente. I restanti valori sono visualizzati in funzione dei campi dati attivati nella configurazione. Pertanto se l'amministratore di sistema ha attivato il sesso dell'animale, anche questo verrà stampato sull'intestazione standard.

## 20.5 Esportazione

Durante l'esportazione è disponibile un'opzione supplementare che consente di esportare le immagini DICOM nello standard veterinario DICOM (vedi anche 10.2.2.2 Esportazione).

## 20.6 CD paziente

Se durante la creazione del CD paziente è stata selezionata l'opzione di anonimizzazione, i valori verranno resi anonimi come nella versione standard del programma (vedi 12 CD paziente) e quindi nei seguenti modi:

- cognome del proprietario: "AnonimPropr" o "AnonimPropr1", "AnonimPropr2", ecc. per un numero maggiore di pazienti
- data di nascita del proprietario: 01.01.2000
- sesso del proprietario: O (altro)
- nome dell'animale: "AnonimAnim" o "AnonimAnim1", "AnonimAnim2"



Se il browser deve essere integrato nel CD paziente, anche ad esso verranno trasmesse le impostazioni della versione veterinaria. In questo modo il browser utilizza le stesse impostazioni del sistema.

## **20.7 Altro**

Le informazioni visualizzate nei suggerimenti contengono sia i dati del proprietario, che dell'animale. Questi suggerimenti sono utilizzati nell'albero di anteprima dei pazienti selezionati (a sinistra), e per le visualizzazioni sotto forma di albero per gli esami. L'albero di anteprima mostra oltre al nome dell'animale anche il cognome del proprietario.

Anche nel piè di pagina vengono visualizzati il nome dell'animale e tra parentesi il cognome del proprietario.

## 21 Collegamento del LOCALITE OrthoPlaner

La funzione è disponibile solo se è stato eseguito il modulo appropriato.

digipaX consente il funzionamento con il software LOCALITE OrthoPlaner. Per trasferire l'immagine a LOCALITE, aprire quest'ultimo e premere il pulsante appropriato nel campo funzione, o sul lato destro nella parte superiore della barra degli strumenti (se abilitata). Questo pulsante è disponibile solo dopo l'avvio del modulo appropriato.



Una volta completa l'elaborazione è necessario inviare l'immagine in archivio e chiudere il LOCALITE. Dopo quest'operazione digipaX aggiorna i dati del paziente e la nuova immagine è disponibile.

## 22 Altro



### 22.1 Tabelle

Nel sistema è possibile personalizzare numerose tabelle. Trascinando l'intestazione della colonna è possibile scambiare tra di loro le colonne. Cliccando il tasto destro del mouse sulla voce nell'intestazione, sarà possibile visualizzare e nascondere le colonne attraverso il menu di scelta rapida che verrà aperto.

### 22.2 Suggerimenti

La maggior parte dei pulsanti, campi dati o configurazioni possiede suggerimenti. Quando si sposta il mouse senza premere sul campo, dopo un attimo appare una piccola finestra con il suggerimento al posto del cursore del mouse. I suggerimenti contengono informazioni sul campo, sull'operazione effettuata o sull'importanza nel caso di opzioni di configurazione.

### 22.3 Chiusura del programma

Il programma viene terminato premendo il pulsante Start, posto in basso a sinistra, e successivamente il pulsante "Finish" o l'icona  nell'angolo superiore destro dell'intestazione (se visualizzata) o premendo i tasti Alt + F4. Se il sistema è impostato in modo tale che alla chiusura del programma, questo venga solo ridotto ad icona nel vassoio di sistema, oltre alle operazioni elencate è necessario tenere premuto il tasto Maiusc o cliccare con il pulsante destro del mouse sul lato destro in  basso.

### 22.4 Contratto di licenza

Il software è protetto da licenza. Il sistema viene avviato dall'amministratore. L'amministratore deve ordinare il file di licenza presso il produttore e caricarlo nel sistema.

**Prodotto:** digipaX

**Produttore:** digipaX GmbH  
Bitterfelder Str. 12  
04129 Lipsia  
GERMANIA

Questo prodotto possiede marchio CE 0494

Ultima revisione del manuale: 21.01.2014