


Mausfunktionen & Tastenkürzel


Linke Maustaste:	Bild verschieben (nur wenn das Bild vorher gezoomt wurde)
Mausrad drücken und gedrückt halten:	Fensterung (links, rechts = Helligkeit hoch, runter = Kontrast)
Mausrad drehen:	nächstes bzw. vorheriges Bild der Bildserie, sofern vorhanden
rechte Maustaste:	Bild zoomen, vergrößern oder verkleinern
Alt + rechte Maustaste:	Lupe
Enter-Taste:	Umschalten in den Vollbildmodus (das aktive Bild als Vollbild)
Escape-Taste:	beendet den Vollbildmodus
Linke + rechte Maustasten gedrückt halten:	Magic Sharp Filter (links, rechts = Größe hoch, runter = Stärke)

nützliche Werkzeuge am rechten Bildschirmrand


Bildausrichtung

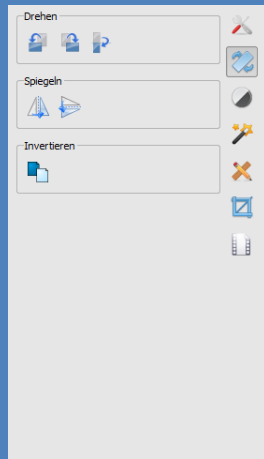

Filter

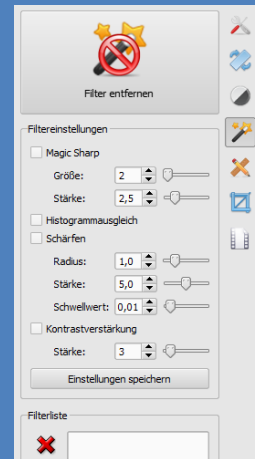


Messungen und Beschriftungen

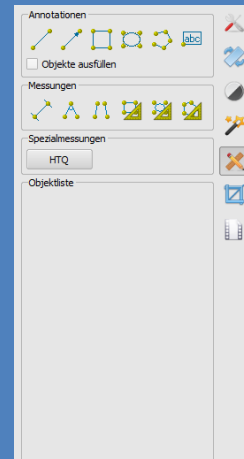

Zwei Bilder vergleichen

1. Den Patienten auswählen und die Bilder laden.
2. Den Button zur Bildaufteilung drücken.

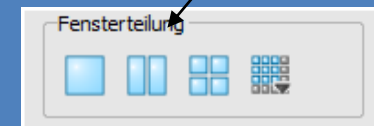

3. Die zu vergleichenden Bilder per Drag & Drop in den geteilten Bildschirm ziehen.
4. Mit Shift + Enter wird die geteilte Ansicht im Vollbildmodus dargestellt.